

initial™ IQ ONE SQIN

Dofarbovací a vrstviaci keramický systém

Maximálna estetika v rámci mikrovrstvy



90% všetkých zubov sú zoradené v kľúčovom odtieni ...

Už nejaký čas je možné vyrobiť posteriórne náhrady z jedného materiálu, ako je napríklad lítium disilikát alebo zirkón, ktoré sú dostatočne estetické bez náročnej techniky nanášania vrstiev. Čoraz viac rozšírené sú monolitické náhrady.

GC Initial IQ ONE SQIN – dofarbovací a vrstviaci keramický systém – s ktorým je možné rovnakým spôsobom dosiahnuť esteticky príťažlivé náhrady vhodné pre frontálny úsek. Na základe GC Initial filozofie „IQ“ sa systém skladá z rôznych keramických materiálov, ktoré sú dokonalo prispôsobené na spoločné použitie a zaisťujú tak efektívnu a esteticky presvedčivú finalizáciu monolitických náhrad a náhrad s redukciou bukálneho povrchu.



Initial IQ ONE SQIN



Initial IQ Lustre Pastes ONE

Univerzálna dofarbovacia keramická hmota pre vonkajšie použitie, ako aj na vnútornú charakterizáciu subštruktúr. Ak sa použije so SQIN, slúži tiež pre väzobné pálenie.

- ✓ konzistencia pripravená na použitie
- ✓ inherentná fluorescencia
- ✓ trojrozmerná hĺbka farieb

Initial IQ SQIN

Dotvára finálne kontúry Vašich náhrad a ponúka živosť, textúru a prirodzený lesk.

- ✓ jednoduché nanášanie a vytvorenie textúry
- ✓ efekt samoleštenia
- ✓ trojrozmerná povrchová štruktúra

Initial Spectrum Stains

Jemné práškové farbičky pre mimoriadne individuálne efekty.

- ✓ nekonečné farebné nuansy
- ✓ môžu sa zmiešať s Lustre Pastes ONE alebo SQIN



S GC Initial IQ ONE SQIN - dofarbovacím a vrstviacim keramickým systémom - môžete rýchlo a ľahko dosiahnuť vysoké estetické výsledky porovnateľné s náhradami s konvenčným postupom vrstvenia, ale s výraznou úsporou času.



Ako to funguje? Vyberiete si ...

Technika nanášania mikro vrstiev (monolitické náhrady s redukciou bukálneho povrchu)

Pasty GC Initial IQ Lustre Pastes ONE sa používajú pre individualizáciu konštrukcie a tiež ako väzobná vrstva, ktorá zabezpečuje dokonalé spojenie s keramikou SQIN. Pri technike nanášania mikro vrstiev sa SQIN ľahko nanáša v hrúbke vrstvy 0,1 - 0,6 mm na povrch zafarbený a fixovaný pomocou Lustre Pastes ONE. Vďaka vylepšenej zmesi na báze feldsparu (živca) sa vytvorí realistický 3D efekt, ktorý prináša sýtosť farieb a realistickú translucenciu. Po zmiešaní s tekutinou Form and Texture sa prášky SQIN premenia na vysoko kompaktnú a hustú keramickú suspenziu. Ich jedinečné aplikačné a modelovacie vlastnosti umožnia vytvorenie individuálnej povrchovej textúry so samolešiacimi vlastnosťami po vypálení keramickej hmoty.




... získate to, čo zafarbíte!

Technika farbenia (monolitické náhrady)

Trojrozmerná dofarbovacia keramická hmota na báze feldsparu (živca) GC Initial IQ Lustre Pastes ONE, ktorá je k dispozícii v konzistencii pripravenej na použitie, dodá Vaším monolitickým náhradám farebnú hĺbku a prirodzenú translucenciu s veľmi prirodzeným leskom.

Pasty možno aplikovať v silnejšej vrstve, ktorá zaručuje neprekonateľnú živosť a veľmi prirodzený lesk. Vďaka svojej inherentnej fluorescencii sú pasty vyladené tak, aby zvýšili fluorescenciu Vašich monolitických náhrad, najmä keď používate Lustre Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

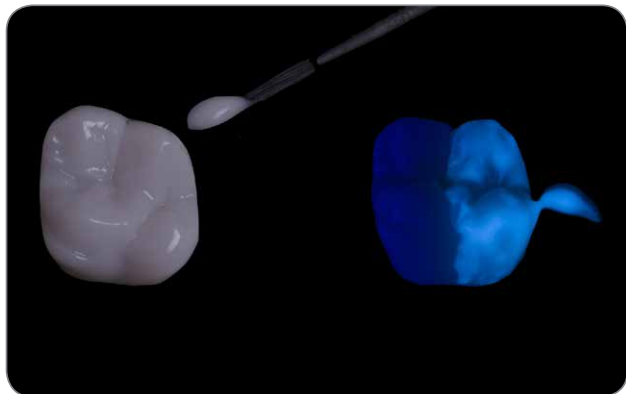



Estetika

Krása vo vnútri



Prírodná fluorescencia



Maximálna estetika v mikro vrstve



Krása zubov aj ďasien



Jednoduchý a časovo úsporný



V mokrej fáze vytvoríte tvar a jemnú textúru.
Po vypaľovaní nedôjde k žiadnym zmenám.





Inicial IQ Lustre Pastes ONE slúžia tiež ako väzobné pálenie.



Samoleštiace vlastnosti.
Získajte nádherný lesklý povrch po jednom vypaľovaní.

Praktický

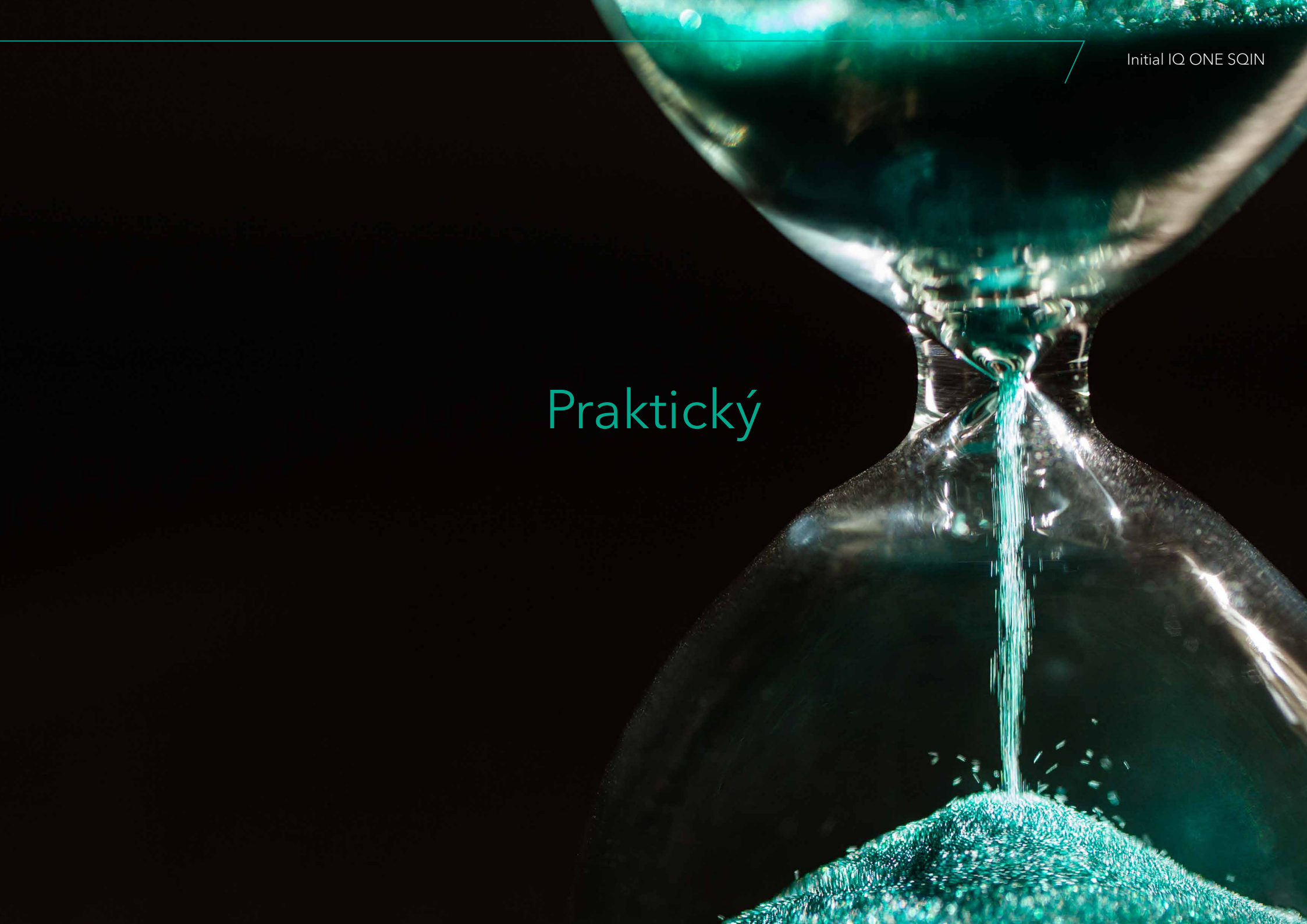

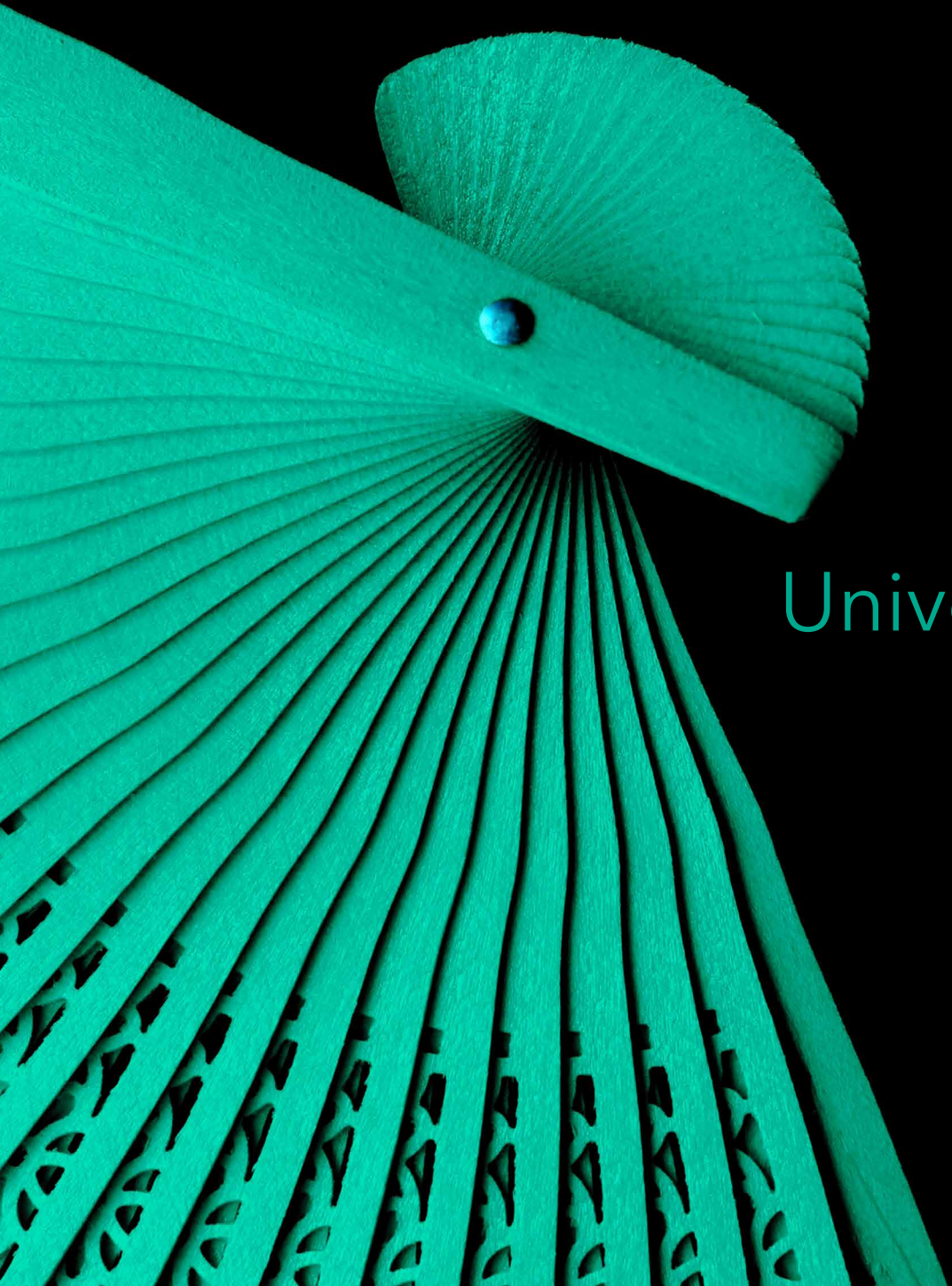

Univerzálny

Jeden systém ...




... pre všetky Vaše Zr a LDS celokeramické náhrady



... pre techniku nanášania mikro vrstiev aj techniku farbenia



... pre predné aj zadné náhrady

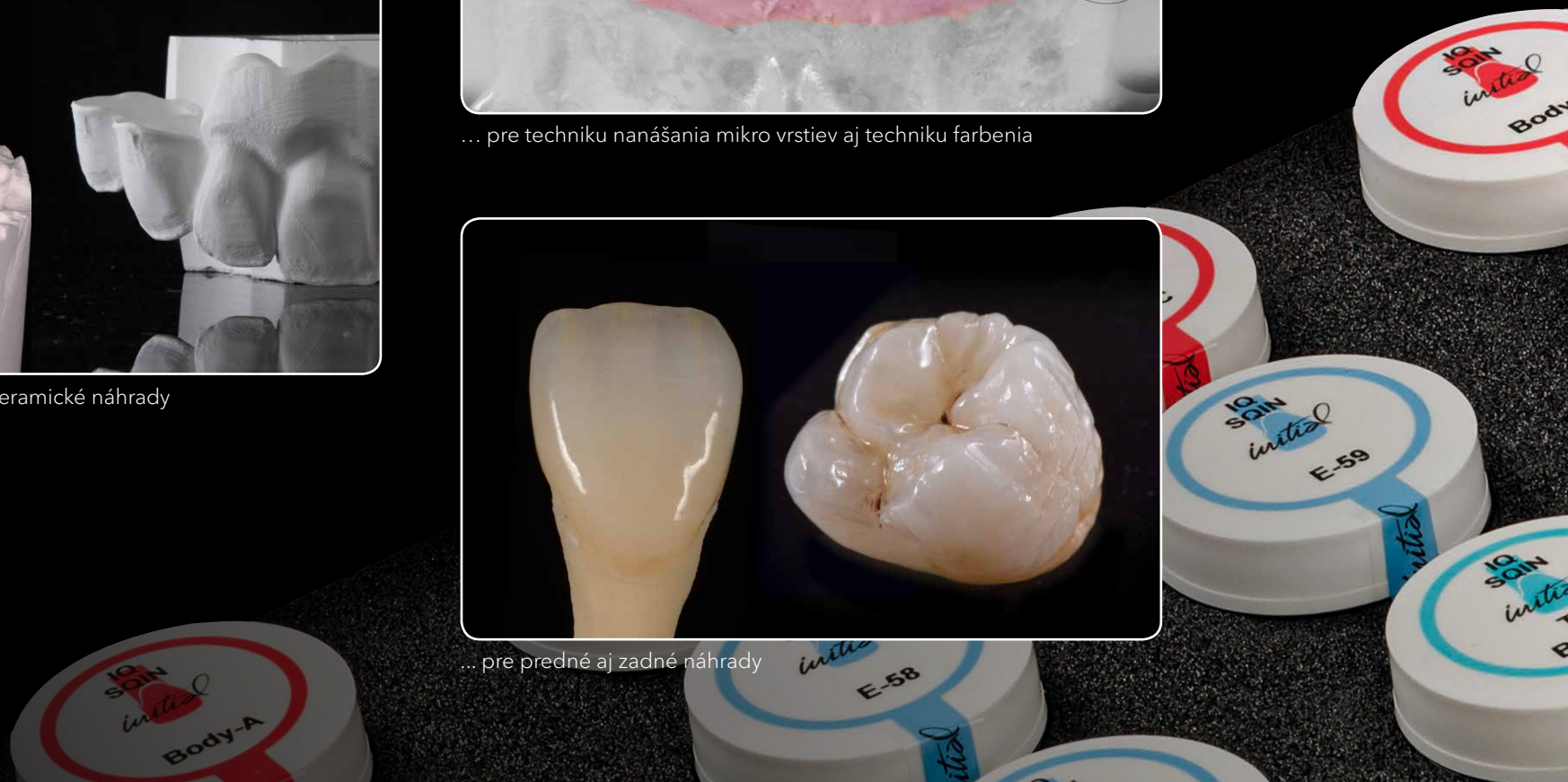



GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET (kompletná sada)

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1x SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid (riediaca tekutina), 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid (obnovovacia tekutina), 8 ml
- 5x IQ SQIN prášok Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN prášok Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN prášok Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN prášok GUM (svetlý, tmavý, neutrálny), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid (modelovacia tekutina), 25 ml
- 1x IQ LP ONE miešacia podložka
- 1x IQ LP ONE štetec 00
- 1x IQ LP ONE štetec 2
- 1x IQ LP ONE plastový kryt
- 1x IQ ONE SQIN Technický manuál
- 1x IQ LP ONE schéma odtieňov
- 1x SPS schéma odtieňov



GC Initial IQ SQIN SHADES SET (sada odtieňov SQIN)

- 5x IQ SQIN prášok Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN prášok Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN prášok Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN prášok GUM (svetlý, tmavý, neutrálny), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ SQIN Technický manuál



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE V-SHADES SET (sada V-odtieňov Lustre Pastes)

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid (riediaca tekutina), 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid (obnovovacia tekutina), 8 ml
- 1x IQ LP ONE miešacia podložka
- 1x IQ LP ONE štetec 00
- 1x IQ LP ONE štetec 2
- 1x IQ LP ONE schéma odtieňov
- 1x IQ LP ONE Technical Manual

Technika ONE SQIN - pre všetky Vaše zirkónové náhrady a náhrady z lítium disilikátu

- ✓ Vytvorte tvar a detaily jemnej textúry v mokrej fáze - po vypaľovaní nedôjde k žiadnym zmenám.
- ✓ Samoleštiace vlastnosti - získajte nádherný lesklý povrch po jednom vypaľovaní.
- ✓ Optimálna úroveň fluorescencie - zaisťuje vzhľad prirodzených zubov za všetkých svetelných podmienok.
- ✓ Maximálna estetika v mikro vrstve.



Fotografie s láskavým dovolením:

ZTM Michael Brüschi (Nemecko): str. 7 (obrázok v strede a vpravo); str. 9 (obrázok v strede vpravo a dole vpravo);

str. 13 (ľavá strana, obrázok v strede vľavo, hore vpravo a pravá strana, obrázok dole vpravo)

MDT Leonardo Cavallo (Taliansko): str. 7 (obrázok vľavo); str. 9 (obrázok hore vľavo)

MDT Patric Freudenthal (Švédsko): str. 13 (pravá strana, obrázok v strede vľavo)

ZTM Stefan Roozen (Rakúsko): str. 6 a str. 10; str. 13 (ľavá strana, obrázok dole vpravo)

*initial*TM IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sk-SK>