

initialTM Lustre Pastes ONE și Spectrum Stains

Soluții de colorare

Arta
colorării
ceramicii

Pictați-vă estetica cu Initial™ de la GC

GC oferă utilizatorilor ceramicii Initial cea mai modernă și estetică soluție de colorare externă a ceramicii. În funcție de caz și de proprietățile dorite, două linii de produse, Initial Lustre Pastes ONE și Initial Spectrum Stains, vor oferi rezultatul dorit. Acestea sunt compatibile cu un interval cuprinzător de CTE oferindu-vă posibilitatea de a lucra cu gama completă de ceramică GC Initial și cu aproape orice alt tip de ceramică.



Initial Lustre Pastes ONE, ceramica unică pentru caracterizare 3D de la GC, oferă fluorescență, profunzime și autenticitate tuturor lucrărilor dumneavoastră prețioase... doar prin pictare. Nu mai aveți nevoie de stratificare complexă sau cicluri adiționale de ardere pentru a obține o vitalitate neîntrecută și un luciu natural al tuturor restaurărilor dumneavoastră.

Nuanțele Initial Lustre Pastes GUM au la bază o selecție atentă a unor particule ceramice colorate în nuanțe de roz, nefluorescente, pentru a imita perfect aspectul gingiei naturale. Puteți obține o tranziție cu aspect natural de la marginile coroanei la gingie.

Initial Spectrum Stains oferă un efect de colorare 2D și poate fi utilizat atât pentru caracterizare internă, cât și pentru colorare externă. Va oferi un rezultat final extrem de rafinat cu o suprafață lucioasă, conservând în același timp textura.

Ambele produse sunt complementare. În unele cazuri se folosesc împreună; de exemplu, Spectrum Stains poate fi combinat cu Lustre Pastes NF sau direct cu pulberile de construcție.

Compatibilitatea familiei Lustre Pastes & Spectrum Stains
cu linia ceramică Initial

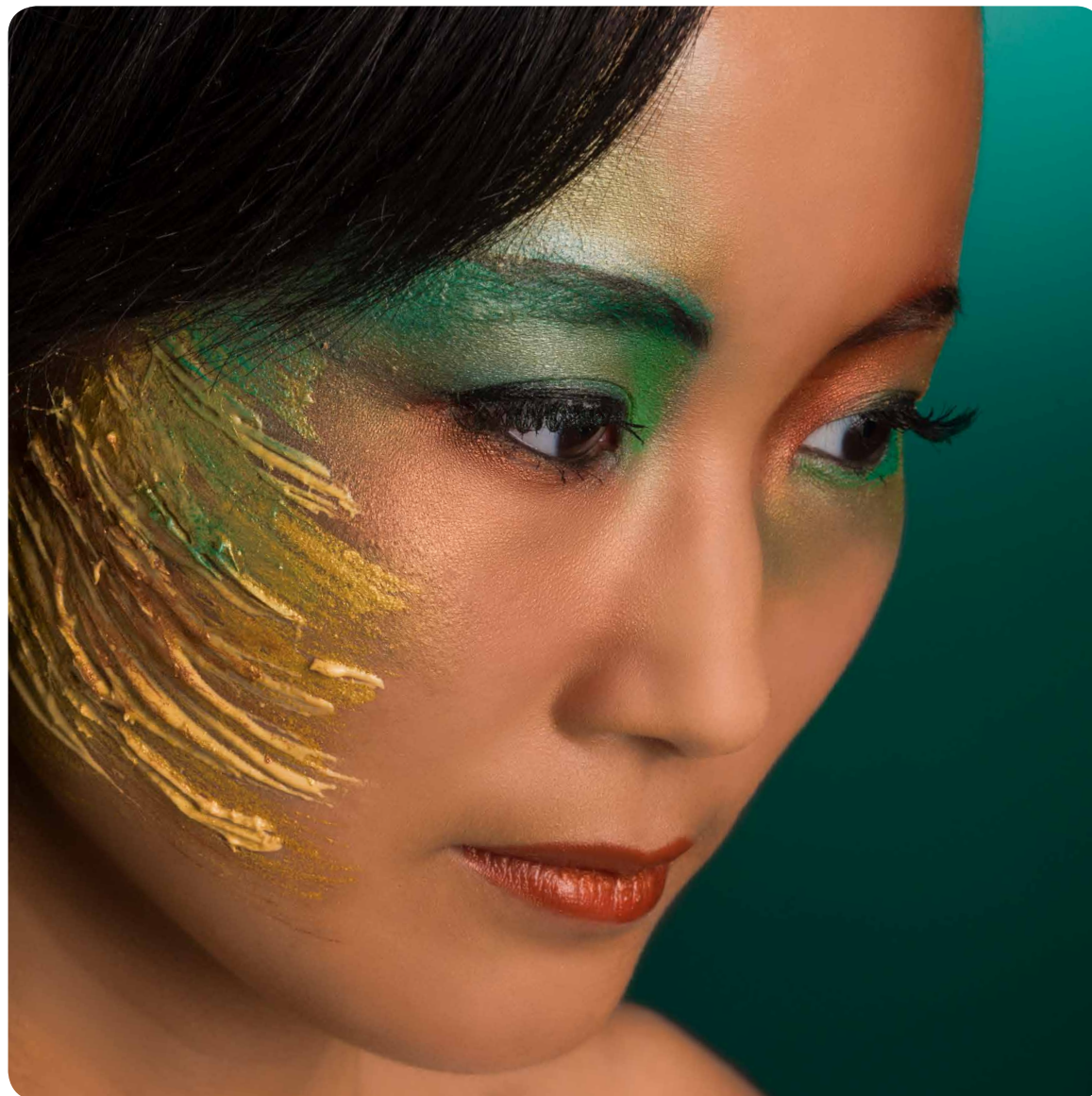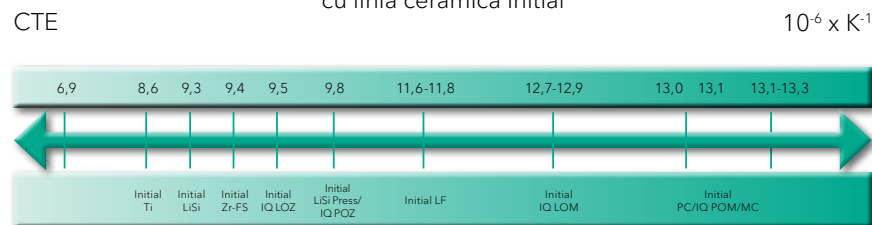

Lustre Pastes ONE nuanțe V

Cu nuanțele "Body A-D", nuanțele V necesare pot fi obținute foarte ușor și rapid. Cu celelalte culori disponibile, puteți caracteriza suplimentar restaurările pentru un rezultat final perfect asimilat.

Fluo



Nivel optim de fluorescență.

Asigură aspectul de dinți naturali indiferent de tipul de lumină.



Lustre Pastes NF GUM

Cele 5 Lustre Pastes unice în nuanțe gingivale permit o adaptare individualizată pentru a imita armonios nuanțele gingivale naturale. Puteți utiliza cele 4 Gum Modifiers, ce se pot mixa, obținând astfel o creativitate nelimitată și capacitatea de a reproduce chiar și cele mai delicate cazuri gingivale fără probleme.



Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains sunt pulberi pentru caracterizare disponibile într-o gamă de 20 de nuanțe ce îmbunătățesc estetica restaurărilor dumneavoastră.

Indiferent de modul de aplicare se va obține un rezultat final foarte bun menținând textura suprafeței și asigurând un nivel optim de luciu.



Estetica suprafețelor cu Initial Lustre Pastes ONE

Finisare perfectă pentru restaurările dumneavoastră

De acum înainte nu mai aveți nevoie de stratificare complexă sau cicluri suplimentare de ardere pentru a obține o vitalitate neîntrecută și luciu natural în cazul tuturor restaurărilor dumneavoastră.

Cu Initial Lustre Pastes ONE, puteți avea profunzime a culorii și translucență naturală ... doar prin pictare.

Initial Lustre Pastes ONE are la bază un mix special de particule ceramice fine. Etapele de realizare a lucrărilor dumneavoastră rămân identice, indiferent de tehnica utilizată pentru a crea baza.

Utilizând lichidul diluant, consistența optimă se menține până la final.

Nuanțele V necesare sunt create prin aplicarea Lustre Pastes ONE "Body A-D". Acest proces cuprinde tot ce este necesar pentru a crea nuanțe V în cel mai scurt timp.

Pentru o caracterizare mai intensă, utilizați pur și simplu celelalte culori disponibile pentru a crea rezultate cu o estetică ridicată.



Bază



Aplicare LP ONE Neutral Fluo



Aplicare Body Shades



Restaurare finală ce redă culoarea și luciul

Modificări simple

Cu Initial Lustre Pastes ONE puteți modifica foarte ușor lucrările dumneavoastră.

Schimbarea culorii, luminozității, valorii gri sau adăugarea de luciu suplimentar nu au fost niciodată atât de simple!



Luminozitate




Culoare




Valoare gri

Colorarea externă a ceramicii permite o reprezentare concretă a celor mai subtile emoții

Lustre Pastes ONE, cu fluorescență îmbunătățită, au fost concepute special pentru a intensifica fluorescența restaurărilor dumneavoastră monolitice și a asigura aspectul de dinți naturali indiferent de tipul de lumină.

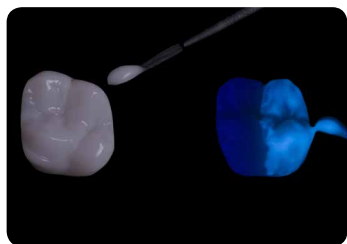


Lustre Enamel Effect - Opal
Bază cu opalescență ridicată ce se utilizează în zona incizală.

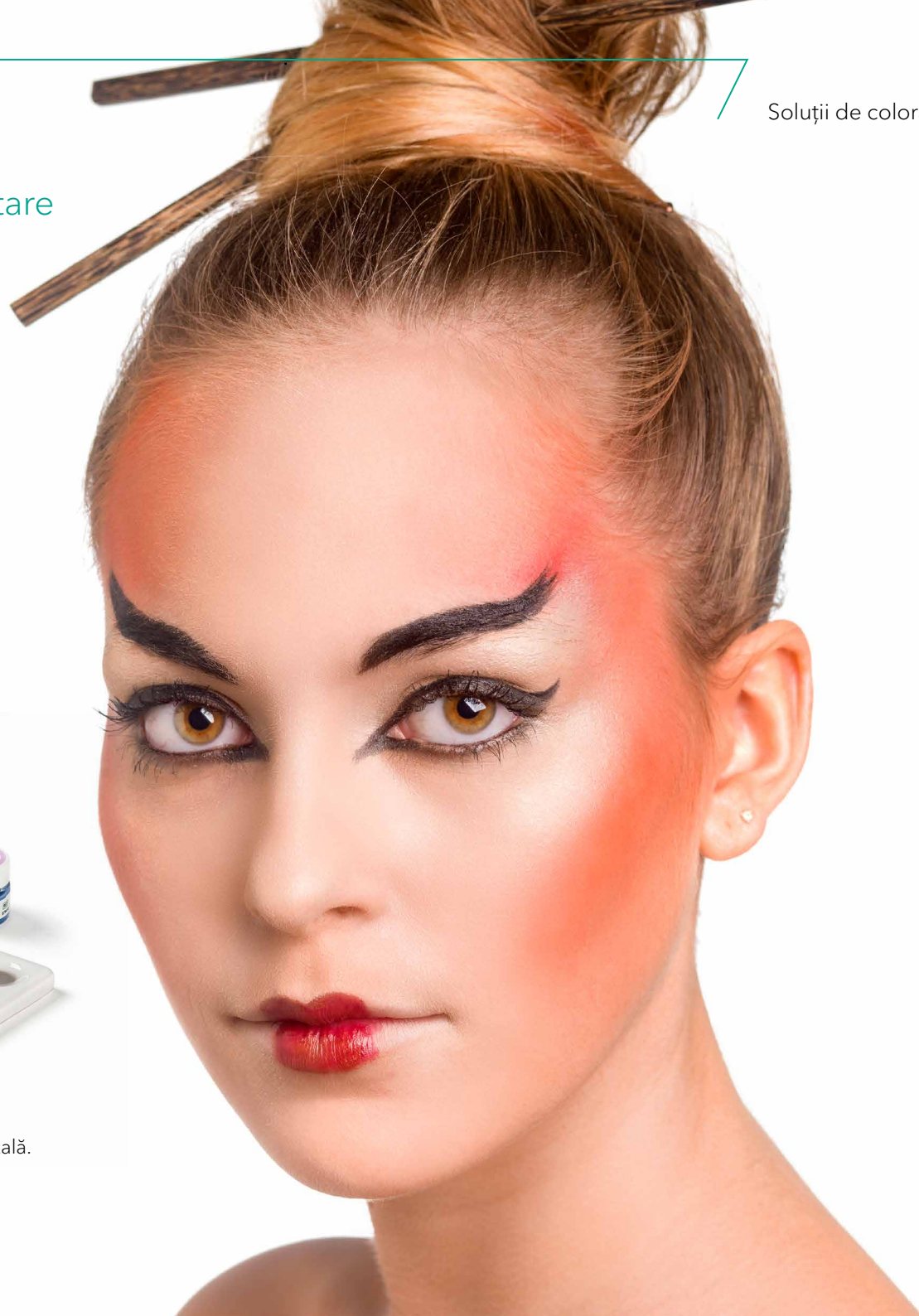


Adăugați caracteristici restaurărilor dumneavoastră one body...

Consistența unică asigură modificări omogene și aspect uniform. Textura suprafeței dorită pe stratul de Lustre Pastes ONE poate fi obținută prin vibrarea sau condensarea ușoară a restaurării. Nu sunt necesare stratificarea complexă sau cicluri suplimentare de ardere; este rapid, simplu și sigur. Pastele sunt gata de utilizare cu proprietăți tixotropice bune, pentru o aplicare simplă și exactă.

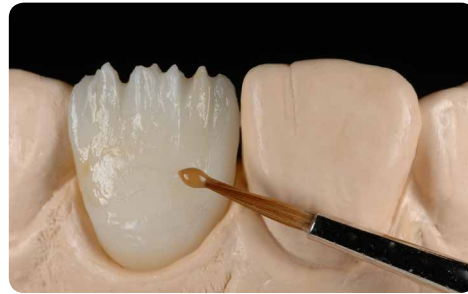


Structurile total anatomice din disilicat de litiu, cum ar fi LiSi Press, pot fi individualizate cu Lustre Pastes ONE.

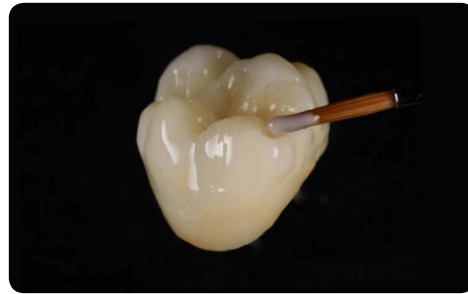

Căutați o modalitate de a adăuga mai multă vitalitate lucrărilor monolitice din zirconia, cum ar fi cele din Initial Zirconia Disk, realizate CAD/CAM? Lustre Pastes ONE este soluția pe care o căutați.



...sau inserați-le în straturi pentru un efect de profunzime.

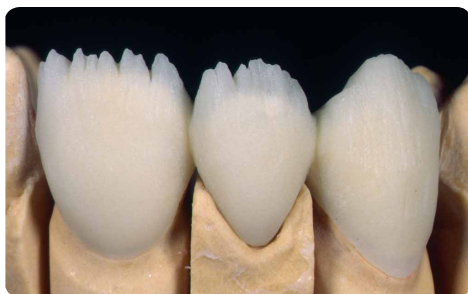

Cut back



Aplicare Lustre Pastes ONE (+ardere)



Aplicare mase Opal/Incisal (+ardere)



Rezultat final

Obțineți cele mai extraordinare rezultate estetice utilizând Initial Lustre Pastes ONE și tehnica cut-back cu lucrările dumneavoastră presate sau stratificate. După caracterizare cu Lustre Pastes ONE, tușele finale sunt realizate cu ceramica de stratificare GC Initial dedicată: CL-F pentru translucență ridicată și mase Opal și Enamel pentru efecte incizale.



Pictați estetica în roșu și alb...

Două seturi, o singură abordare.



Punct de start




Aplicarea diferitelor nuanțe Initial Lustrare Pastes ONE Gum Shades




Caracterizare cu nuanțe V



Rezultat final

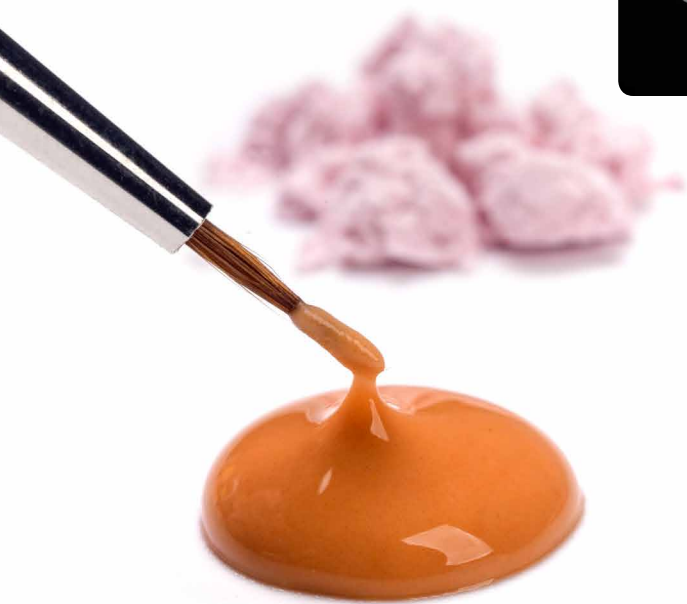

...cu tranziții cu aspect natural, chiar și pe structuri din zirconia.

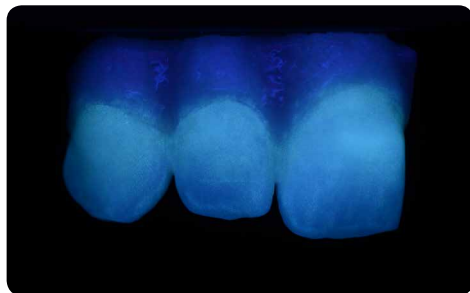

Nivelul optim de fluorescență al Lustre Pastes ONE asigură aspectul de dinți naturali în orice condiții de luminozitate și sunt utilizate ca strat de colorare & individualizare în combinație cu Initial SQIN în cadrul tehnicii de micro-stratificare.

Datorită popularității în creștere a zirconia și a restaurărilor CAD/CAM, GC oferă soluții pentru a menține aceleași standarde estetice. Lucrările dumneavoastră monolitice vor avea un aspect natural și vibrant cu Initial Lustre Paste ONE. Compoziția sa unică oferă mai multă interacțiune cu materialul ceramic situat dedesubt și se comportă optic la fel ca și pulberile ceramice de construcție, sporind efectul 3D al restaurării dumneavoastră. Simplitatea poate fi frumoasă!



Extindeți posibilitățile de caracterizare cu Initial Spectrum Stains


Initial Spectrum Stains conține pigmenți ce sunt sinterizați în interiorul unei matrici feldspatice pentru stabilitate și pentru a permite obținerea unor rezultate ce pot fi reproduse constant. Puteți varia și diversifica la nesfârșit cu Initial Spectrum Stains. Utilizați-le pentru caracterizare internă și externă. Pot fi adăugate, de asemenea, și la masele ceramice sau Initial Lustre Pastes ONE pentru a spori și mai mult posibilitățile!

Două consistențe, ambele păstrând textura


Initial Spectrum Stains poate fi aplicat în consistența preferată de utilizator, sub formă de pastă sau cu o consistență mai lichidă. Indiferent de consistența utilizată, rezultatul final va fi același: caracterizare și luciu cu o definire foarte fină, menținând textura suprafeței restaurării; este echivalentul 2D al lui Initial Lustre Pastes ONE.



Coroană cu textură fină
gata de glazurare

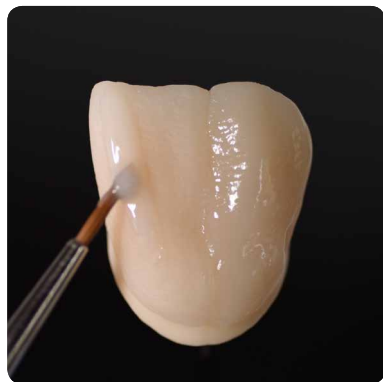

Glazurare cu pasta sau cu
consistență lichidă

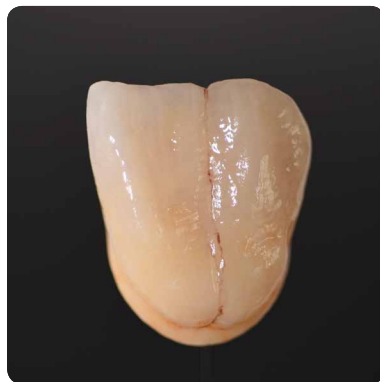

După ardere: caracterizat și glazurat
cu conservarea texturii fine



Caracterizare internă...



... sau externă



Soluții de colorare 2D și 3D a ceramicii... de la GC

GC Initial Lustre Pastes ONE Set - V-Shades

- 4 nuanțe Body și 1 Neutral pentru a obține o restaurare în nuanțe V în cel mai simplu mod.
- 9 nuanțe Effect pentru a vă elibera potențialul artistic și a caracteriza cu pete, decalcifieri, dungi și fisuri.

Compoziția setului:

1 x Neutral (4 g)
 1 x Neutral Fluo (4 g)
 1 x Value (4 g)
 4 x Body Shades (4 x 4 g)
 11 x Enamel Effect Shades (11 x 4 g)
 1 x Diluting Liquid (8 ml)
 1 x Refreshing Liquid (8 ml)
 1 Mixing dish
 2 Brushes
 Colour Chart
 Technical Manual



GC Initial Lustre Pastes NF Set - Gum Shades

- 5 paste pentru gingie, colorate, gata de utilizare cu tixotropie ideală pentru o aplicare simplă și exactă.
- 4 Gum Modifiers mixabile, ce permit o creativitate nelimitată în a copia armonia gingiei naturale.

Compoziția setului:

5 x Gum Shades (5 x 4 g)
 4 x Stain Modifier for LP NF (4 x 3 g)
 Diluting Liquid (8 ml)
 Refreshing Liquid (8 ml)
 1 Mixing dish
 2 Brushes
 Colour Chart
 Technical Manual



GC Initial Spectrum Stains

- 16 pulberi de stain-uri ce oferă rafinament estetic.
- Două consistențe cu un rezultat final rafinat, conservând textura și redând un nivel optim de luciu.

Compoziția setului:

16 x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16 x 3 g)
 1 x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10 g)
 1 x Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml)
 1 x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 ml)
 1 x Initial Spectrum Stains Shade Guide
 Colour Chart
 Technical Manual

Disponibile sub formă de rezerve:

GC Initial Spectrum Glaze Powder
 GL-FLUO (10 g)
 GC Initial Spectrum Stains
 SPS-17 - SPS-20 (3 g)



*initial*TM Lustre Pastes ONE și Spectrum Stains

Soluții de colorare

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<http://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

Reprezentanță în România
Str. Carol Davila 21A,
etaj 2, ap.17, sector 5
RO - 050451 București
Tel: +40.31.425.75.27
info.romania@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/ro-RO>