


Cree su mundo  
con **Initial** de **GC**,

el sistema de cerámica completo para todas las aplicaciones.



# Bienvenido a la familia „Initial One Body“

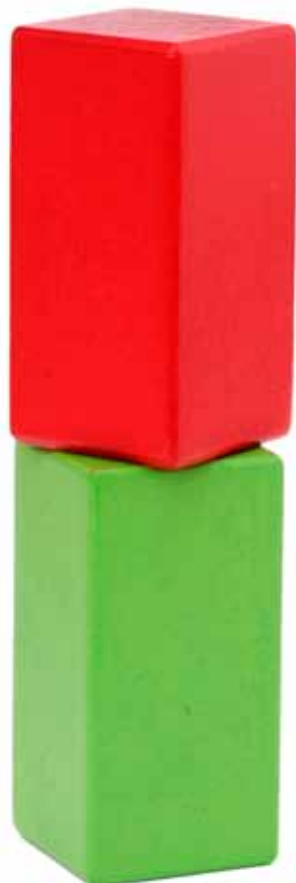

Initial IQ –  
„One Body“ de GC.

Layering-over-Zircon  
Layering-over-Metal  
Press-over-Zircon  
Press-over-Metal

Alta y constante calidad,  
estética reproducible y  
trabajo rentable.

**GC**

# GC Initial IQ -

Layering-over-Metal y  
Press-over-Metal y

Gracias al desarrollo del concepto Initial IQ - One Body, GC puede ofrecer sistemas de cerámica compactos para la reproducción rápida y fácil de los colores Vita® estándar. Este nuevo enfoque permite a los protésicos dentales concentrarse en la forma y la función y crear vitalidad y una apariencia natural con los Initial IQ Lustre Pastes NF, los maquillajes de cerámica tridimensionales recientemente desarrollados. El sistema Initial IQ - One Body de GC ofrece calidad constante y resultados estéticos una y otra vez con menos materiales.

El concepto «One Body» es un procedimiento económico y simple donde la forma se crea con un color de dentina.

- Compatible con las aleaciones estándar para cerámica, así como con todas las tecnologías basadas en zirconio.
- Disponible como sistema de estratificación o de inyección.
- De aprendizaje rápido y fácil.
- Consistencia y predictibilidad del trabajo independientemente de la técnica o el material.

## Paso 1: Preparación basada en una estructura

### Zirconio

#### Layering-over-Zircon



Estructura de dióxido de zirconio.

#### Press-over-Zircon



Aplique una capa de Initial IQ Light Reflective Liner de GC para enmascarar la estructura de zirconio.



Aplique una fina capa fluida (wash) de Frame Modifiers.

### Metal

#### Layering-over-Metal



Estructuras de metal coladas o con el sistema CAD / CAM.


#### Press-over-Metal



Aplique una fina capa de Opaquer fluida (wash) con Initial MC Paste Opaque de GC con la ayuda de un pincel. Antes de la cocción se aplican Fluo crystals en la superficie del Opaquer.



## Coeficiente de expansión térmica

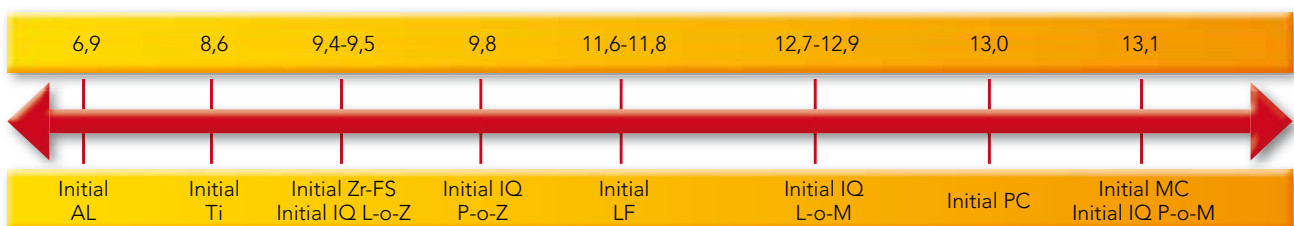

Si desea más información, consulte los manuales técnicos Initial de GC.

Fotografías: ZTM Michael Brusch de M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf (Alemania)

\* VITA® es una marca registrada de VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen (Alemania).

# - One Body

Layering-over-Zircon  
Press-over-Zircon

## Paso 2: Restauración basada en la técnica seleccionada

### Estratificación

- Una reconstrucción de la pieza y con una sola masa.
- Una alternativa rápida y económica para coronas y puentes cerámicos estéticos.
- Sin necesidad de invertir en aparatología específica.

#### Layering-over-Zircon



Modelado de toda la pieza con una sola masa.



Resultado tras una cocción.

#### Layering-over-Metal



### Inyección

- El encerado de la pieza con la anatomía final es sencillo de realizar.
- Gracias a la amplia gama de ceras prefabricadas se ahorra tiempo en la reconstrucción de la pieza.
- Solamente aplique la cera en el margen y presione para alcanzar una adaptación marginal perfecta.
- Estas exclusivas pastillas premezcladas proporcionan una reproducción constante de los colores y, por tanto, menos repeticiones del trabajo.

#### Press-over-Zircon



#### Press-over-Metal



Tras las cocciones de Opaquer, se realiza un encerado completo con la ayuda de un sistema de preformas de cera. Se necesita un espesor de 0,8 mm para lograr un resultado final aceptable y estético.

Resultado tras la inyección.

## Paso 3: Acabado con Lustre Pastes NF de GC

Los Initial IQ Lustre Pastes son maquillajes cerámicos tridimensionales desarrollados para aportar profundidad de color y una translucidez de aspecto natural a los sistemas Initial Press-over e Initial Layering-over. Ahora puede devolver la vida a sus coronas y puentes Press-over o Layer-over con el Set de Lustre Paste NF, que se adaptan perfectamente a las cerámicas con coeficientes de expansión térmica tanto «bajos» como «altos». Los Lustre Pastes NF están disponibles en tarros, listos para utilizar y están formados por partículas de cerámica muy finas que se pueden aplicar en capas más gruesas; en este caso, podrá comprobar la vitalidad inigualable y el aspecto natural que aportará a sus restauraciones.



## Presentaciones



### GC Initial IQ – One Body, Layering-over-Zircon set

Contenido:  
7 Light Reflective Liners de 3 g (1-6, BL), Liner Thinner, 5 IQ/L-O-Z Body de 50 g (A, B, C, D, BL), líquido para modelar, manual técnico



### GC Initial IQ – One Body, Layering-over-Metal set

Contenido:  
5 MC/Paste Opaque de 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 IQ/L-O-M Body de 50 g (A, B, C, D), líquido para modelar, placa de cristal, pincel, manual técnico



### GC Initial IQ – One Body, Press-over-Zircon set

Contenido:  
4 Frame Modifier (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x Effect Press Ingots y 10 masas de corrección (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 y 3 blanqueadores), líquido para modelar, Sistema mediano cilindro-base (200 g) + cilindro de silicona, 10 émbolos de inyección de un uso para pastillas de 2 g



### GC Initial IQ – One Body, Press-over-Metal set

Contenido:  
Fluo Crystals, IQ/Effect Ingots: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, blanqueadores: AO-M, BO-M, BOO-M, masas de corrección IQ: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, blanqueadores: AOM, BO-M, BOO-M, líquido para modelar LF, Sistema mediano cilindro-base, cilindro de silicona, émbolos de inyección de un uso para pastillas de 2 g



### GC Initial IQ – Lustre Pastes NF set

Contenido:  
1 neutral (4 g), 1 valor (4 g), 4 colores Body (4 de 4 g), 8 colores de efecto de esmalte (8 de 4 g), líquido de diluir (8 ml), líquido de recuperación, (8 ml), 1 paleta de mezcla, 2 pinceles, instrucciones de uso con imágenes

Si desea más información sobre esta familia de materiales dentales avanzados, póngase en contacto con su representante de GC lo antes posible.

#### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
B – 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
http://www.gceurope.com

#### GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.  
Edificio Codesa 2  
Playa de las Americas, 2, 1º, Of. 4  
ES - 28230 Las Rozas, Madrid  
Tel. +34.916.364.340  
Fax. +34.916.364.341  
info@spain.gceurope.com  
http://spain.gceurope.com

