


Luo oma maailmasi
Initial GC:ltä

kattava keraaminen järjestelmä jokaiseen indikaatioon.



Tervetuloa Initial
„One Body”-perheeseen

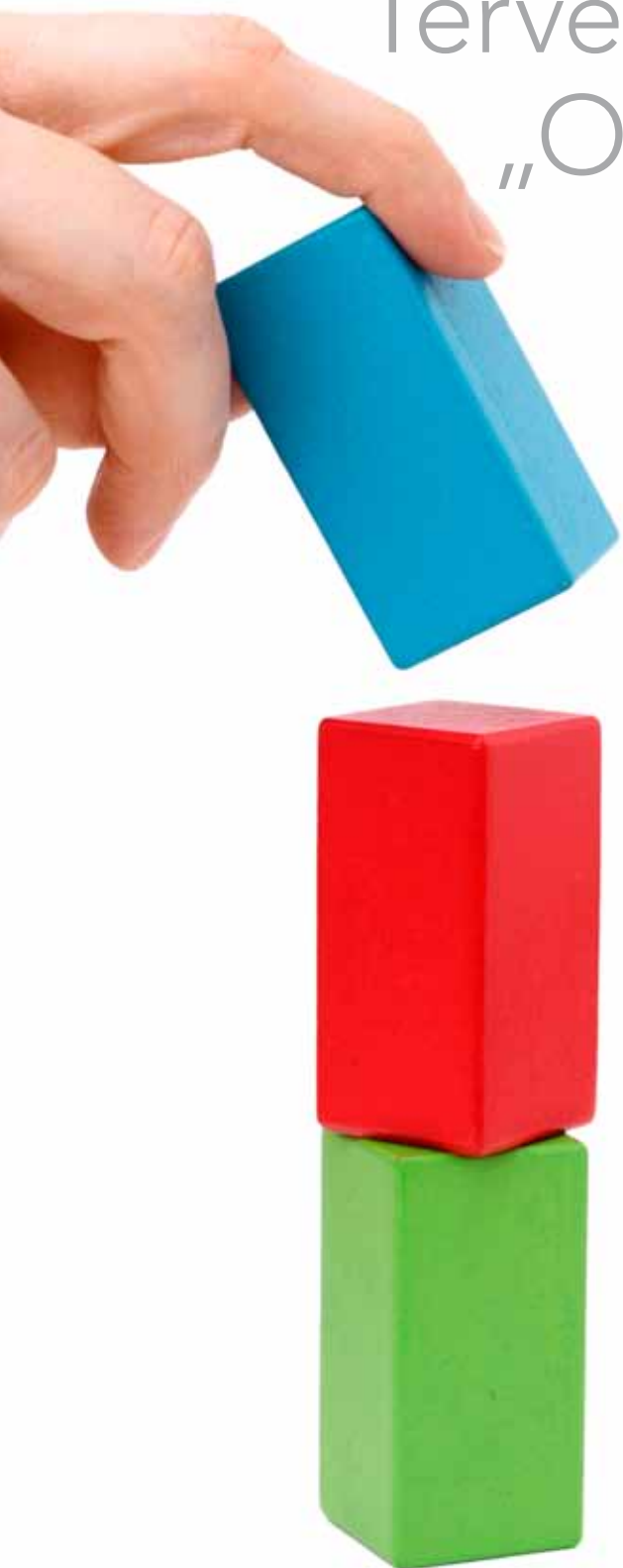

Initial IQ –
„One Body” GC: ltä.

Layering-over-Zircon
Layering-over-Metal
Press-over-Zircon
Press-over-Metal

Aina korkealaatuista
estetiikkaa ja taloudellista
työskentelyä.

GC

GC Initial IQ -

Layering-over-Zircon j
Press-over-Zircon j

Initial IQ - One Body -järjestelmän kehittämisen ansiosta GC pystyy nyt tarjoamaan kompakteja keraamisia järjestelmiä Vita®-vakiosävyjen nopeaan ja helppoon toistamiseen. Järjestelmän ansiosta hammasteknikot voivat keskittyä muotoiluun, toiminnallisuuteen, eloisuuden ja luonnollisen vaikutelman luomiseen Initial IQ Lustre Pastes NF, 3-ulotteisten keraamisten pinnoitteiden avulla. GC Initial IQ - One Body -järjestelmällä saadaan aikaan tasaista laatua ja esteettisiä tuloksia pienemmällä materiaalmäärällä.

'One Body' -konsepti on yksinkertainen ja taloudellinen menetelmä, jossa muoto syntyy yhdellä jauheella.

- Sopii yhteen sekä tavallisten päällepolttometallien että Zirkonia töiden kanssa.
- Saatavana sekä kerrostus- että prässäysjärjestelmänä.
- Nopea ja helppo oppia.
- Laadukas lopputulos tekniikasta tai materiaalista riippumatta.

Vaihe 1: Valmistelu runkomateriaalista riippuen

Zirkonia

Layering-over-Zircon



Zirkoniarunko.

Press-over-Zircon



Levitä zirkoniarugolle kerros GC Initial Light Reflective Lineria.



Levitä ohut kerros Power Frame Modifieriä.

Metalli

Layering-over-Metal



Valamalla tai CAD/CAM-menetelmällä valmistetut metallirungot.


Press-over-Metal



Levitä ohut GC Initial MC -pastaopaakkikerros. Ennen polttoa opaakkipinnalle vietään Fluo Chrystal kiteitä.



Lämpölaajenemiskerroin

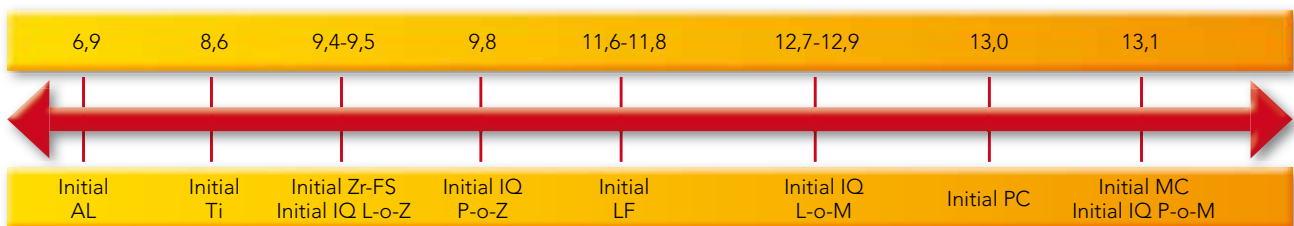

Lisätietoja on GC Initialin teknisissä käyttöohjeissa.

Kuvaus: ZTM Michael Brusch – M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Saksa

* Vita® on Saksan Bad Säckingenissä toimivan Vita® - Zahnfabrikin rekisteröity tavaramerkki.

- One Body

Layering-over-Metal
Press-over-Metal

Vaihe 2: Työskentely valitulla tekniikalla

Kerrostus

- Helppo muotoilu vain yhdellä massalla.
- Nopea ja taloudellinen vaihtoehto esteettisille keraamisille kruunuille ja silloille.
- Ei tarvetta sijoittaa erikoislaitteisiin.

Layering-over-Zircon



Muotoilu perusmassalla.

Layering-over-Metal



Tulos yhden polton jälkeen.



Press-over

- Muotovahaus on helppo tehdä.
- Tehdasvalmisteisten vaha-aihioiden ansiosta rakenteen muotoilu on nopeaa.
- Riittää kun vahaat reunan ja prässäät, niin saat täydellisen istuvuuden.
- Ainutlaatuiset esivärjätetyt valunapit tuovat väreihin eloisuutta ja parantavat esteettisyyttä.

Press-over-Zircon



Opaakkipolttojen jälkeen tehdään muotovahaus tehdasvalmisteisten vaha-aihioiden avulla. 0,8 mm:n kerrospaksuudella saadaan esteettisesti hyväksyttävä lopputulos.

Press-over-Metal



Tulos prässäyksen jälkeen.



Vaihe 3: Viimeistely GC Lustre Pastes NF -pastoilla

Initial IQ Lustre Pastes NF -pastat ovat 3-ulotteisia keraamisia pinnoitteita, jotka on suunniteltu tuomaan Initial Press-over- ja Layering-over-järjestelmiin värien syvyyttä ja luonnollista läpikuultavuutta. Nyt saat Press-over- tai Layer-over-kruunut ja -sillat heräämään todella henkiin Lustre Paste NF -pastoilla, jotka sopivat optimaalisesti sekä matalapolttoisille että korkeapolttoisille keramioille. Käyttövalmiissa pakkauksissa myytävät Lustre Pastes NF -pastat perustuvat hienoihin keraamisiin hiukkasiin, ja niitä voi levittää paksuimpana kerroksena, jolloin töistä tulee ylivoimaisen eloisia ja luonnollisen kiiltäviä.



Pakkaukset



GC Initial IQ – One Body, Layering-over-Zircon set

Sisältö:
7 x Light Reflective Linerit 3 g (1-6, BL), Liner Thinner, 5 x IQ/L-O-Z Body 50 g (A, B, C, D, BL), muotoiluneste, käyttöohje



GC Initial IQ – One Body, Layering-over-Metal set

Sisältö:
5 x MC/Pasta opaakki 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), muotoiluneste, lasialusta, sivellin, käyttöohje



GC Initial IQ – One Body, Press-over-Zircon set

Sisältö:
4 x Power Frame Modifier (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x esivärjätyt Valunapit (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x valkaisu), 10 x korjausjauhe (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x valkaisu), muotoiluneste, Ring Base System Medium(200 g) + silikonirengas, 10 x prässäysmännät 2 g:n valunapeille



GC Initial IQ – One Body, Press-over-Metal set

Sisältö:
Fluo Chrystals, IQ/esivärjätyt valunapit: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/esivärjätyt valunapit valkaisu: AO-M, BO-M, BOO-M, IQ/ korjausjauhe: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/korjausjauhe valkaisu: AOM, BO-M, BOO-M, LF/ muotoiluneste, Ring Base System Medium, prässäysmännät 2 g:n valunapeille



GC Initial IQ – Lustre Pastes NF set

Sisältö:
1 x Neutral (4 g), 1 x Value (4 g), 4 x Body Shades(4 x 4 g), 8 x Enamel Effect Shade (8 x 4 g), Diluting Liquid(8 ml), Refreshing Liquid, (8 ml), 1 sekoitusastia, 2 sivellintä, kuvallinen käyttöohje

Jos haluat lisätietoja tästä pitkälle kehitetystä hammashoitomateriaaliperheestä, ota yhteyttä GC:n edustajaan.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
B – 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Vanha Hommaksentie 11B
FIN - 02430 Masala
Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
info@finland.gceurope.com
http://finland.gceurope.com

GC