

Пакување



GC Initial IQ - One Body, Слоевитост-врз-цирконииум сет

Содржи:
7 x лајнери за одразување на светлина 3 g (1-6, BL),
разредувач за лајнер,
5 x IQ/L-O-Z Body (основа)
50 g (A, B, C, D, BL),
моделирачка течност,
техничко упатство



GC Initial IQ - One Body, Слоевитост-врз-метал сет

Содржи:
5 x MC/опакер паста 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/L-O-M Body (основа)
50 g (A, B, C, D), моделирачка течност, стаклена плочка, четка, техничко упатство



GC Initial IQ - One Body, Прес-врз-цирконииум сет

Содржи:
4 x Power Frame Modifier (модификатор за скелет) (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x прес инготи за ефекти (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), 10 x коректурен прав (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Bleach), моделирачка течност, средство за основата на прстенот (200 g) + силиконски прстен, 10 x едностранни прес клипови за 2 g пелети



GC Initial IQ - One Body, Прес-врз-метал сет

Содржи:
Fluo кристали, IQ/инготи за ефекти: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/инготи за бели ефекти: AO-M, BO-M, BOO-M, IQ/коректурен прав: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/бел коректурен прав: AO-M, BO-M, BOO-M, LF/моделирачка течност, средство за основата на прстенот (200 g) + силиконски прстен, 10 x едностранни прес клипови за 2 g пелети



GC Initial IQ - Lustre Pastes Set NF

Содржи:
1 x Neutral (неутрал) (4 g),
1 x Value (вредност) (4 g),
4 x Body (основа) бои (4 x 4 g),
8 x Enamel effect бои (8 x 4 g),
разредувачка течност (8 ml),
обновувачка течност (8 ml),
1 сад за мешање, 2 четки,
упатство за работа со слики

За да научите повеќе за овој современ систем на стоматолошки материјали, повикајте го вашиот GC претставник уште денес.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Овластен дистрибутер
за Македонија:
ДЕНТОМЕД-М
Ул. "Божмија" бр. 2/2
Пошт. факс. 182
1000 Скопје
Тел./Факс: 02/24.62.739
Тел. 02/24.64.781
dentomed@t-home.mk

GC


z LLF MK 7 56/05/11

Креирај го твојот СВЕТ со Initial од GC,

универзален керамички систем за секоја индикација.



Добредојдовте во Initial „One Body“ семејството

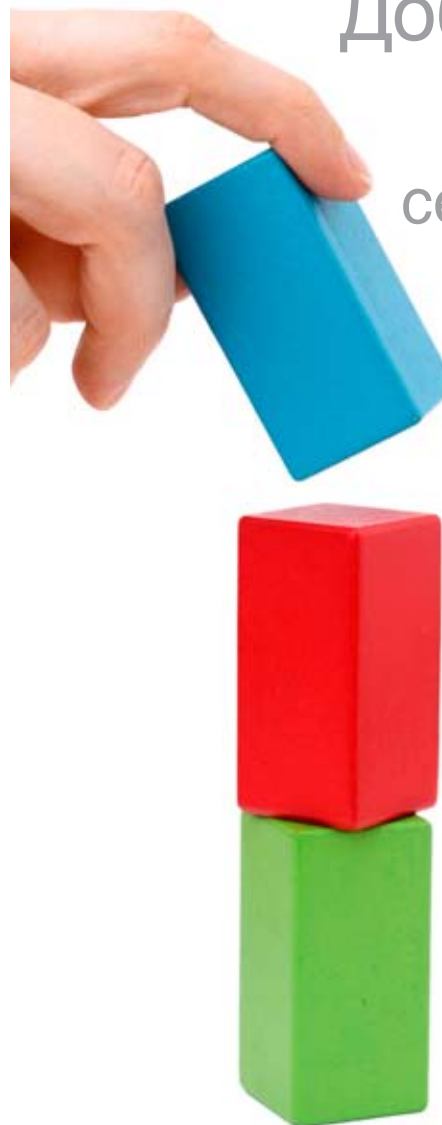

Initial IQ -
„One Body“ од GC.

Layering-over-Zircon
Слоевитост врз цирконииум
Layering-over-Metal
Слоевитост врз метал
Press-over-Zircon
Прес-врз-цирконииум
Press-over-Metal - Прес-врз-метал

Постојано висок квалитет,
повторлива естетика и
економичност во работењето.

GC

GC Initial IQ - One Body

Слоевитост врз метал и слоевитост врз циркониум
Прес-врз-метал и прес-врз-циркониум

Со развојот на Initial IQ - One Body концептот, GC сега може да понуди компактни керамички системи за брза и лесна репродукција на стандардните Vita® бои*. Тоа им овозможува на техничарите да се концентрираат на формата и функцијата и да креираат виталност и природен изглед во крајната фаза, со Initial IQ Lustre Pastes NF, новите 3-димензионални керамички бои. GC Initial IQ - One Body системот покажува постојан квалитет и постојани естетски резултати.

'One Body' концептот е едноставен и економичен, бидејќи контурите се формираат со само една основна (body) боја.

- Одговара со сите стандардни порцелански легури, како и со технологиите на база на Zr.
- Можност за избор помеѓу системот на слоевитост или прес-системот.
- Брзо и лесно се учи.
- Поседува конзистенција и предвидливост во квалитетот на изработката без оглед на техниката или материјалот што се користи.

Постапка 1: Подготовка базирана врз скелетната конструкција

Циркониум

Слоевитост-врз-циркониум



Циркониум диоксид скелетна конструкција.

Прес-врз-циркониум



Нанесете тенок слој на wash од Power Frame Modifiers боите.

Нанесете еден слој на GC Initial IQ Light Reflective Liner за да го маскирате циркониумскиот скелет.

Метал

Слоевитост-врз-метал




Леени или CAD/CAM метални конструкции.

Прес-врз-метал



Нанесете тенок слој на опакер (wash) од нормалните GC Initial MC Paste Opaques со помош на рамна четка. Пред печењето врз опакер површината се нанесуваат Fluо кристали.

CTE

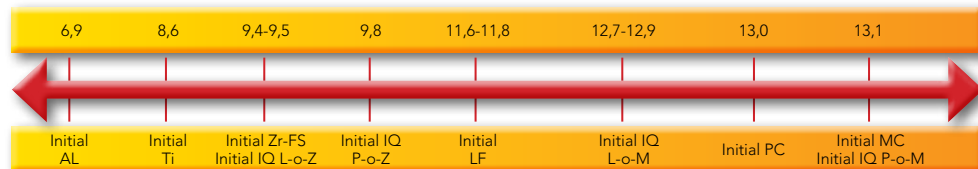

За повеќе информации, ве молиме погледнете во GC Initial техничките упатства. Фотографиите ги направи: ZTM Michael Brüsch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Дизелдорф, Германија *Vita® е заштитена марка на Vita® - фабриката во Bad Säckingen, Германија.

Постапка 2: Изработка базирана врз одбрана техника

Слоевитост-врз:

- Лесна изработка на основата со само еден вид на прав.
- Брза и економична замена за естетските керамички коронки и мостови.
- Не е потребно вложување во специјална опрема.

Прес-врз:

- Нанесувањето на восок по целата контура е мошне лесно.
- Благодарение на големиот избор на готови восочни системи на штифтови на пазарот, изработката на основата ќе ви заштеди доста време.
- Само нанесете восок на работ и пресувајте, ќе добиете совршена маргинална адаптација.
- Уникатни готови инготи кои овозможуваат повторливост на боите, што значи помала потреба од корекции.

Слоевитост-врз-циркониум



Нанесување на body прав по целата контура.

Слоевитост-врз-метал



Резултат после едно печење.



Прес-врз-циркониум



После печењето на опакерот, се врши целосна изработка во восок со помош на готовите восочни системи, со дебелина 0,8 mm за да се постигне очекуваниот краен естетски резултат.

Прес-врз-метал



Резултат после пресувањето.

Постапка 3: Завршување со Lustre Pastes NF

Initial IQ Lustre Pastes NF се 3-димензионални керамички бои, наменети да ја изразат длабочината на бојата и живописната транспарентност на Initial Press-over и Layering-over системите. Вие сега навистина може да внесете живот во вашите Press-over или Layer-over коронки и мостови со помош на Lustre Pastes NF сетовите, кои сосема добро одговараат на „ниско“ и „високо“ топливите CTE керамики. Lustre Pastes NF се спакувани во теглички за да може веднаш да се користат, а во основа содржат фини керамички честички, кои овозможуваат да се нанесуваат во подебели слоеви на места каде е потребна исклучителна живост и природна сјајност на реставрациите.

