

Ambalare



**GC Initial IQ -
One Body,
Layering-over-Zircon**

Conținut:
7 x Light Reflective Liner
3 gr. (1-6, BL), Liner Thinner,
5 x IQ/L-O-Z Body 50 gr.
(A, B, C, D, BL), lichid de
modelat, manual tehnic



**GC Initial IQ -
One Body,
Layering-over-Metal**

Conținut:
5 x MC/Paste Opaque
3 gr. (A2, A3, B2, C2, D2),
4 x IQ/L-O-M Body 50 gr.
(A, B, C, D), lichid de
modelat, placă de mixare,
pensulă, manual tehnic



**GC Initial IQ -
One Body,
Press-over-Zircon**

Conținut:
4 x Power Frame Modifier
(PFM-1, PFM-2, PFM-3,
PFM-4), 10 x Effect Press
Ingots (A1, A2, B1, B2, C1,
C2, D2 + 3 x Bleach),
10 x Correction Powder
(A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2
+ 3 x Bleach), lichid de
modelat, sistem mediu de
inel (200 gr.), inel de silicon,
10 x Cilindri de presare
pentru pastile de ceramică
de 2gr.



**GC Initial IQ -
One Body,
Press-over-Metal**

Conținut:
Fluo Crystals, IQ/Effect
Ingots: A1-M, A2-M, B1-M,
B2-M, C1-M, C2-M, D2-M,
IQ/Effect Ingots Bleach:
AO-M, BO-M, BOO-M,
IQ/ Correction Powder:
A1-M, A2-M, B1-M, B2-M,
C1-M, C2-M, D2-M, IQ/
Correction Powder Bleach:
AOM, BO-M, BOO-M, LF/
lichid de modelat, sistem
mediu de inel (200 gr.), inel
de silicon, 10 x Cilindri de
presare pentru pastile de
ceramică de 2 gr.



**GC Initial IQ -
Lustre Pastes Set NF**

Conținut:
1x Neutral (4 gr.), 1 x Value
(4 gr.), 4 x Body Shades
(4 x 4 gr.), 8 x Enamel Effect
shades (8 x 4 gr.), lichid
de diluare (8 ml), lichid
de împășpare (8 ml),
1 placă mixare, 2 pensule,
imagine IFU

Pentru mai multe informații despre noua generație de materiale dentare Initial, contactați reprezentatul GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, se ct. 1
RO - Bucuresti
Tel. +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

Creați-vă propriul univers
cu **Initial** de la **GC**,

sistemul ceramic complet pentru orice indicație.



Bine ați venit în familia
Initial „One Body”



**Initial IQ -
„One Body” de la GC.**

**Layering-over-Zircon
(Stratificare pe zirconiu)
Layering-over-Metal
(Stratificare pe metal)
Press-over-Zircon
(Presare pe zirconiu)
Press-over-Metal (Presare pe metal)**

Calitate ridicată, lucrări
estetice și economice,
ușor de produs.

GC

Initial IQ - „One Body”

Stratificare pe metal și Stratificare pe zirconiu
Presare pe metal și Presare pe zirconiu

Datorită dezvoltării conceptului Initial IQ - One Body, GC poate oferi mai multe sisteme integrate pentru reproducerea rapidă și cu ușurință a nuanțelor Vita standard. Această abordare îi permite tehnicianului să se concentreze pe forma și funcționalitatea coroanei oferindu-i, în etapa finală, vitalitate și naturalitate, cu ajutorul pastelor de machiaj Initial IQ Lustre Pastes NF, noile ceramici tridimensionale pentru machiaj.

Conceptul „One Body” este o procedură simplă și economică prin care forma coroanei este realizată cu o singură masă ceramică.

- Compatibil cu aliajele standard de porțelan, precum și cu toate tehnologiile pe bază de zirconiu.
- Disponibil pentru sistemele de stratificare sau presare.
- Rapid și ușor de învățat.
- Repetabilitate și predictibilitate din punct de vedere al calității lucrării protetice, indiferent de tehnica sau materialul folosit.

Etapa 1: Pregătirea structurii

Zirconiu

Stratificare pe zirconiu



Structuri de dioxid de zirconiu.

Presare pe zirconiu



Aplicați un strat subțire de GC Initial IQ Light Reflective Liner pentru a masca structura de zirconiu.



Aplicați Power Frame Modifier în strat subțire.

Metal

Stratificare pe metal



Structuri de metal realizate prin turnare sau CAD/CAM.


Presare pe metal



Aplicați un strat subțire de opac (wash opaque) cu pasta de opac Initial MC, folosind o pensulă plată. Înainte de ardere, pe suprafața de opac se aplică fluo cristale.



CTE

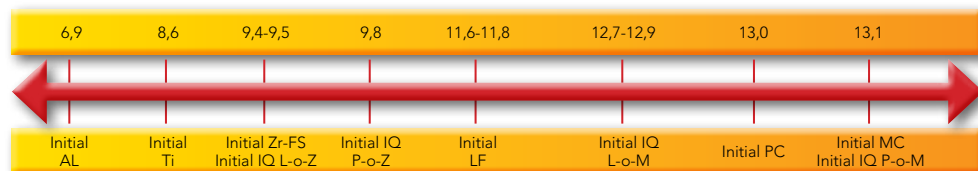

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați manualele tehnice GC Initial.
Sediință foto: ZTM Michael Brusch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Germania.
* Vita® este marcă înregistrată a Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, Germania.

Etapa 2: Realizarea formei în funcție de tehnica selectată

Stratificare

- Ușurință în construcția formei cu o singură masă ceramică.
- Alternativă rapidă și economică pentru coroane și punți estetice.
- Nu necesită investiție în echipament specializat.

Presare

- Ceruirea este ușor de realizat.
- Datorită gamei variate de sisteme de fațete prefabricate în ceară, macheta de ceară se realizează foarte rapid.
- Doar ceruiți marginile și presați, pentru a avea o închidere marginală perfectă.
- Pastilele de presare pre-mixate într-o formulă unică oferă repetabilitate în nuanțe și eliminarea eșecurilor.

Stratificare pe zirconiu



Realizarea formei cu o singură masă ceramică

Stratificare pe metal



Rezultatul - după prima ardere



Presare pe zirconiu



După arderea opacului, construcția completă a lucrării se realizează în ceară, cu componente prefabricate. 0.8 mm este grosimea minimă pentru a avea rezultate estetice acceptabile.

Presare pe metal



Rezultatul - după presare.

Etapa 3: Finisarea cu GC Lustre Pastes NF

Initial IQ Lustre Pastes NF sunt ceramici tridimensionale pentru machiaj, create pentru a îmbogăți sistemele Initial Stratificare pe metal sau zirconiu și Presare pe metal sau zirconiu, oferindu-le profunzime a culorii și transparență naturală. Acum puteți, într-adevăr, să aduceți la viață coroanele și punțile realizate cu sistemele Stratificare pe metal sau zirconiu și Presare pe metal sau zirconiu cu ajutorul seturilor de Lustre Pastes NF, care au o compatibilitate optimă atât pentru un CTE „scăzut”, cât și pentru unul „ridicat”. Disponibile în borcane gata de folosit, Lustre Pastes NF sunt create din particule fine de ceramică și pot fi aplicate într-un strat mai gros, conferind vitalitate și naturalitate restaurărilor dumneavoastră.

