

# Onlej i overlej - od A do Ž

GC pametna rješenja za djelomične indirektno restauracije





# Pametna rješenja za djelomične indirektne restauracije

## 1. PREPARACIJA

## 2. IZBOR MATERIJALA

### 1. Preparacija od A do Ž

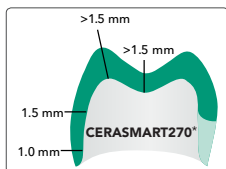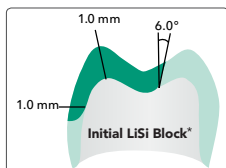

Praktični savjeti za preparaciju:

- ✓ Imedijatno pečaćenje dentina sredstvom za spajanje **G2-BOND Universal** ili **G-Premio BOND** zaštititi će dentin od kontaminacije, eliminirati postoperativnu osjetljivost i povećati čvrstoću spajanja
- ✓ Potkopana područja ispuniti materijalom **everX Flow** za očuvanje i ojačanje preostalog zubnog tkiva
- ✓ Po potrebi izraditi koronarno premještanje gingivnog ruba materijalom **G-aenial Universal Injectable**
- ✓ Brzo i učinkovito privremeno cementirati pomoću materijala **Tempsmart DC** ili **Revotek LC**

\* Detaljne upute za preparaciju potražiti u uputama za uporabu odgovarajućih materijala.

### 2. Izbor materijala od A do Ž

Koristiti **Initial LiSi Block**, potpuno kristalizirani blok litij-disilikatne keramike za sljedeće:

Koristiti **CERASMART270**, blok hibridne keramike za sljedeće:



- ✓ Restauracija kompromitiranih zubi (pukotine, veća oštećenja, nedostatak više kvržica)
- ✓ Keramički antagonisti
- ✓ Odrasli pacijenti



- ✓ Restauracija nekompromitiranih zubi (manja oštećenja)
- ✓ Pacijenti s bruksizmom
- ✓ Mlađi pacijenti



**Initial LiSi Block overlejš na zubu 36**

Slike ustupio dr. Pierre Dimitrov, Bugarska

## 3. ZAVRŠNA OBRADA I BOJANJE

## 4. CEMENTIRANJE

## 3. Završna obrada i bojanje od A do Ž



Initial LiSi Block

Brzo, lako i estetsko:

**Poliranje**

- ✓ Standardni kotačići za poliranje

ILI

**Karakterizacija**

Initial LiSi Block

- ✓ **Initial IQ Lustre Pastes ONE** dodaje boju i fluorescenciju

CERASMART270

- ✓ **OPTIGLAZE color** za bojanje i premaz



CERASMART270

## 4. Cementiranje od A do Ž

Kod niske retencije i vidljivih rubova, indirektno djelomične restauracije u području stražnjih zubi zahtijevaju materijal za cementiranje visoke čvrstoće spajanja, otpornosti na trošenje i postojanosti boje. Univerzalno rješenje za cementiranje **G-CEM ONE** je prvi izbor za cementiranje u ovim indikacijama. Koristiti ga s primerom **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** (primer za poboljšanje adhezije) ili sredstvom za spajanje **G-Premio BOND** ako je potrebna dodatna adhezija.

Ako preparacija (npr. za ovelej) ima dovoljno retencije/otpornosti, ovaj se korak može u potpunosti izostaviti.



**Initial LiSi Block overlej na zubu 37 cementiran kompozitom G-CEM ONE i G-CEM ONE AEP**

Slike ustupio dr. Riccardo Tempesta, Italija



# Onlej i overlej - od A do Ž



SKENIRATI ZA DETALJNE UPUTE KORAK PO KORAK

## 1. PREPARACIJA



### G-Premio BOND

Jednokomponentni svjetlosno-polimerizirajući univerzalni adheziv

### G2-BOND Universal

Univerzalni svjetlosno-polimerizirajući adheziv u dvije bočice



### everX Flow

Tekući kompozit ojačan kratkim vlaknima za nadomještanje dentina

### G-aenial Universal Injectable

Restaurativni kompozit visoke čvrstoće

## 2. IZBOR MATERIJALA



### Initial LiSi Block

Blok litij-disilikatne keramike za CAD/CAM za direktne restauracije



### CERASMART270

Blok hibridne keramike za CAD/CAM

## 3. ZAVRŠNA OBRADA I BOJANJE



### Initial IQ Lustre Pastes ONE

Trodimenzionalna keramika za bojanje



### OPTIGLAZE color

Svjetlosnopolimerizirajući zaštitni premaz s nano punilom

## 4. CEMENTIRANJE



### G-CEM ONE System

Samoadhezivni akrilatni kompozitni cement



### G-CEM ONE Universal System

Samoadhezivni akrilatni kompozitni cement

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark, Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax.+32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

### GC EUROPE N.V.

GCEEO Croatia  
Siget 19b  
HR - 10020 Zagreb  
Tel. +385.1.61.54.597  
Fax. +385.1.61.54.597  
info.croatia@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/hr-HR>