

Овладейте всички  
предизвикателства



Красота в  
**червено** & бяло

*initial*

GC Initial®  
IQ Lustre  
Pastes NF  
от GC

универсалният  
3D оцветител  
за керамика

**GC**

# Овладейте всички предизвикателства с Initial от GC

**Lustre Pastes NF** от GC, **уникалният 3D оцветител за керамика**, придаващ **естетика** на всичките Ви безценни творения... само чрез оцветяване.

Вече не се нуждаете от сложно наслагване или допълнителни цикли на изпичане, за да постигнете **ненадмината жизненост** и **естествен блясък** на всички Ваши възстановявания. Посредством Lustre Pastes NF (на основата на керамични частици) стъпките за завършване на Вашите корони или мостове са идентични, независимо от техниката, която използвате при създаването на керамично възстановяване.

Налага се да промените цвета, якостта, нивото на сивеене или повърхностния блясък на Вашите послойни корони и мостове? Можете да използвате Lustre Pastes NF върху всяка керамика от семейството на GC Initial.



Търсите начин да придадете жизненост на своите CAD/CAM монолитни конструкции? Lustre Pastes NF е решението за всеки случай.



Ако предпочитате прес-керамика... използвайте GC Initial IQ - One Body, Press-over системите или използвайте литиев дисиликат като основа, а след това нарисуйте характеристиките на по-късен етап.



Тази система Ви позволява да индивидуализирате Вашите корони и мостове и да създадете реалистичен преход от ръба на короната към гингивата... само чрез оцветяване.




## Нарисувайте Вашата бяла & червена естетика с Lustre Pastes NF от GC

## Lustre Pastes NF Гингивални цветове

Всичко от което се нуждаете, за да създадете естествен преход от ръба на короната към гингивата, в няколко лесни стъпки.

Петте уникални гингивални Lustre Pastes позволяват индивидуална адаптация, пасваща на естествените венечни цветове в истинска хармония. Може да използвате 4 смесващи се Гингивални Модификатори, позволявайки неограничено творчество и възпроизвеждане и на най-деликатния гингивален случай без какъвто и да е проблем.

Lustre Pastes NF Gum Shades са на основата на специални не-флуоресциращи, розово-оцветени керамични частици за перфектна имитация на изгледа на естествения венец.

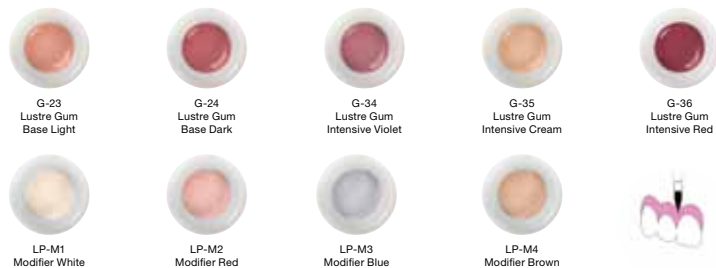


## Lustre Pastes NF V-цветове

Необходимият V-Цвят се създава чрез нанасянето на Lustre Pastes NF, вариращи от "Body A - D". Този процес, който отнема само 2 минути, притежава всичко, което е необходимо за създаването на V-Цветове. Като майстор, просто използвайте другите налични цветове, за да постигнете високо-естетични резултати.

Посредством Lustre Pastes NF лесно може да модифицирате конвенционалните керамични корони или мостове. Смяната на блясъка, яркостта и цвета никога не е била толкова лесна!

Най-бързото решение за всичките Ви монолитни циркониево-оксидни конструкции.

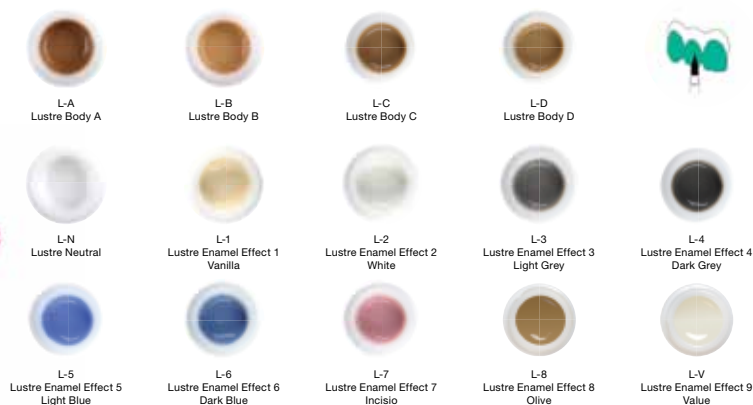

# Две системи - Един подход

Нарисувайте Вашата **червена** & бяла естетика





# Перфектният завършек на Вашите възстановявания

Необходимият V-Цвят се създава чрез нанасянето на Lustre Pastes NF, вариращи от "Body A - D". Този процес, който отнема само 2 минути, притежава всичко, което е необходимо за създаването на V-Цветовете. Като майстор, просто използвайте другите налични цветове, за да постигнете високо-естетични резултати.



Основа



Нанасяне на Body Shades



Окончателно Възстановяване, предоставящо цвят & блясък

Посредством Lustre Pastes NF може лесно да модифицирате Вашите конвенционални керамични корони и мостове. Смяната на блясъка, цвета и яркостта никога не е била толкова лесна!



Блясък



Цвят



Якост

Постигнете най-добрите естетични резултати, използвайки Lustre Pastes NF при cut-back техниката на Вашите прес или послойни конструкции. След оцветяване с Lustre Pastes NF, финалните щрихи са направени с CL-F и за висока транспарентност Opal/Incisal.



Изрязване



Използвани са Lustre Pastes



Opal/Incisal маси




Окончателно

## Най-бързото решение за всички Ваши циркониево-оксидни конструкции





- Широко обхват на КТР, позволяващ работа с цялата гама от GC Initial керамика и почти всички други видове керамики или изкуствени порцеланови зъби.
- Без необходимост от сложно насляване или допълнителни цикли на изпичане. Бързо - Лесно - Надеждно. Готови за употреба паста с фини тиксотропни качества, за лесно и прецизно нанасяне.
- Разреждащите и опресняващите течности поддържат оптималната консистенция до края.

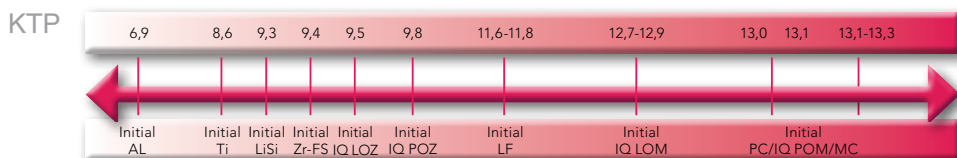

## GC Initial Lustre Pastes Комплект NF V-Цветове

- 5 Основни цвята за лесно постигане на V-Цвят възстановяване.
- 9 цвята за Напреднали, за да разкриете Вашата артистичност и да нарисувате бели петна, декалцификации, линии и пукнатини.

### Съдържание на комплекта:

1x Neutral (4 g)  
 1x Value (4 g)  
 4x Body Shades (4x4 g)  
 8x Enamel effect shades (8x4 g)  
 Разреждаща течност (8 ml)  
 Освежаваща течност (8 ml)  
 1 Смесителен съд  
 2 Четки  
 Разцветка  
 Техническо ръководство



## GC Initial Lustre Pastes NF Комплект Гингивални цветове

- 5 готови за употреба паста с гингивален цвят с идеална тиксотропност за лесно и прецизно нанасяне.
- 4 смесващи се Гингивални Модификатори позволяващи неограничено творчество, имитиращо естествената гингивална хармония.

### Съдържание на комплекта:

5x Gum shades (5x4 g)  
 4x Stain Modifier for LP NF (4x3 g)  
 Разреждаща течност (8 ml)  
 Освежаваща течност (8 ml)  
 1 Смесителен съд  
 2 Четки  
 Разцветка  
 Техническо ръководство



Снимки:  
 Michael Brüsch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Дюселдорф, Германия  
 Philippe Llobell, Saint-Didier, Франция  
 Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Малмю, Швеция  
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, Мюнхен, Германия

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B - 3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
 GC EEO - Bulgaria  
 BG - София 1202  
 ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3  
 Тел. +359.2.983.30.30  
 Факс. +359.2.858.31.37  
 bulgaria@eoo.gceurope.com  
 www.eoo.gceurope.com