

Upravlajte svim svojim izazovima



Ljepota
crvene i bijele boje

initial

GC Initial®
IQ Lustre
Pastes NF,

univerzalne
trodimenzionalne
keramičke boje

GC

Upravljajte svim svojim izazovima pomoću GC Initial

GC Lustre Pastes NF, jedinstvene trodimenzionalne keramičke boje za estetiku svih vaših omiljenih radova... samo bojenjem.

Za **nenadmašnu vitalnost** i **prirodni sjaj** svih vaših radova više ne trebate složeno slojevanje ili dodatne cikluse pečenja.

S bojama Lustre Pastes NF (na bazi finih keramičkih čestica) koraci izrade krunica i mostova ostaju isti, bez obzira na tehniku izrade radova na bazi keramike.

Trebate li promjenu boje, svjetline, vrijednosti sive ili površinskog sjaja slojevanih krunica i mostova? Možete koristiti Lustre Paste NF na svim keramikama GC Initial linije proizvoda.



Tražite način kako dodati vitalnost radovima izrađenim CAD/CAM tehnologijom? Lustre Pastes NF rješenje je za sve slučajeve.



Volite prešati keramiku... koristite GC Initial IQ - One Body, Press-over sisteme ili koristite litij-disilikat kao osnovu, te ih zatim kasnije karakterizujete bojom.



Ovaj vam sistem omogućava individualizovati krunice i mostove i izraditi prirodni prelaz s ruba krunice do gingive... samo bojom.



Obojite keramiku pomoću
GC Lustre Pastes NF
za estetiku bijele i crvene boje

Lustre Pastes NF Gum Shades - boje za gingivu

Sve što trebate za izradu prirodnog prelaza s ruba krunice na gingivu u nekoliko jednostavnih koraka.

Pet jedinstvenih Lustre Pastes boja za gingivu omogućavaju individualno prilagođavanje, za usklađivanje s prirodnim bojama gingive. Možete koristiti 4 modifikatora (Gum Modifiers) koji se mogu miješati i omogućavaju neograničenu kreativnost i reprodukciju najosjetljivije gingive bez ikakvog problema.

Lustre Pastes NF Gum Shades baziraju se na posebnom odabiru nefluorescentnih, rozo obojenih čestica keramike za savršenu imitaciju izgleda prirodne gingive.



G-23
Lustre Gum
Osnovna svjetla



G-24
Lustre Gum
Osnovna tamna



G-34
Lustre Gum
Intenzivna ljubičasta



G-35
Lustre Gum
Intenzivna krem



G-36
Lustre Gum
Intenzivna crvena



LP-M1
Modifikator bijeli



LP-M2
Modifikator crveni



LP-M3
Modifikator plavi



LP-M4
Modifikator smeđi



Lustre Pastes NF - V-boje

Željena V-boja izrađuje se pomoću Lustre Pastes NF u rasponu boje od "Body A - D". Ovaj proces, koji traje samo dvije minute, sadrži sve potrebno za izradu V-boja. Kao stručnjak, jednostavno koristite druge raspoložive boje za izradu visoko estetskih rezultata.

S Lustre Pastes NF lako možete modifikovati konvencionalne keramičke krunice i mostove. Promjena svjetline, vrijednosti boje i boje nikad nije bila lakša!

Najbrže rješenje za sve monolitne radove iz cirkonij-oksidne keramike.



L-A
Lustre Body (osnovna) A



L-B
Lustre Body (osnovna) B



L-C
Lustre Body (osnovna) C



L-D
Lustre Body (osnovna) D



L-N
Lustre Neutral
(neutralna)



L-1
Lustre Enamel Effect 1
Vanilija



L-2
Lustre Enamel Effect 2
Bijela



L-3
Lustre Enamel Effect 3
Svjetlo siva



L-4
Lustre Enamel Effect 4
Tamno siva



L-5
Lustre Enamel Effect 5
Svjetlo plava



L-6
Lustre Enamel Effect 6
Tamno plava



L-7
Lustre Enamel Effect 7
Incisio



L-8
Lustre Enamel Effect 8
Maslinasta



L-V
Lustre Enamel Effect 9
Vrijednost boje



Dva sistema - jedan pristup

Estetika **crvene** i bijele boje



Savršeni završni sjaj vašim radovima



Željena V-boja izrađuju se pomoću Lustre Pastes NF u rasponu boje od "Body A - D". Ovaj proces, koji traje samo dvije minute, sadrži sve potrebno za izradu V-boja. Kao stručnjak, jednostavno koristite druge raspoložive boje za izradu visoko estetskih rezultata.



Baza



Nanošenje Body boja



Izgled završnog rada istaknute boje i sjaja

Pomoću Lustre Pastes NF lako možete modifikovati konvencionalne keramičke krunice i mostove. Promjena svjetline, boje i vrijednosti boje nikad nije bila lakša!



Svjetlina



Boja



Vrijednost

Postignite najbolje estetske rezultate pastama Lustre Pastes NF u cut-back tehnici za svoje prešane ili slojevane radove. Nakon bojanja pastama Lustre Pastes NF, završni izgled postiže se korištenjem CL-F za visoku translucenciju te s opalescentnim i incizalnim bojama.



Cut-back tehnika



Koristite Lustre Pastes



Opalescentne i incizio boje




Završni izgled

Najbrže rješenje za sve monolitne radove iz cirkonij-oksidge keramike





- Širok raspon koeficijenta toplinske ekspanzije, kako bi se mogla koristiti cijela paleta proizvoda GC Initial keramike i gotovo sve vrste drugih keramika ili umjetnih keramičkih zuba.
- Bez složenog slojevanja ili dodatnih ciklusa pečenja. Brzo - lako - sigurno. Paste spremne za upotrebu s finim tiksotropnim osobinama, za lako i tačno nanošenje.
- Tečnosti za razrjeđivanje i osvježavanje za održavanje optimalne konzistencije do završetka rada.

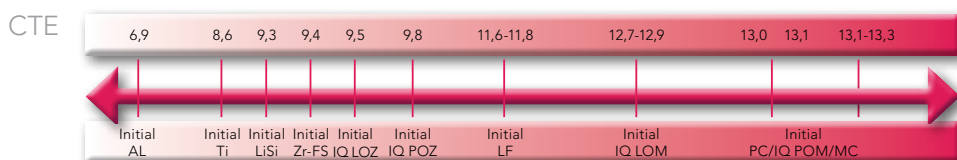

GC Initial Lustre Pastes Set NF - komplet V-boja

- 5 osnovnih boja za najlakše postizanje rada iz V-boje.
- 9 boja za napredno korištenje, za poticanje vaše umjetničke strane i bojenje bijelih mrlja, dekalcefikacija, tankih linija i pukotina.

Sastav kompleta:

1 Neutral boja (4 g)
 1 Value boja (4 g)
 4 Body boje (4x4 g)
 8 caklinskih boja za efekte (8x4 g)
 1 tečnost za razrjeđivanje (8 ml)
 1 tečnost za osvježavanje (8 ml)
 1 podloga za miješanje
 2 kista
 Karta boja
 Tehnički priručnik



GC Initial Lustre Pastes Set NF - komplet boja za gingivu

- 5 pasti gotovih za upotrebu u boji gingive, s idealnom tiksotropnošću, za lako i precizno nanošenje.
- 4 modifikatora za gingivu, koji se mogu miješati i omogućavaju neograničenu kreativnost za oponašanje prirodnog gingivnog sklada.

Sastav kompleta:

5 boja za gingivu (5x4 g)
 4 modifikatora za boje za LP NF (4x3 g)
 1 tečnost za razrjeđivanje (8 ml)
 1 tečnost za osvježavanje (8 ml)
 1 podloga za miješanje
 2 kista
 Karta boja
 Tehnički priručnik



Slike:

Michael Brusch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Njemačka
 Philippe Llobell, Saint-Didier, Francuska
 Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Malmö, Švedska
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, München, Njemačka

GC EUROPE N.V.

Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Bosnia and Herzegovina
 Carice Milice 11
 BIH - 78000 Banja Luka
 Tel. +387.51.47.07.36
 Fax. +387.51.47.07.36
 bosniaherzegovina@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

