

Hallitse kaikki haasteesi



Punaista ja valkoista estetiikkaa

initial

GC Initial[®]

IQ Lustre

Pastes NF

GC:ltä

yleiskäyttöinen,
kolmiulotteinen,
maalattava keramia

GC

Hallitse haasteesi GC Initial tuotteiden avulla

GC **Lustre Pastes NF** on **ainutlaatuinen, kolmiulotteinen, maalattava keramia**, joka tekee töistäsi **esteettisiä** helposti maalaamalla.

Voit nyt loihtia eloisaa ja **luonnollista kiiltoa** kaikkiin töihin ilman monimutkaisia kerrostuksia tai **ylimääräistä kiiltopolttoa**.

Hienoihin keraamisiin hiukkasiin perustuvilla Lustre Pastes NF -pastoilla kruunujen ja siltojen viimeistely on täysin samanlaista riippumatta siitä, mitä tekniikkaa olet käyttänyt keraamisen rakenteen tekemisessä.

Haluatko muuttaa kerrostetun kruunun tai sillan väriä, kirkkautta, harmausastetta tai pintakiiltoa? Lustre Pastes NF -sarja sopii käytettäväksi koko GC:n Initial-keramiavalikoiman kanssa.



Etsitkö keinoa, jolla saisit lisää elävyyttä CAD/CAM-tekniikalla tehtyihin monoliittisiin töihin? Lustre Pastes NF sopii joka tilanteeseen.



Jos mieluiten prässäät keraamiset työt ... aloita silloin joko GC Initial IQ One Body-, Press-over-Metal- tai Press-over-Zircon -järjestelmällä ja karakterisoi lopputulos myöhemmin.



Tämän järjestelmän avulla voit tehdä kruunuista ja silloista yksilöllisiä JA maalata helposti kruunun reunan ja ikenen rajapintaa luonnollisen näköiseksi.



Maalattua valkoista ja punaista estetiikkaa keraamisille töille GC Lustre Pastes NF pastoilla

Lustre Pastes NF Gum shades

Tämän järjestelmän avulla saat kruunun reunan ja ikenen rajapinnan luonnollisen näköiseksi muutamalla helpolla työvaiheella.

Viisi ainutlaatuista Lustre Paste -iänsävyä takaavat yksilöllisen tuloksen, joka näyttää täysin luonnolliselta. Neljän sekoitettavan Gum Modifier -pastan myötä vaihtoehtoja on rajattomasti ja haastavinkin työ onnistuu.

Lustre Pastes NF Gum Shades-järjestelmä perustuu tarkasti valikoituun yhdistelmään ei-fluorisoivia, vaaleanpunaisia keraamisia hiukkasia, joiden avulla on mahdollista jäljitellä tarkasti ikenen luonnollista ulkonäköä.




Lustre Pastes NF V-Shades

Tarvittava Vita-sävy löytyy levittämällä Lustre Pastes NF -pasta Body A-D. Työvaihe kestää vain kaksi minuuttia, ja tuloksena on oikea sävy. Ammattilaisena osaat käyttää myös muita värejä päästäksesi parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Lustre Pastes NF -sarjan avulla pystyt helposti muokkaamaan perinteisiä keraamisia kruunuja ja siltoja. Kirkkauden, heijastavuuden ja värin muuttaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Nopein ratkaisu kaikille monoliittisille zirkoniumoksiditoille.

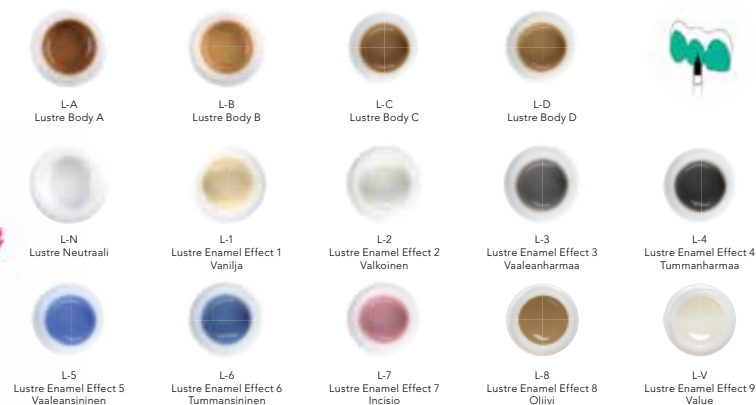

Kaksi järjestelmää – Yksi lähestymistapa

Maalaa kaunis lopputulos **punaisen** ja valkoisen sävyillä



Työn viimeinen silaus



Tarvittava Vita-sävy löytyy levittämällä Lustre Pastes NF -pastoja Body A-D. Työvaihe kestää vain kaksi minuuttia, ja tuloksena on oikea sävy. Ammattilaisena osaat käyttää myös muita värejä päästäksesi parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.



Pohjustus



Body-sävyjen levittäminen



Viimeinen työvaihe tuo pintaan väriä ja kiiltoa

Lustre Pastes NF -pastojen avulla pystyt helposti muokkaamaan perinteisiä keraamisia kruunuja ja siltoja. Kirkkauden, heijastavuuden ja värin muuttaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa!



Kirkkaus



Väri



Heijastavuus

Parhaan esteettisen lopputuloksen saat käyttämällä cut back -tekniikkaa ja Lustre Pastes NF -pastoja prässätyissä ja kerrostetuissa töissä. Kun maalaus on tehty Lustre Pastes NF -pastoilla, viimeinen silaus tehdään läpikuultavuutta tuovalla CL-F sekä opaali-/inkisaalimassoilla.



Cut back



Käytä Lustre Paste -pastoja



Opaali-/Inkisaalimassat




Valmis

Nopein ratkaisu kaikille zirkoniumoksiditöille.





- Laaja lämpölaajenemiskertoimen scaala takaa yhteensopivuuden koko GC:n Initial-keramiavalikoiman sekä useimpien muiden keraamisten ja tehdasvalmisteisten posliinihampaiden kanssa.
- Ei monimutkaista kerrostamista tai ylimääräistä kiiltopolttua. Nopea – Helppo – Turvallinen. Käyttövalmiit pastat, joiden hieno tiksotrooppinen koostumus takaa helpon ja tarkan levityksen.
- Ohennus- ja tuoreutusnesteet auttavat säilyttämään optimaalisen koostumuksen loppuun saakka.

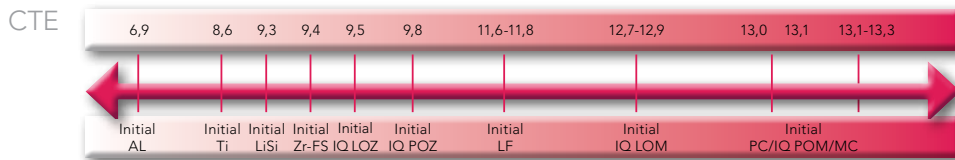

GC Initial Lustre Pastes Set NF – V-Shades -sarja

- 5 perusväriä oikean sävyn helppoon toteutukseen
- 9 erikoisväriä valkoisten pisteiden, dekalsifikaatiojälkien, säröjen ja halkeamien toistamiseen.

Pakkaus sisältää:

1 x Neutraali (4 g)
 1 x Value (4 g)
 4 x Body-sävy (4 x 4 g)
 8 x Kiilletehosteväri (8 x 4 g)
 Ohennusneste (8 ml)
 Tuoreutusneste (8 ml)
 1 sekoitusalususta
 2 sivellintä
 Värikartta
 Käyttöopas



GC Initial Lustre Pastes Set NF – Gum shades -sarja

- 5 käyttövalmista ienkudoksen väriä jäljittelevää pastaa, joiden tiksotrooppinen koostumus takaa helpon ja tarkan levityksen
- 4 sekoitettavaa Gum Modifier -valmistetta, joiden avulla juuri oikean, luonnollisen sävyn löytämiseen on rajattomasti vaihtoehtoja

Pakkaus sisältää:

5 x Gum Shades (4 g)
 4 x Stain Modifier for LP NF (3 g)
 Ohennusneste (8 ml)
 Tuoreutusneste (8 ml)
 1 sekoitusalususta
 2 sivellintä
 Värikartta
 Käyttöopas



Kuvat:
 Michael Brusch, M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Saksa
 Philippe Llobell, Saint-Didier, Ranska
 Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Malmö, Ruotsi
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, München, Saksa

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB
 Finnish Branch
 Vanha Hommaksentie 11B
 FIN-02430 Masala
 Tel. & Fax. +358.9.221.82.59
 info@finland.gceurope.com
 http://finland.gceurope.com

GC