

Совладајте ги сите
ваши предизвици



Убавината во
црвено и бело

initial

GC Initial®
IQ Lustre
Pastes NF
од GC

универзална 3D
обојувачка керамика

GC

Совладајте ги сите ваши предизвици со Initial од GC

Lustre Pastes NF од GC, уникатна 3D обојувачка керамика за да додадете **естетика** на сите ваши прецизни изработки... само со боење.

Повеќе нема потреба од сложено наслојување или дополнителни циклуси на печење за да постигнете **ненадминлива живост и природен сјај** на сите ваши реставрации.

Со Lustre Pastes NF (на база на фини керамички честички), за да ги комплетираше вашите коронки и мостови чекорите остануваат идентични, без оглед на техниката што ја користите при создавање на керамички реставрации.

Дали имате потреба да ја промените бојата, бистрината, сивата вредност или површинскиот сјај на веќе наслоените коронки и мостови? Lustre Pastes NF може да ги користите со целокупниот асортиман на GC Initial керамика.



Барате начин да додадете дополнителна живост на вашите CAD/CAM монолитни изработки? Lustre Pastes NF е решение во секој случај.



Дали повеќе сакате прес-керамички изработки... употребувајќи GC Initial IQ - One Body, Press-over-systems или со употреба на литиум дисиликат како база, и потоа обојте ги карактеристиките во подоцниот стадиум.



Овој систем ви овозможува да ги индивидуализирате вашите коронки и мостови и да создадете природен премин од рабовите на коронката кон гингивата... само со боење.



Обојте ги вашите керамички изработки со Lustre Pastes NF од GC за бела и црвена естетика

Lustre Pastes NF Gum Shades - бои за гингива

Сè што ви е потребно за да создадете природен премин од рабовите на коронката кон гингивата во неколку лесни чекори.

5 уникатни Lustre Pastes бои за гингива овозможуваат индивидуална адаптација, за да се постигнат природните бои на гингивата во природна хармонија. Може да ги употребите 4 Модификатори за гингива кои се мешаат и овозможуваат безгранична креативност за да се репродуцира и најчувствителниот гингивален случај без никаков проблем.

Lustre Pastes NF Бои за гингива се базираат на специјално одбрани не-флуоресцентни, розево обоени керамички честички кои совршено го имитираат изгледот на природната гингива.



G-23
Lustre Gum
Светла База



G-24
Lustre Gum
Темна База



G-34
Lustre Gum
Интензивна виолетова



G-35
Lustre Gum
Интензивна кремаста



G-36
Lustre Gum
Интензивна црвена



LP-M1
Бел модификатор



LP-M2
Црвен модификатор



LP-M3
Син модификатор



LP-M4
Кафеав модификатор



Lustre Pastes NF V-shades

Бараната V-боја се добива со нанесување на Lustre Pastes NF почнувајќи од "Основна боја A - D". Овој процес, кој трае само 2 минути, содржи сè што е неопходно да се добијат V-бои. Како мајстор, едноставно употребете ги другите достапни бои за да постигнете високи естетски резултати.

Со Lustre Pastes NF може лесно да ги модифицирате вашите традиционални керамички коронки или мостови. Менувањето на сјајноста, вредноста и бојата никогаш не било толку лесно!

Најбрзото решение за сите ваши монолитни изработки од циркониумоксид.



L-A
Lustre Body A
(основна)



L-B
Lustre Body B
(основна)



L-C
Lustre Body C
(основна)



L-D
Lustre Body D
(основна)



L-N
Lustre Neutral
Неутрална



L-1
Lustre Enamel Effect 1
Ванила



L-2
Lustre Enamel Effect 2
Бела



L-3
Lustre Enamel Effect 3
Светло сива



L-4
Lustre Enamel Effect 4
Темно сива



L-5
Lustre Enamel Effect 5
Светло сина



L-6
Lustre Enamel Effect 6
Темно сина



L-7
Lustre Enamel Effect 7
Боја за заситеност



L-8
Lustre Enamel Effect 8
Маслинеста



L-V
Lustre Enamel Effect 9
Вредност

Два системи - Еден пристап

Обојте ја вашата **црвена** и бела естетика





Совршен финиш за вашите реставрации

Бараната V-боја се добива со нанесување на Lustre Pastes NF почнувајќи од “Основна боја A - D”. Овој процес, кој трае само 2 минути, содржи сè што е неопходно да се создадат V-бои. Како мајстор, едноставно употребете ги останатите достапни бои за да постигнете високо-естетски резултати.



База



Нанесување на основните бои



Финална реставрација која нуди боја и сјај

Со Lustre Pastes NF може лесно да ги модифицирате вашите традиционални керамички коронки и мостови. Менувањето на сјајноста, вредноста и бојата никогаш не било толку лесно!



Сјајност



Боја



Вредност

Постигнете најдобри естетски резултати со користење на Lustre Pastes NF со техника на засекување кај вашите пресувани или наслоени изработки. По обојувањето со Lustre Pastes NF, финалните потези се прават со CL-F за висока транспарентност и со Опал/Инцизал масите.



Засекување



Нанесување на Lustre Pastes



Опал/Инцизал маси




Завршена изработка

Најбрзото решение за сите ваши МОНОЛИТНИ изработки од ЦИРКОНИУМОКСИД





- Широк опсег на CTE со цел да се компатибилни со комплетната керамика на GC Initial системот и речиси со сите други типови на керамички или вештачки порцелански заби.
- Без сложено наслојување или дополнителни циклуси на печење. Брзо - Лесно - Сигурно. Пасти, спремни за употреба, со фини тиксотропни својства, за лесно и прецизно нанесување.
- Разредувачка и Освежувачка течност за да ја одржат конзистенција оптимална до крајот на работењето.

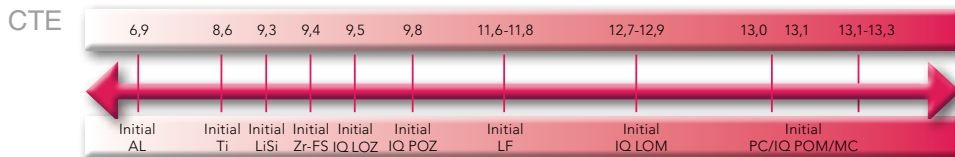

GC Initial Lustre Pastes Set NF Сет - V-бои

- 5 Основни бои за да се постигне реставрација со V-бои на најлесен начин.
- 9 Напредни бои кои ја поттикнуваат вашата уметничка страна за да насликаат бели точки, декалцификации, влакнести линии и пукнатини.

Состав на сетот:

1x Неутрална (4 g)
 1x Вредност (4 g)
 4x Основни бои (4x4 g)
 8x бои за ефекти на емајлот (8x4 g)
 Разредувачка течност (8 ml)
 Освежувачка течност (8 ml)
 1 Сад за мешање
 2 четкички
 Табела со бои
 Техничко упатство



GC Initial Lustre Pastes Set NF Gum Shades Сет бои за гингива

- 5 пасти за гингива спремни за употреба со идеални тиксотропни својства за лесна и прецизна апликација.
- 4 Модификатори за гингива кои се мешаат и овозможуваат безгранична креативност за да се репродуцира природната гингивална хармонија.

Состав на сетот:

5x Бои за гингива (5x4 g)
 4x Модификатор за дамки за LP NF (4x3 g)
 Разредувачка течност (8 ml)
 Освежувачка течност (8 ml)
 1 Сад за мешање
 2 четкички
 Табела со бои
 Техничко упатство



Слики:

Michael Brüsch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Дизелдорф, Германија
 Philippe Llobell, Сент Дидије, Франција
 Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Малме, Шведска
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, Минхен, Германија

GC EUROPE N.V.

Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B - 3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO
 Siget 19b
 HR - 10020 Zagreb
 Tel. +385.1.46.78.474
 Fax. +385.1.46.78.473
 info@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

Овластен дистрибутер

за Македонија:
 ДЕНТОМЕД-М
 Ул. "Бојмија" бр. 2/2
 Пошт. фак. 182
 1000 Скопје
 Тел./Факс: 02/24.62.739
 Тел. 02/24.64.781
 dentomed@t-home.mk