

Krijg elke uitdaging onder de knie



Schoonheid in
rood & wit

initial

GC Initial®
IQ Lustre
Pastes NF
van GC,

het universele,
in 3D penseelbare
keramiek

GC

Krijg elke uitdaging onder de knie met Initial van GC

Lustre Pastes NF van GC, het **unieke, in 3D te penselen keramiek** waarmee u al uw kostbare werkstukken van **esthetiek** voorziet... gewoon door te schilderen.

U hebt geen complexe laagopbouw of extra bakcycli meer nodig om een **ongeëvenaarde vitaliteit** en een **natuurlijke uitstraling** van al uw restauraties te verkrijgen.

Met de Lustre Pastes NF (op basis van fijne keramische deeltjes) blijven de stappen voor het uitvoeren van uw eigen kroon- en brugwerk precies hetzelfde, ongeacht de techniek die u gebruikt voor het maken van restauraties op keramiekbasis.

Wilt u de kleur, de helderheid, de grijstint of de oppervlakteglans van uw opgebakken kronen en bruggen veranderen? U kunt Lustre Pastes NF toepassen op alle keramiek uit het Initial-gamma van GC.



Zoekt u een manier om uw met CAD/CAM gefreesde monolithische werkstukken een vitalere uitstraling te geven? Lustre Pastes NF is de oplossing in elke situatie.



Als u uw keramiek liever perst... begin met het Initial IQ - One Body, Press-over-Metal of Press-over-Zircon systeem van GC en karakteriseer vervolgens in een later stadium.



Met dit systeem kunt u uw kroon- en brugwerk individualiseren EN een levensechte overgang van de kroonrand naar het tandvlees creëren... gewoon door te penselen.



Penseel uw keramische esthetiek
met Lustre Pastes NF van GC
voor zowel witte als rode esthetiek



Lustre Pastes NF Gum-kleuren

Alles wat u nodig hebt om binnen enkele eenvoudige stappen een levensechte overgang van de kroonrand naar het tandvlees te creëren.

Voor een natuurlijke harmonie kunnen de 5 unieke tandvleeskleurige Lustre Pastes individueel aangepast worden aan de natuurlijke gingiva kleur. U kunt de 4 mengbare Gum Modifiers gebruiken voor onbegrensde creativiteit en probleemloze reproductie van de meest delicate tandvleestinten.

De Lustre Pastes NF Gum Shades zijn gebaseerd op een speciale selectie van niet-fluorescerende roze keramiekdeeltjes waarmee het natuurlijke uiterlijk van tandvlees perfect wordt geïmiteerd.




Lustre Pastes NF V-kleuren

De benodigde V-kleur wordt behaald door het aanbrengen van Lustre Pastes NF variërend van "Body A - D". Dit proces, dat slechts 2 minuten duurt, omvat alles wat nodig is om de V-kleuren te maken. Gebruik gewoon de andere beschikbare kleuren om prachtige esthetische resultaten te behalen, als een echte kunstenaar.

Met de Lustre Pastes NF kunt u de uitstraling van uw traditioneel keramisch kroon- en brugwerk gemakkelijk aanpassen. Nog nooit was het zo eenvoudig om de helderheid, grijswaarde en kleur te veranderen.

De snelste oplossing voor al uw monolithische zirkoniumoxidewerkstukken.

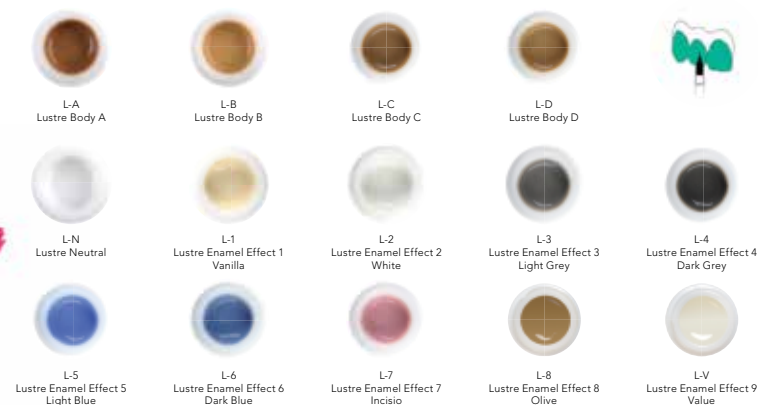

Twee systemen – Één aanpak

Penseel uw **rode** en witte esthetiek





Perfekte afwerking van uw restauraties

Binnen 2 minuten penseelt u de benodigde V-kleur variërend van "Body A-D".
Uw talent en creativiteit kunt u volledig benutten om met de andere beschikbare kleuren
het werkstuk esthetisch te vervolmaken.



Sokkel



Applicatie van Body Shades



Uiteindelijke restauratie
met kleur en glans

Met de Lustre Pastes NF kunt u de uitstraling van uw traditioneel keramisch kroon- en
brugwerk gemakkelijk aanpassen.



Helderheid



kleur



tint

Behaal de beste esthetische resultaten door de Lustre Pastes NF in de cut-backtechniek
te gebruiken voor uw kroon- en brugwerk zowel in de pers- als in de opbouwtechniek.
Nadat de Lustre Pastes NF zijn aangebracht wordt de restauratie afgewerkt met CL-F
voor een hoge translucentie en met de opaal/incisaal massa's.



Cut back



Gebruik Lustre Pastes



Opaal/incisaal massa's




Afgewerkte restauratie

De snelste oplossing voor al uw monolithische zirkoniumoxidewerkstukken





- Ruim uitzettingscoëfficiënt – bereik dat geschikt is voor het complete Initial-keramiekgamma van GC en vrijwel alle andere soorten keramiek en porseleinen prothesetanden.
- Geen complexe laagopbouw of extra bakcycli vereist. Snel – Eenvoudig – Veilig. Gebruiksklare pasta's met uitstekende thixotrope eigenschappen, voor een eenvoudige en precieze kleuraanpassing.
- Met de verdunnings- en verversingsvloeistoffen wordt de consistentie tot het einde optimaal gehouden.

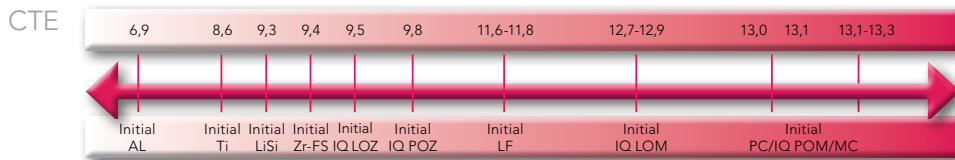

GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-kleuren

- 5 Basic-kleuren om op de eenvoudigste wijze een V-kleurrestauratie te verkrijgen.
- 9 Advanced-kleuren die uw artistieke zijde aanspreken; breng White Spots, ontkalkingsplekken, haarscheurtjes en barstjes aan.

Samenstelling set:

1x Neutral (4g)
 1x Value (4g)
 4x Body Shades (4x4g)
 8x Enamel effectkleuren (8x4g)
 Verdunningsvloeistof (8mL)
 Verversingsvloeistof (8mL)
 1 mengpalet
 2 penselen
 Kleurschema
 Technische handleiding



Kleurenset GC Initial Lustre Pastes Set NF Gum

- 5 gebruiksklare tandvleeskleurige pasta's met een ideale thixotropie voor een gemakkelijke en nauwkeurige kleuraanpassing.
- 4 mengbare Gum Modifiers voor een onbegrensde creativiteit bij het nabootsen van de natuurlijke harmonie van het tandvlees.

Samenstelling set:

5x tandvleeskleuren (5x4g)
 4x Stain Modifier voor LP NF (4x3g)
 Verdunningsvloeistof (8mL)
 Verversingsvloeistof (8mL)
 1 mengpalet
 2 penselen
 Kleurschema
 Technische handleiding



Foto's:
 Michael Brusch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Duitsland
 Philippe Llobell, Saint-Didier, Frankrijk
 Przemek Seweryniak, tandtechnisch laboratorium Cosmodent, Malmö, Zweden
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, München, Duitsland

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental
 http://www.gceurope.com

GC Europe NV
Benelux Sales Department
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 13
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16 74.18.60
 info.benelux@gc.dental
 http://benelux.gceurope.com