

Stăpânește toate provocările



Estetică în  
roșu & alb

*initial*

GC Initial®  
IQ Lustre  
Pastes NF  
de la GC,

ceramica universală  
pentru caracterizare 3D

**GC**

# Stăpânește toate provocările cu Initial de la GC

**Lustre Pastes NF** de la GC, **ceramică unică pentru caracterizare 3D** ce oferă **estetică** tuturor lucrărilor dumneavoastră deosebite... doar prin pictare.

Nu mai sunt necesare stratificări complexe sau cicluri suplimentare de ardere pentru a oferi restaurărilor dumneavoastră o **vitalitate excelentă** și un **luciu natural**.

Cu Lustre Pastes NF (pe bază de particule ceramice fine), etapele de realizare a coroanelor și punților rămân neschimbate, indiferent de tehnica utilizată, pentru a crea restaurări ceramice.

Este necesar să modificați culoarea, luminozitatea, intensitatea nuanței gri sau luciul suprafeței coroanelor și punților stratificate? Puteți utiliza Lustre Pastes NF cu orice ceramică din gama GC Initial.



Căutați o soluție pentru un plus de vitalitate a structurilor monolitice realizate cu sistemele CAD/CAM? Lustre Pastes NF este soluția în orice situație.



Preferăți să presați ceramica ... utilizați GC Initial IQ - One Body, Presare-pe-Metal sau utilizați litiu disilicat ca bază și apoi pictați caracteristicile într-o etapă ulterioară.



Acest sistem permite atât caracterizarea coroanelor și punților, CÂT ȘI realizarea unei tranziții naturale de la gingie la zona marginală a coroanei... doar prin pictare.



Caracterizați estetic ceramica,  
în alb & roșu,  
cu Lustre Pastes de la GC

## Lustre Pastes NF Gum Shades (Nuanțe gingivale)

Tot ceea ce aveți nevoie pentru realizarea unei tranziții naturale de la gingie la zona marginală a coroanei, în câteva etape simple.

Cele 5 culori gingivale unice Lustre Pastes permit o adaptare individuală pentru armonizarea naturală a nuanțelor gingivale. Puteți utiliza cele 4 nuanțe mixabile Gum Modifiers pentru a beneficia de creativitate nelimitată și pentru a reproduce, fără nici o problemă, cele mai dificile nuanțe de gingie.

Lustre Pastes NF Gum Shades au în compoziție o selecție specială de particule ceramice non-fluorescente, de culoare roz, pentru a imita perfect aspectul gingiei naturale.




## Lustre Pastes NF Nuanțe Vita

Nuanțele Vita dorite pot fi obținute prin aplicarea nuanțelor A-D de la Lustre Pastes NF. Această etapă, ce durează doar 2 minute, este suficientă pentru a obține nuanțele Vita. Pentru rezultate estetice excelente, utilizați și celelalte culori suplimentare disponibile.

Cu Lustre Pastes NF puteți modifica ușor coroanele și punțile ceramice convenționale. Modificarea intensității, a luminozității și a culorii nu a fost niciodată mai simplă!

Cea mai rapidă soluție pentru toate lucrările pe structuri monolitice din oxid de zirconiu.

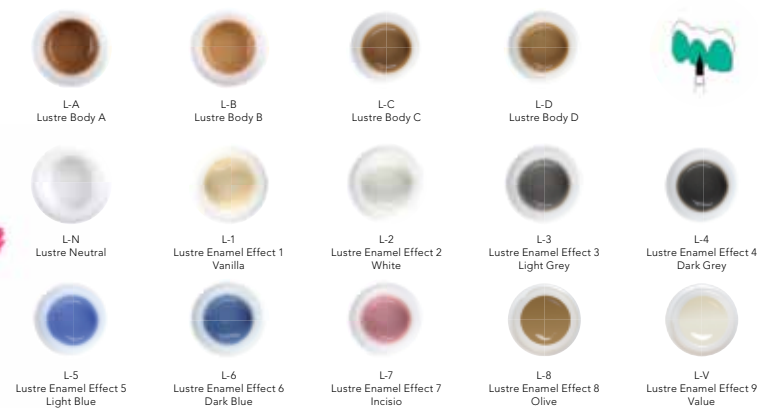



# Două sisteme - O singură abordare

Pictați estetic în **roșu** & alb





# Finisare perfectă pentru restaurările dumneavoastră

Nuanțele Vita dorite pot fi obținute prin aplicarea nuanțelor A-D de la Lustre Pastes NF. Această etapă, ce durează doar 2 minute, este suficientă pentru a obține nuanțele Vita. Pentru rezultate estetice excelente, utilizați și celelalte culori suplimentare disponibile.



Bază



Aplicarea nuanțelor Body (pentru formă)



Restaurare finală ce oferă culoare & luci

Cu Lustre Pastes NF puteți modifica ușor coroanele și punțile ceramice convenționale. Modificarea intensității, a luminozității și a culorii nu a fost niciodată mai simplă!



Luminozitate



Culoare



Intensitate

Obțineți cele mai bune rezultate estetice prin utilizarea Lustre Pastes NF pe lucrările presate sau stratificate realizate prin tehnica cut-back. După caracterizarea cu Lustre Pastes NF, rețușurile finale sunt realizate cu CL-F pentru mai multă translucență și cu masele opalescente/incizale.



Cut-back



Utilizați Lustre Pastes



Mase ceramice opalescente/incizale




Rezultat final

## Cea mai rapidă soluție pentru toate lucrările pe structuri monolitice din oxid de zirconiu





- CTE extins - intervalul de variație permite utilizarea pe întregul sistem ceramic GC Initial, dar și pe aproape toate tipurile de ceramică sau chiar pe dinții artificiali din porțelan.
- Fără stratificare complexă sau cicluri suplimentare de ardere. Rapid - Ușor - Sigur. Paste gata de folosit, cu proprietăți tixotropice, pentru o aplicare ușoară și precisă.
- Lichide pentru diluare și împăpătare pentru a păstra consistența optimă până la final.

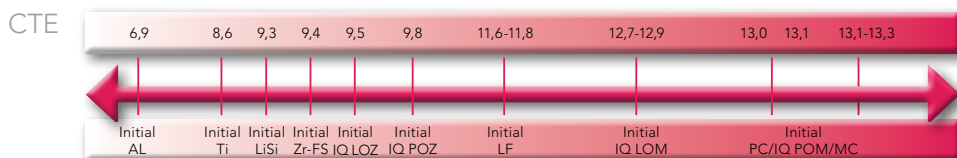

### Set GC Initial Lustre Pastes NF - Nuanțe Vita

- 5 culori de bază pentru a obține, în cel mai ușor mod, o restaurare protetică în nuanțe Vita.
- 9 culori avansate pentru dezvoltarea laturii artistice și reproducerea petelor albe, decalcifierilor, liniilor fine și fisurilor.

#### Conținutul setului:

1x Neutral (4 g)  
 1x Value (4 g)  
 4x Body Shades (4x4 g)  
 8x Enamel effect shades (8x4 g)  
 Diluting Liquid (8 ml)  
 Refreshing Liquid (8 ml)  
 1 godeu  
 2 pensule  
 Ghid de culori  
 Manual tehnic



### Set GC Initial Lustre Pastes NF Gum Shades

- 5 paste gata de folosit, în nuanțele gingiei, cu tixotropie ideală pentru o aplicare ușoară și precisă.
- 4 Gum Modifiers ce permit o creativitate nelimitată pentru a reproduce armonia naturală a gingiei.

#### Conținutul setului:

5x Gum shades (5x4 g)  
 4x Stain Modifier for LP NF (4x3 g)  
 Diluting Liquid (8 ml)  
 Refreshing Liquid (8 ml)  
 1 godeu  
 2 pensule  
 Ghid de culori  
 Manual tehnic



Imagini:  
 Michael Brusch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Germania  
 Philippe Llobell, Saint-Didier, Franța  
 Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Malmö, Suedia  
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, München, Germania

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 http://www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
 GC EEO - Romania  
 Str. Gen. N. Dona, nr.22-24,  
 sc.1, et.1, ap.13, sect.1  
 RO - 010782 București  
 Tel. +40.21.313.41.53  
 Fax. +40.21.313.41.53  
 romania@eoo.gceurope.com  
 www.eoo.gceurope.com

**GC**