

Zvládnite všetky výzvy



Krása v
červenej a bielej

initial

GC Initial®
IQ Lustre
Pastes NF
od GC,
univerzálne 3D
keramické pigmenty

GC

Zvládnite všetky výzvy s Initial od GC

Lustre Pastes NF od GC, unikátne **trojrozmerné keramické pigmenty**, ktoré Vaším presným prácam dodajú vyššiu **estetiku**... iba jednoduchým vyfarbením.

Na to, aby ste dosiahli **neprekonateľnú vitalitu a prirodzený vzhľad** všetkých Vašich keramických náhrad, nebudete viac potrebovať zložité vrstvenie ani viac cyklov vypaľovania.

S Lustre Paste NF (obsahujúce jemné keramické čiastočky) zostanú kroky k dokončeniu koruniek alebo mostíkov rovnaké bez ohľadu na techniku použitú pri vytváraní keramických náhrad.

Potrebujete zmeniť farbu, jas, svetlosť alebo povrchový lesk vrstvených koruniek a mostíkov? Môžete použiť Lustre Paste NF na všetku keramiku z radu GC Initial.



Hľadáte spôsob, ako dodať extra vitálny vzhľad Vaším CAD/CAM rekonštrukciám z keramických mono-blokov? Lustre Paste NF je tým správnym riešením pre každý klinický prípad.



Dávate prednosť lisovanej keramike... začnite buď s GC Initial IQ - One Body, systémami Press-over-Metal alebo Press-over-Zircon a potom namaľujte charakteristiky v ďalšej fáze.



Tento systém Vám umožní individualizáciu Vašich koruniek a mostíkov, a vytvorenie prirodzeného prechodu medzi okrajom koruniek a ďasnom - jednoduchým farbením.



Vyfarbite Vaše keramické náhrady
s Lustre Pastes NF od GC
pre obidve: bielu aj červenú estetiku

Lustre Pastes NF Gum Shades (ďasnové odtiene)

Všetko, čo potrebujete k vytvoreniu prirodzeného prechodu medzi okrajom korunky a ďasnom vytvorené v niekoľkých jednoduchých krokoch.

Päť unikátnych ďasnových pigmentov Lustre Pastes umožňujú individuálne prispôbenie a súlad s prirodzenými farebnými odtieňmi ďasien. Môžete použiť štyri zmiešateľné Gum Modifiers, ktoré Vám umožnia neobmedzenú kreativitu a bez problémov môžete nimi napodobniť ten najdelikátnejší prípad odtieňa ďasien.

Lustre Pastes NF Gum Shades sú založené na unikátnom výbere keramických častíček ružovej farby bez fluorescence a umožňujú dokonalé napodobenie prirodzeného vzhľadu ďasna.




Lustre Pastes NF V-Shades (Vita odtiene)

Požadovaný Vita odtieň sa vytvorí aplikáciou Lustre Pastes NF v rozsahu od "Body A - D". Tento proces, ktorý trvá iba dve minúty, zahŕňa všetko, čo je potrebné k vytvoreniu Vita odtieňov.

Ako umelec jednoducho používajte dostupné farby a dosiahnete špičkové estetické výsledky. S Lustre Pastes NF môžete jednoducho meniť vzhľad bežnej korunky alebo mostíka. Zmeniť jas, svetlosť a farbu ešte nikdy nebolo také jednoduché!

Najrýchlejšie riešenie pre Vaše práce z monolitických blokov oxidu zirkónu.

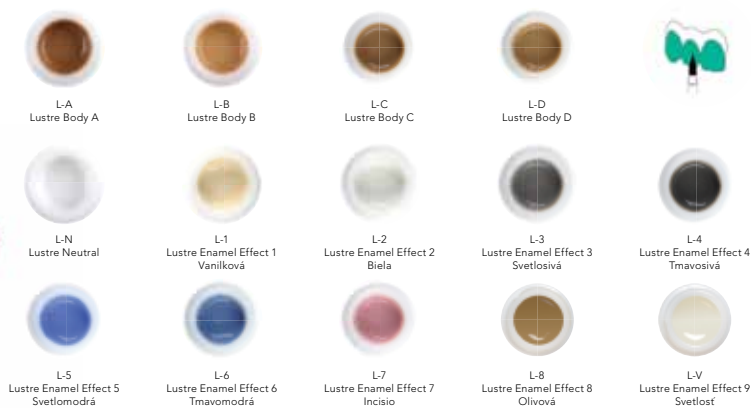

Dva systémy - Jeden prístup

Vyfarbujte vašu **Červenú** a Bielu estetiku





Dokonalé zakončenie Vašich náhrad

Požadovaný Vita odtieň sa vytvorí aplikáciou Lustre Pastes NF v rozsahu od "Body A - D". Tento proces, ktorý trvá iba dve minúty, zahŕňa všetko, čo je potrebné k vytvoreniu Vita odtieňov. Ako umelec jednoducho používajte dostupné farby a dosiahnete špičkové estetické výsledky.



Základ



Aplikácia odtieňov
Body Shades



Finálna náhrada, ktorá ponúka
farbu a lesk

S Lustre Pastes NF môžete jednoducho meniť vzhľad bežnej korunky alebo mostíka. Zmeniť jas, svetlosť a farbu ešte nikdy nebolo také jednoduché!



Jas



Farba



Svetlosť sivej

Dosiahnete tie najestetickéjšie výsledky použitím Lustre Pastes NF pre techniku cut back u Vašich lisovaných alebo vrstvených náhradách. Po namaľovaní s Lustre Pastes NF dokončíte prácu pomocou CL-F, čím dosiahnete vysokú translucenciu a s Opálovými/ Incizálnymi hmotami.



Cut back



Použitie Lustre Pastes



Opálové/Incizálne hmoty




Dokončené

Najrýchlejšie riešenie pre Vaše práce z monolitických blokov oxidu zirkónu





- Široký rozsah CTE prispôsobený pre prácu s kompletným radom keramiky GC Initial a s takmer všetkými typmi inej keramiky alebo konfekčných porcelánových zubov.
- Žiadne zložité vrstvenie alebo extra dlhé vypaľovacie cykly nie sú potrebné. Rýchle - jednoduché - bezpečné. Pasty s dobrými tixotropnými vlastnosťami pripravené ihneď na použitie s jednoduchou a precíznou aplikáciou.
- Riediace a obnovujúce tekutiny, ktoré udržiavajú optimálnu konzistenciu až do konca.

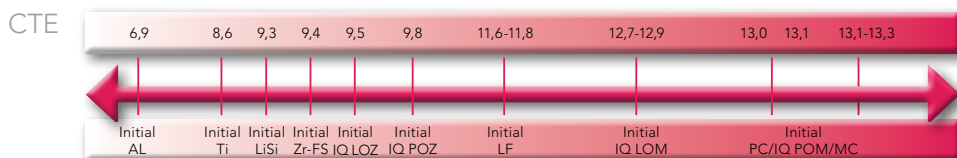

GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-Shades (Vita odtiene)

- 5 základných odtieňov, s ktorými dosiahnete Vita odtiene tým najjednoduchším spôsobom.
- 9 efektívnych odtieňov, ktoré Vám otvoria cestu k umeleckej práci a umožnia vytvoriť aj biele škvrny, dekalifikácie, praskliny.

Balenie obsahuje:

1x Neutral (4 g)
 1x Value (4 g)
 4x odtiene Body Shades (4x4 g)
 8x odtiene Enamel effect shades (8x4 g)
 Riediacia tekutina (8 ml)
 Obnovujúca tekutina (8 ml)
 1 miešacia podložka
 2 štetce
 Tabuľka odtieňov
 Technický Manuál



GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades (ďasnové odtiene)

- 5 ďasnových pást pripravených na použitie s ideálnou tixotropiou pre jednoduchú a presnú aplikáciu.
- 4 miešateľné Gum Modifiers umožňujúce neobmedzenú kreativitu pri kopírovaní prirodzených ďasien.

Balenie obsahuje:

5x odtiene Gum shades (5x4 g)
 4x odtiene Stain Modifier pre LP NF (4x3 g)
 Riediacia tekutina (8 ml)
 Obnovujúca tekutina (8 ml)
 1 miešacia podložka
 2 štetce
 Tabuľka odtieňov
 Technický Manuál



Obrázky:

Michael Brusch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Nemecko
 Philippe Llobell, Saint-Didier, Francúzsko
 Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Malmö, Švédsko
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, Mnichov, Nemecko

GC EUROPE N.V.

Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Slovakia
 Raková 1441
 SK - 023 51 Raková / Čadca
 Tel. +421.911.570.999
 Fax. +421.414.000.264
 slovakia@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com