

Obvladajte vse svoje izzive



Lepota v
rdečem & belem

initial

GC Initial®
IQ Lustre
Pastes NF,

univerzalna 3D
keramika za barvanje

GC

Obvladajte vse svoje izzive z GC Initial

GC Lustre paste NF je edinstvena 3D keramika, ki je namenjena barvanju, ter doseganju **estetike** v vseh vaših dragocenih izdelkih... samo z barvanjem.

Na potrebuje več kompleksnih tehnik nanašanja ali dodatnih ciklov pečenja, da dosežete **neprekosljivo vitalnost** in **naraven sijaj** vseh vaših izdelkov.

Z Lustre pastami NF (osnovane na finih keramičnih delcih) so koraki za izdelavo prevlek in mostovnih konstrukcij identični, ne glede na tehniko, ki jo uporabljate.

Ali potrebujete spremembo barve, svetlosti, sivi odtenek na površinskem sijaju vaših prevlek ali mostov? Uporabite lahko Lustre paste NF na vseh keramikah GC Initial linije.



Iščete način, kako dodati ekstra vitalnost vašim CAD/CAM monolitnim izdelkom? Lustre paste NF so rešitev pri vsakem primeru.



Ali vam je ljubša press keramika... začnite z uporabo GC Initial IQ-One Body, 'press preko' sistemom ali uporabite litijev disilikat kot osnovo in nato pobarvajte karakteristike v kasnejši fazi.



Ta sistem vam dovoljuje, da individualizirate vaše prevleke in mostove IN ustvarite naravni prehod iz robova prevleke do dlesni... samo z barvanjem.



Ustvarite vašo estetsko keramiko
z GC Lustre pastami NF
za belo & rdečo estetiko

Lustre Paste NF barve dlesni

Vse kar rabite, da ustvarite naraven prehod iz robova prevleke do dlesni v nekaj enostavnih korakih.

5 edinstvenih kot dlesen obarvanih Lustre past, ki vam dovoljujejo individualno prilagajanje, da se ujema z naravnimi odtenki dlesni v naravni harmoniji. Lahko uporabite in zmešate 4 modifikatorje dlesninih barv, kar vam omogoči neštete možnosti, kreativnost, da ustvarite najbolj delikatne primere prehodov prevlek v dlesen brez problemov.

Lustre Pasta NF barve dlesni je osnovana na posebnem izboru ne-flourescentnih, roza-obarvanih keramičnih delcev za odlično posnemanje naravnega izgleda dlesni.



G-23
Lustre Gum
Osnovna svetla



G-24
Lustre Gum
Osnovna temna



G-34
Lustre Gum
Intenzivna vijolična



G-35
Lustre Gum
Intenzivna kremna



G-36
Lustre Gum
Intenzivna rdeča



LP-M1
Spreminjevalec bel



LP-M2
Spreminjevalec rdeč



LP-M3
Spreminjevalec moder



LP-M4
Spreminjevalec rjav



Lustre Pasta NF V-barve

Potrebne V-barve se ustvarijo z aplikacijo Lustre Past NF razpona od »Body A-D«. Ta proces, ki traja samo 2 minuti vsebuje vse, kar je potrebno, da dosežete zahtevano V-barvo. Kot mojstri preprosto uporabite druge barve, ki so na voljo, da ustvarite visoko estetski rezultat.

Z Lustre Pasto NF lahko enostavno spreminjate vaše tradicionalne keramične prevleke in mostovne konstrukcije. Spreminjanje svetlosti, intenzitete in barve še nikoli ni bilo tako preprosto!

Najhitrejša rešitev za vse vaše monolitske cirkonij oksidne izdelke.



L-A
Lustre Body (osnovna) A



L-B
Lustre Body (osnovna) B



L-C
Lustre Body (osnovna) C



L-D
Lustre Body (osnovna) D



L-N
Lustre Neutral
(neutralna)



L-1
Lustre Enamel Effect 1
Vanilija



L-2
Lustre Enamel Effect 2
Bela



L-3
Lustre Enamel Effect 3
Svetlo siva



L-4
Lustre Enamel Effect 4
Temno siva



L-5
Lustre Enamel Effect 5
Svetlo modra



L-6
Lustre Enamel Effect 6
Temno modra



L-7
Lustre Enamel Effect 7
Incizio



L-8
Lustre Enamel Effect 8
Olivna



L-9
Lustre Enamel Effect 9
Value



Dva sistema - en pristop

Barvajte vašo rdeče & belo estetiko



Odličen zaključek vaših izdelkov



Potrebne V-barve se ustvarijo z aplikacijo Lustre Past NF razpona od »Body A-D«. Ta proces, ki traja samo 2 minuti vsebuje vse, kar je potrebno, da dosežete zahtevano V-barvo. Kot mojstri preprosto uporabite druge barve, ki so na voljo, da ustvarite visoko estetski rezultat.



Osnova



Aplikacija Body barv



Končni izdelek z barvo in sijajem

Z Lustre Pasto NF lahko enostavno spreminjate vaše tradicionalne keramične prevleke in mostovne konstrukcije. Spreminjanje svetlosti, value in barve še nikoli ni bilo tako preprosto!



Svetlost



Barva



Value

Najboljši estetski rezultat boste dosegli z uporabo Lustre Pasto NF in cut-back tehniko na vaši tlačeni ali nanešeni keramiki. Potem, ko pobarvamo s Lustre Pasto NF, so zaključni dotiki izvedeni s CL-F za večjo translucenco in z Opal/Incizal barvami.



Cut-back



Uporaba Lustre Paste



Opal/incizal nanosi




Končan

Najhitrejša rešitev za vse vaše monolitne cirkonij-oksidge izdelke





- Širok CTE razpon, da se lahko uporablja pri kompletnem GC Initial keramičnem izboru barv in pri skoraj vseh tipih drugih keramik ali drugih umetnih zobeh.
- Brez kompleksnih načinov nanašanje ali dodatnih ciklov pečenja. Hitra - enostavna - zavarovana. Pasta pripravljena za uporabo s finimi tiksotropskimi lastnostmi, za enostavno in natančno aplikacijo.
- Razredčilne in osvežilne tekočine, da ostane optimalna konzistenca do konca.

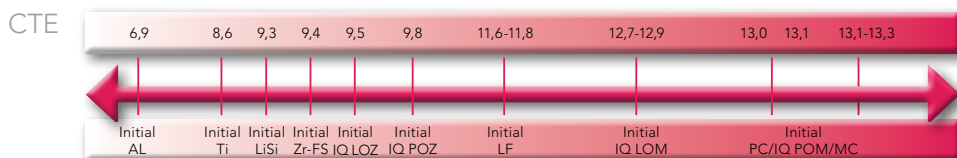

GC Initial Lustre Pasta Set NF - V-barve

- 5 osnovnih barv za doseganje V-barve izdelkov na najenostavnejši način.
- 9 nadaljevalnih barv, da pokažete svojo umetniško žilico in narišete bele madeže, dekalifikacije, kratke lasne linije, linije pok.

Set vsebuje:

1x nevtralna (4 g)
 1x Value (4 g)
 4x Body barve (4x4 g)
 8x Enamel efekt barve (8x4 g)
 Razredčilna tekočina (8 ml)
 Osvežilna tekočina (8 ml)
 1x Mešalni pladenj
 2 čopiči
 Barvna karta
 Tehnični priročnik



GC Initial Lustre Pasta NF - Set barv za dlesen

- 5 pripravljenih barv z idealno tiksotropičnostjo, za enostavno in natančno aplikacijo.
- 4 modifikatorji dlesninih barv, ki omogočajo neomejeno kreativnost za posnemanje naravne dlesnine harmonije.

Set vsebuje:

5x barve za dlesen (5x4 g)
 4x Modifikator madežev za LP NF (4x3 g)
 Razredčilna tekočina (8 ml)
 Osvežilna tekočina (8 ml)
 1x Mešalni pladenj
 2 čopiči
 Barvna karta
 Tehnični priročnik



Slike:

Michael Brusch-M.B.Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Nemčija
 Philippe Llobell, Saint-Didier, Francija
 Przemek Seweryniak, Cosmodent Dental Laboratory, Malmö, Švedska
 Peter Schaller, Esthetic Concept GmbH, München, Nemčija

GC EUROPE N.V.

Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GC EEO - Slovenia
 Šlandrov trg 40
 SLO - 3310 Žalec
 Tel. +386.3.710.32.70
 Fax. +386.3.710.32.71
 slovenia@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com