

*initial*TM Lustre Pastes ONE ja Spectrum Stains

Värvimislahendused

Keraamika
värvimise
kunst.



Since 1921
100 years of Quality in Dental



Eesteetilised lahendused GC Initial™ värvidega

GC pakub Initiali kasutajale kõige kaasaegsemaid ja väga esteetilisi keraamika värvimise lahendusi. Olenevalt juhtumist ja soovitud omadustest annavad vajaliku tulemuse kaks tootesarja: **Initial Lustre Pastes Family** ja **Initial Spectrum Stains**. Need ühilduvad tänu soojuspaisumise koefitsiendi laiale vahemikule, mis võimaldab teil töötada kogu GC Initial keraamika tootesarjaga ja peaaegu kõigi teist tüüpi keraamikatega.



Unikaalne 3D keraamika **Initial Lustre Pastes ONE** annab kõigile teie töödele fluorestsentsuse, sügavuse ja autentsuse vaid värvimise kaudu. Enam ei pea kasutama keerulist keraamika pealekandmise tehnikat ega tegema täiendavaid põletustsükleid, et restauratsioonid näeksid välja elujõulised ja loomuliku läikega.

Initial Lustre Pastes GUM Shades põhineb hoolikalt valitud mittefluorestseeruvate roosade keraamikaosakeste valikul, et jäljendada perfektelt loomulikku iget. Elutruu üleminek krooni servast igemeni on lihtne saavutada.

Initial Spectrum Stains võimaldab 2D-värvimist ja seda saab kasutada nii keraamika alla, sisse kui ka peale värvimiseks. Need värvid annavad väga rafineeritud ja läikiva pinnaga lõpptulemuse, säilitades samal ajal tekstuuri.

Lustre Pastes and Spectrum Stains tooted täiendavad teineteist. Mõnel juhul kasutatakse mõlemat; näiteks võib Spectrum Stainsi lisada Lustre Pastes ONE-ile või keraamika pulbrile.

Luster Pastes tootegrupi & Spectrum värvide sobivus Initial toodete sarjaga

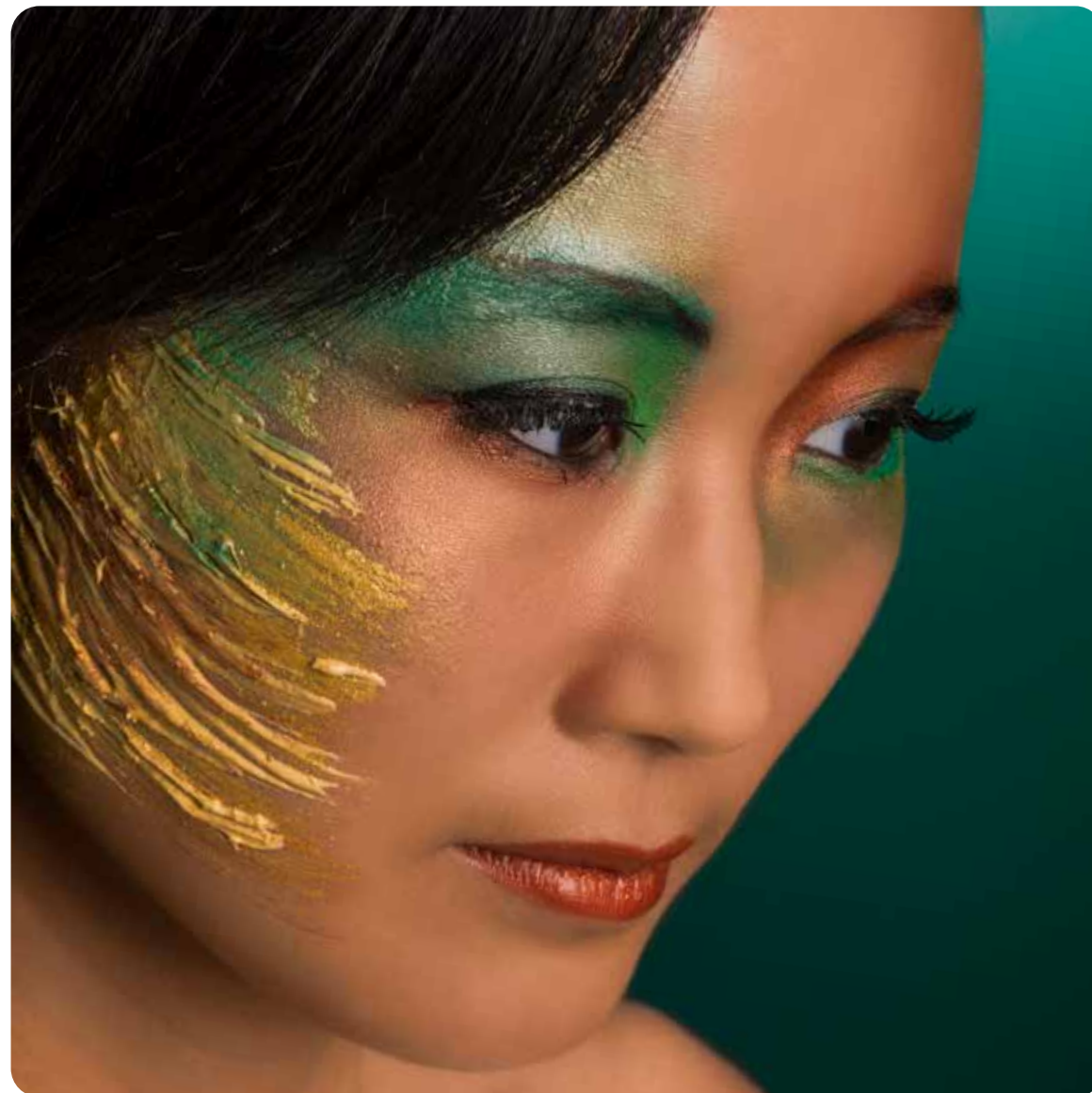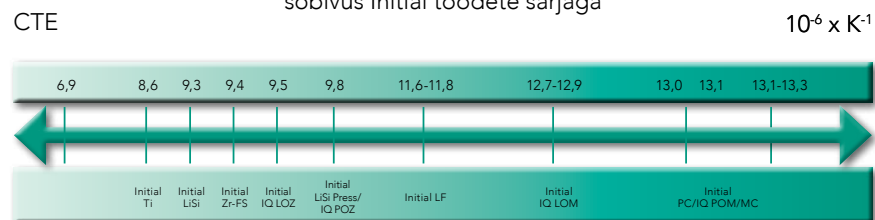


Lustre Pastes ONE V-Shades

Toonidega Body A-D saab vajaliku V-tooni kätte väga lihtsalt ja kiiresti. Restauraatioone saab edasi täiustada teiste saadaolevate värvidega, et saavutada täiuslik loomulik lõpptulemus.



Optimaalne fluorestsentsi tase.
Tagab hammaste naturaalse välimuse kõikides valgustingimustes.

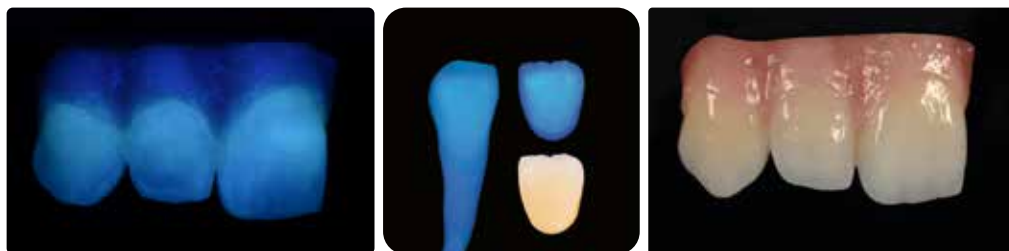


Lustre Pastes NF GUM

Viis unikaalset Lustre Paste igeme värvi võimaldavad lihtsalt ja naturaalselt jäljendada loomuliku igeme kõiki varjundeid. Lisaks võite kasutada nelja segatavat igeme modifikaatorit, mis annavad piiramatud võimalused, et loovalt ja ilma probleemideta jäljendada ka kõige keerulisemaid nüansse.



Spectrum Stains

Intiaali Spectrum Stains pulbervärvid on saadaaval 20-s värvitoonis, mis annab teile kontrolli restaureerimise esteetika üle. Sõltumata kasutusviisist, saavutate te väga peene lõpptulemuse, säilitades pinna tekstuuri ja tagades optimaalse läike.

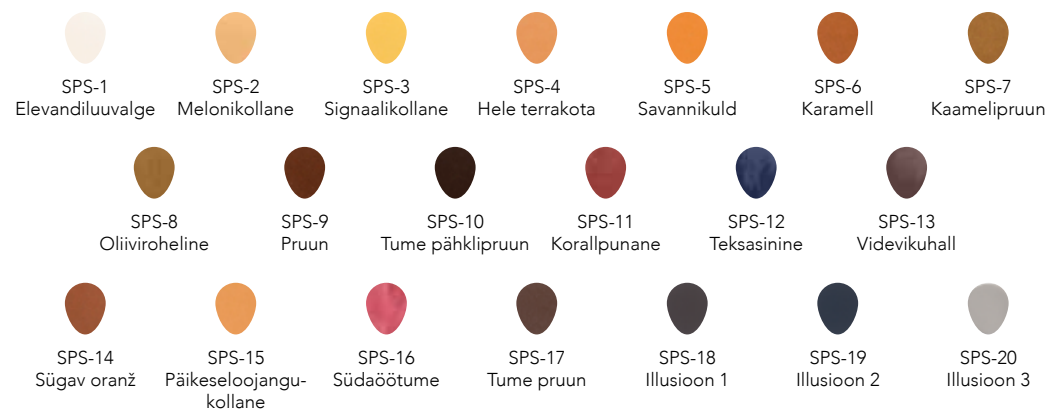

Täiuslik ilu Initial Lustre Pastes ONE-iga

Ideaalne viimistlus teie restauratsioonidele.

Enam ei pea kasutama keerukaid keraamika peale kandmise tehnikaid ega tegema täiendavaid põletustsükleid, et restauratsioonid oleksid elujõulised ja loomuliku läikega. Initial Lustre Pastes ONE-iga saavutate värvisügavuse ja elutruu transparentsuse ...lihtsalt värvides.

Initial Lustre Pastes ONE pastad põhinevad peenete keraamiliste osakeste erisegul. Etapid töödeldava detaili lõpetamiseks jäävad samaks olenemata aluse loomiseks kasutatud tehnikast. Kasutades lahjendamisvedelikku säilib optimaalne konsistents lõpuni välja.

Soovitud V-Shade luuakse Lustre Pastes ONE 'Body A-D' abil. Selle protsessiga on võimalik luua V-toone ülikiiresti.

Täiendavaks isikupärastamiseks kasutage lihtsalt teisi saadaolevaid värve, et lõpptulemus saaks veelgi esteetilisem.



Alus



ONE Neutral Fluor aplitseerimine



Värvitoonide Body Shades lisamine



Lõplik restauratsioon,
millelt näha värv ja läige

Lihtsad modifikatsioonid

Initial Lustre Pastes ONE-iga saate töödeldavaid detaile lihtsalt muuta.

Värvi, heleduse või halliskaala muutmine või pinnaläike lisamine pole kunagi nii lihtne olnud.



Heledus





Värv



Halliskaala

Pealevärvitav keraamika võimaldab väljendada selgelt ka kõige vaevumärgatavamaid emotsioone.

Parendatud fluorestsentsusega Luster Pastes ONE on spetsiaalselt välja töötatud selleks, et suurendada fluorestsentsust monoliitsetel restauratsioonidel ning tagada hammaste naturaalne väljanägemine igas valguses.

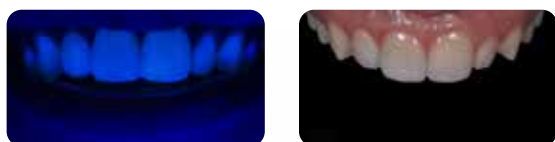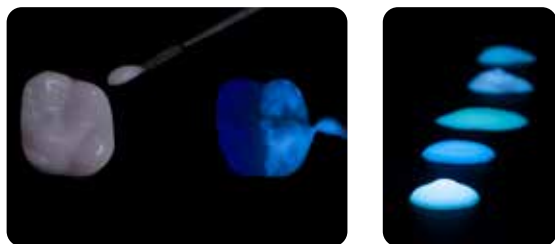

Lustre Enamel Effect – Opal
Hästi opalestseeruv aluspasta kasutamiseks intsisaalses osas.




Lisage isikupära ühetooni restauratsioonidele...

Unikaalne konsistents tagab homogeenised modifikatsioonid ja välisilme. Lustre Pastes ONE-i kihi soovitud pinnatekstuuri/-sileduse saavutab, kui restauratsiooni õrnalt väristada või kondenseerida. Vaja pole keerukaid peale kandmise tehnikaid ega täiendavaid põletustükleid; see on kiire, lihtne ja kindel. Pastad on kasutusvalmid ja tiksotroopsed, mis võimaldab lihtsat ja täpset aplitseerimist.



Lustre Pastes ONE-iga saab isikupärastada liitiumdisilikaadist nagu LiSi Press, tehtud anatoomilisi karkasse.

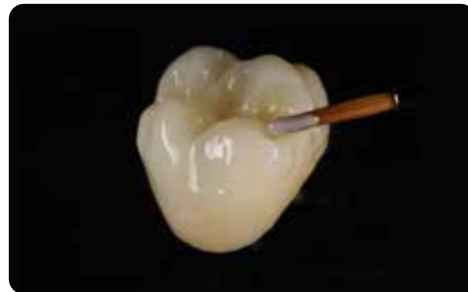

Kas otsite viisi, kuidas lisada täiendavat elu tsirkooniumile, näiteks Initial Zirconia Disk toodetud monoliitidele? Lustre Pastes ONE on lahenduseks.



...või sisesta värvid sügavamale kihtidesse



Cut-back-tehnikas ettevalmistatud mudel



Lustre Pastes ONE aplitseerimine (+ põletus)



Opal-/intsisaalmassi aplitseerimine (+ põletus)



Lõpptulemus

Initial Lustre Pastes ONE-iga saab pressitud või peale kantud keraamika puhul cut-back-tehnikas kõige paremad esteetilised tulemused. Pärast Lustre Pastes ONE-iga värvimist tehakse lõppviimistlus GC Initial glasuurkeraamikaga: CL-F annab suure transpaarsuse ning opal-ja emailmassid intsisaalse efekti.



Punase ja valge esteetika...

Kaks komplekti, üks meetod.



Algseis



Erinevate Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades toonide aplitseerimine.



Isikupärastamine LP ONE V-Shadesi toonidega.



Lõpptulemus



... elutruude üleminekutega, isegi tsirkooniumkarkasside puhul



Luster Pastes ONE optimaalne fluorestsentsi tase tagab naturaalse hammaste väljanägemise kõikides valgustingimustes ning seda kasutatakse värvi ja individualiseermise kihina micro-layering tehnikas koos Initial SQIN-iga.

Tsirkooniumi ja CAD/CAM-iga tehtud restauratsioonide kasvava populaarsuse juures pakub GC lahendusi samade esteetiliste standardite säilitamiseks. Initial Lustre Paste ONE & NF GUM-iga näevad teie tehtud monoliidid välja loomulikud ja elujõulised. Nende värvide ainulaadne koostis pakub rohkem koostoimet aluskeraamikaga ja toimib optiliselt nagu keraamika ülesehituspulbrid, võimendades restauratsioonil 3D-efekti. Lihtsus võib olla ilus!



Avardage Initial Spectrum Stainsiga enda võimalusi keraamika värvimiseks

Initial Spectrum Stains sisaldab pigmente, mida on paagutatud põldpao maatriksis, et saavutada stabiilsus ja võimaldada korratavaid järjepidevaid tulemusi. Initial Spectrum Stains toone saab varieerida ja katsetada lõputult. Kasutage neid nii keraamika alla, sisse kui ka peale värvimiseks. Samuti saab neid lisada keraamikamassidele või Initial Lustre Pastes ONE-ile, et võimalusi veelgi laiendada.

Kaks konsistentsi, mis mõlemad säilitavad tekstuuri


Initial Spectrum Stains värve saab aplitseerida kasutaja eelistatud konsistentsis kas pastana või vedelamal kujul. Lõpptulemus on sama olenemata kasutatud konsistentsist: väga detailne toon ja läige, mis säilitab restauratsiooni pinna tekstuuri; need on 2D vaste Initial Lustre Pastes ONE-ile.



Glasuurimiseks valmis detailse tekstuuriga kroon



Glasuurimine vedela- või pasta konsistentsiga

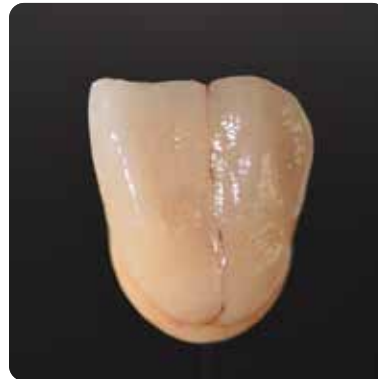

Pärast põletust: toonitud ja glasuuritud, säilitades detailse tekstuuri



Toonige keraamikat seest ...



... või väljast



2D ja 3D keraamika värvimislahendused GC-It

GC Initial Lustre Pastes ONE - V-Shades

- 4 alustooni ja 1 Neutral Fluo, et saada V-tooniga restauratsioon lihtsamal viisil.
- 11 efektitooni, et valla päästa oma kunstianne ning joonistada valgeid laike, dekaltsifikatsioone, mõrasid ja pragusid.

Komplekt sisaldab:

1x Neutral (4g)
 1x Neutral Fluo (4g)
 1x Value (4g)
 4x Body Shades (4x4g)
 11x Enamel Effect Shades (11x4g)
 1x Diluting Liquid (8ml)
 1x Refreshing Liquid (8ml)
 1 segamisalus
 2 pintslit
 Värvikaart
 Tehniline juhend



GC Initial Lustre Pastes NF - Gum Shades

- 5 igeme värvi ideaalse tiksotroopsusega kasutusvalmis pastat, mis võimaldavad lihtsat ja täpset aplitseerimist.
- 4 segatavat igeme modifikaatorit, mis annavad piiramatud võimalused, et jäljendada loomulikku iget.

Komplekt sisaldab:

5x Gum Shades (5x4g)
 4x Stain Modifier for LP NF (4x3g)
 Diluting Liquid (8ml)
 Refreshing Liquid (8ml)
 1 segamisalus
 2 pintslit
 Värvikaart
 Tehniline juhend



GC Initial Spectrum Stains

- 20 pulbervärvi, mis võimendavad esteetilist detailsust.
- Kaks konsistentsi, mis annavad detailile lõpptulemuse, säilitavad tekstuuri ja annavad optimaalse läike.

Komplekt sisaldab:

16x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16x3g)
 1x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10g)
 1x Initial Spectrum Glaze Liquid (25ml)
 1x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8ml)
 1x Initial Spectrum Stains Shade Guide
 Värvikaart
 Tehniline juhend

Saadaval täitepakina:

GC Initial Spectrum Glaze Powder
 GL-FLUO (10g)
 GC Initial Spectrum Stains
 SPS-17 - SPS-20 (3g)



*initial*TM Lustre Pastes ONE ja Spectrum Stains

Värvimislahendused

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<http://www.gc.dental/europe>

GC Nordic esindaja Eestis

Mob. +372.520.87.18
Christine.Kuusmaa@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/et-EE>