

# Уметност во боењето на керамиката.



*initial*™

Решенија за  
боење

Lustre Pastes NF  
Spectrum Stains

**GC**




# Обојте ги Вашите естетски изработки со Initial™ од GC

На сите Initial корисници, GC им ги нуди најмодерните и високо-естетски решенија за обојување на керамика. Во зависност од случајот и посакуваните карактеристики, две линии на производи, Initial Lustre Pastes NF и Initial Spectrum Stains, ќе Ви го обезбедат очекуваниот завршен изглед. Тие имаат широк опсег на CTE и Ви овозможуваат да работите со комплетната керамика на GC Initial системот и речиси сите други типови на керамички системи.


Initial Lustre Pastes NF, уникатна 3D керамика за боене од GC, додава длабочина и автентичност на сите Ваши прецизни изработки... само со боене. Повеќе нема потреба од сложено наслојување или дополнителни циклуси на печење за да постигнете ненадминлива живост и природен сјај на сите ваши реставрации.

Initial Spectrum Stains нуди 2D ефекти за карактеризација и може да се користи и за внатрешна и за надворешна карактеризација. Овие ефекти ќе го облагородат крајниот резултат со сјајна површина, но истовремено со задржана текстура.

Двете линии на производи се комплементарни. Во некои случаи се користат заедно; на пример, Spectrum Stains може да се додаде во Lustre Pastes NF или во прашокот за керамичка изработка.

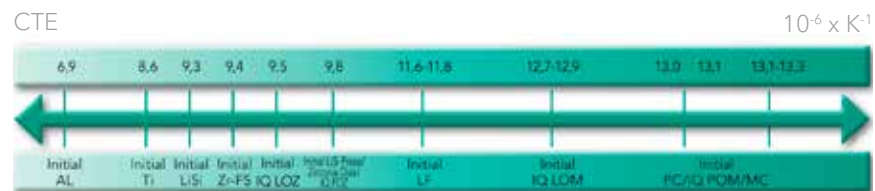

Компатибилност со целокупниот асортиман на керамиката на GC Initial системот

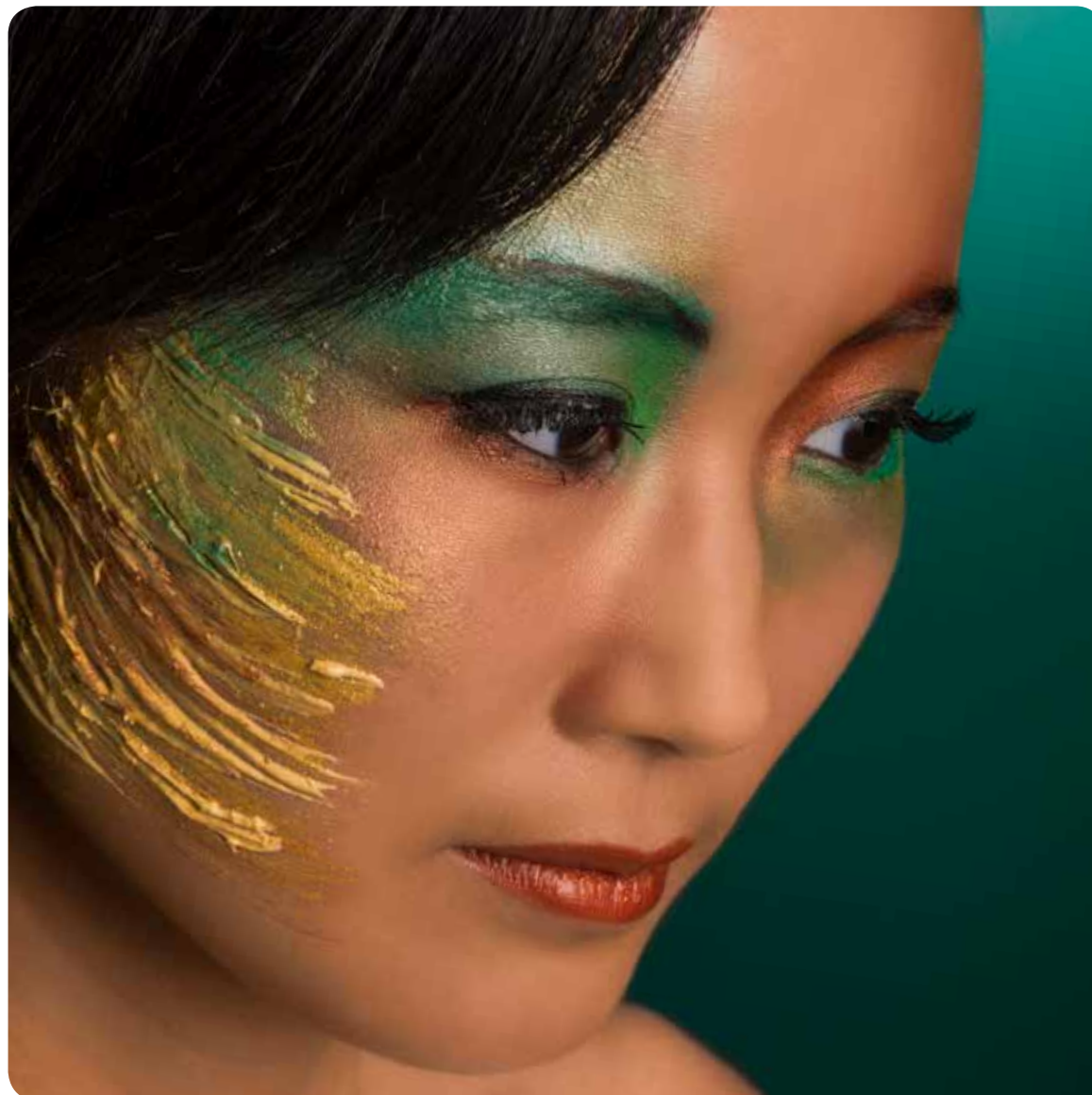

## Lustre Pastes NF V-Shades - Основни бои

Со нанесување на "Основна A-D", бараната V-боја може да се добие многу лесно и за многу кратко време. Со останатите достапни бои, може понатаму да ги карактеризирате реставрациите за совршен краен резултат..



## Lustre Pastes NF Gum Shades - Бои за гингива

Боите за гингива се базираат на специјално избрани не-флуоресцентни , розево обоени керамички честички кои совршено го имитираат изгледот на природната гингива. Лесно може да се постигне природен премин од рабовите на коронката кон гингивата.



## Spectrum Stains

Ефектите за карактеризација и глазурата се направени за надворешна карактеризација и сјајност на керамичките материјали во боја на забот и внатрешна индивидуализација на керамиката кога се нанесува во слоеви. Компатибилни, со широк опсег на СТЕ, Initial Spectrum Stains се совршено адаптирани да одговараат на речиси сите керамички системи. Особено се адаптирани спрема естетскиот концепт на бои од портфолиото на Initial системот.

Initial Spectrum Stains се ефекти во прав , достапни во 16 различни бои за да ја подобрат естетиката на Вашите реставрации.

Без оглед на начинот на нанесување, ќе постигнете одличен резултат во однос на текстурата на површината и ќе обезбедите оптимално ниво на сјајност.





# Убава површина со Initial Lustre Pastes NF Основни бои

## Совршен финиш на Вашите реставрации

Повеќе нема потреба од сложено наслојување и дополнителни циклуси на печење за да постигнете ненадминлива живост и природен сјај на сите Ваши реставрации. Со Initial Lustre Pastes NF, можете да постигнете длабочина на бојата и природна транспарентност... само со боене. Initial Lustre Pastes NF се базираат на специјална мешавина на фини керамички честички. За да ги комплетираат Вашите коронки и мостови чекорите остануваат исти, без оглед на техниката што ја користите при создавање на базата. Со користење на разредувачка течност, оптималната конзистенција ќе се задржи до крајот на процесот. Бараната V-боја се добива со нанесување на Lustre Pastes NF "Основна боја A-D". Овој процес содржи сè што е потребно за да се добијат V-бои за многу кратко време. За поубава карактеризација, едноставно употребете ги другите достапни бои за да добиете високи естетски резултати.



Основа



Нанесување на LP Неутрал



Нанесување на Основни бои



Финална реставрација со боја и сјај

## Лесно модифицирање

Со Initial Lustre Pastes NF може лесно да ги модифицирате Вашите изработки. Менувањето на нијансата на бојата, вредноста или додавање на дополнителна сјајност на површината никогаш не било толку лесно!



Сјајност



Боја



Вредност

“Обојувањето  
на керамичките  
изработки  
овозможува реално  
претставување  
на најсуптилните  
емоции.”



# Додадете карактер на Вашите монолитни реставрации...

Уникатната конзистенција обезбедува хомогени модификации и хомоген изглед. Посакуваната сјајна површина и текстура на слојот од Lustre Pastes NF може да се постигне со нежно вибрирање или кондензирање на реставрацијата. Без сложено наслојување или дополнителни циклуси на печење. Брзо-лесно-сигурно. Пастите се спремни за употреба, со фини тиксотропни својства, за лесно и прецизно наслојување.



Целосни анатомски изработки од Литиум дисиликат, како што е LiSi Press може да се индивидуализираат со Lustre Pastes NF.



Барате начин да додадете дополнителна вредност на Вашите CAD/CAM монолитни циркониумски изработки како оние од Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes NF се решение во секој случај.



Со системите GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal и Press-over-Zircon, карактеризација и сјајноста на површината можат да се додадат само со еден циклус на печење.

...или вметнете ги во длабочина помеѓу слоевите.



Засекување



Нанесување на Lustre Pastes NF (+печење)



Нанесување на Опал/Инцизал маси (+печење)



Завршена изработка

Постигнете најдобри естетски резултати со користење на Initial Lustre Pastes NF со техника на засекување кај Вашите пресувани или наслоени изработки. По обојувањето со Lustre Pastes NF, финалните потези се прават со: CL-F за висока транспарентност и Опал и Енамел масите за инцизални ефекти.





# Обојте ја вашата црвена и бела естетика...

Два сета, еден пристап.



Почетна ситуација



Нанесување на различни бои за гингива со Initial Lustre Pastes NF Gum Shades



Карактеризација со V-Бои



Завршена изработка





## ...со природен премин, дури и кај циркониумски изработки.



Со растечката популарност на циркониум и CAD/CAM- реставрациите, GC нуди решенија со кои се задржуваат истите естетски стандарди. Со Initial Lustre Paste NF Вашите монолитни изработки ќе добијат живост и ќе изгледаат природно. Нивниот уникатен состав нуди поголема интеракција со наслоената керамика, и оптички се однесуваат како керамика во прашок, засилувајќи го 3D ефектот на Вашата реставрација. Едноставноста може да биде прекрасна!



# Проширете ги Вашите можности за карактеризација со Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains содржат пигменти кои се вградени во матрица од фелшпад, со што се обезбедува стабилност и овозможува резултати кои се постојани во текот на времето. Со Initial Spectrum Stains може бесконечно да менувате и да бидете креативни. Употребувајте ги за внатрешна, но и за надворешна карактеризација. Исто така, може да ги додадете во керамичката маса или во Initial Lustre Pastes NF и уште повеќе да ги зголемите Вашите можности!

## Две конзистенции кои ја заштитуваат текстурата


Initial Spectrum Stains може да се нанесат во конзистенција која повеќе ја сакате, како паста или во потечна конзистенција. Без оглед на употребената конзистенција, крајниот резултат ќе биде ист: јасно дефинирани карактеризација и сјај, кои ја задржуваат површинската текстура на реставрацијата; тие се 2D ефект кој е комплементарен на Initial Lustre Pastes NF.



Коронка со фина текстура спремна за нанесување на глазура



Нанесување на глазура во течност или во паста

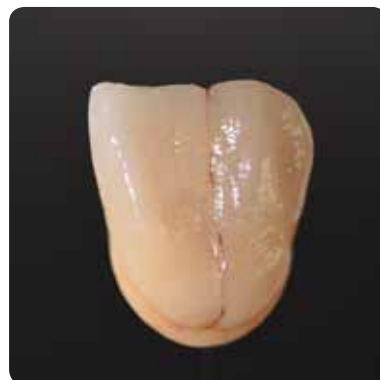

После печење: карактеризација и глазура, со задржување на фината текстура



Внатрешна карактеризација...



...или надворешна



# 2D и 3D решенија за бојење на керамика... од GC

## GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-Shades Сет со V-бои

- 4 Основни бои и 1 Неутрална за да се постигне реставрација со V-бои на најлесен начин.
- 9 Ефектни бои кои ја поттикнуваат Вашата уметничка страна за да насликате бели точки, декалцификации, влакнести линии и пукнатини.

### Состав на сетот:

1x Неутрална (4 g)  
1x Вредност (4 g)  
4x Основни Бои (4x 4 g)  
8x Бои за ефекти на емајлот (8x 4 g)  
1x Разредувачка течност (8 ml)  
1x Освежувачка течност (8 ml)  
1 Сад за мешање  
2 Четкички  
Табела со бои  
Техничко упатство



Lustre Enamel Effect 9 (Deep Orange) и 10 (Twilight) не се дел од сетот, но може да се порачаат поединечно.

## GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades Сет со бои за гингива

- 5 паста за гингива спремни за употреба со идеални тиксотропни својства за лесна и прецизна апликација.
- 4 Модификатори за гингива кои се мешаат и овозможуваат безгранична креативност за да се репродуцира природната гингивална хармонија.

### Состав на сетот:

5x Бои за гингива (5x 4 g)  
4x Модификатор за дамки за LP NF (4x 3 g)  
Разредувачка течност (8 ml)  
Освежувачка течност (8 ml)  
1 Сад за мешање  
2 Четкички  
Табела со бои  
Техничко упатство



## GC Initial Spectrum Stains Сет за карактеризација

- 16 прашоци за дамки за совршен естетски финиш.
- Две конзистенции за рафиниран краен резултат, ја заштитуваат текстурата и покажуваат оптимално ниво на сјајност.

### Состав на сетот:

16x Initial Spectrum Stains прашоци за дамки SPS (16x 3 g)  
1x Initial Spectrum Прашок за глазура GL (10 g)  
1x Initial Spectrum Течност за глазура (25 ml)  
Initial Spectrum Течна паста за глазура (8 g)  
Initial Spectrum Stain Клуч за бои





## **GC EUROPE N.V.**

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.02.14  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

## **GC EUROPE N.V.**

GCEEO  
Siget 19b  
HR - 10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474  
Fax. +385.1.46.78.473  
info@eeo.gceurope.com  
www.eeo.gceurope.com

Овластен дистрибутер  
за Македонија:  
ДЕНТОМЕД-М  
Ул. "Бојмија" бр. 2/2  
Пошт. фах. 182  
1000 Скопје  
Тел./Факс: 02/24.62.739  
Тел. 02/24.64.781  
dentomed@t-home.mk

The logo for GC, featuring the letters 'GC' in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are white with a slight shadow effect, set against a dark background. The 'G' and 'C' are connected at the top.