

# *initial*™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Le premier choix pour les normes les plus élevées



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



## Le premier choix pour les normes les plus élevées

Conçu pour offrir un équilibre parfait entre une résistance élevée et une esthétique exceptionnelle, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite est le choix idéal pour les restaurations antérieures et postérieures.




### ESTHÉTIQUE SUPÉRIEURE

Gradient de teinte et de translucidité fidèle à la nature pour les restaurations antérieures et postérieures.



### RÉSISTANCE ÉLEVÉE

Classé en classe V selon la norme DIN EN ISO 6872 avec une valeur moyenne > 1.150 MPa.

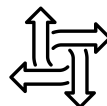

### OMNI-FONCTIONNEL

Polyvalent et adapté à un large éventail d'indications cliniques. Frittage rapide ou régulier.


## Dégradé naturel

D'un naturel époustouflant : un dégradé continu de la zone cervicale à incisive, tant en termes de teinte que de translucidité, imitant au mieux la structure naturelle de la dent.

Translucidité > 49% Résistance > 980 MPa		5Y	INCISAL	20%
		4-5Y	INTERLAYER 1	15%
		4-5Y	INTERLAYER 2	15%
		4-5Y	INTERLAYER 3	15%
Translucidité > 45% Résistance > 1.310 MPa		4Y	CERVICAL	35%

## Propriétés physiques

- Dioxyde de zirconium Type II Classe V DIN EN ISO 6872
- Résistance à la flexion : valeur moyenne typique > 1.150 MPa
- Gradient de translucidité élevé de > 45% à > 49%.
- Frittage rapide pour couronnes et bridges jusqu'à 3 unités

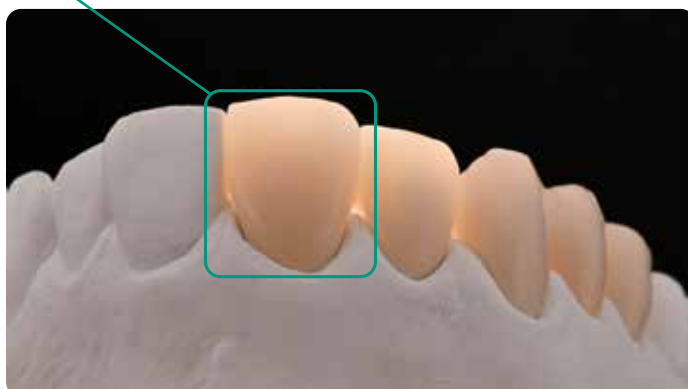

## Conçu pour une productivité qualitative

Grâce au flux de travail intuitif de GC, la productivité peut être maximisée sans compromettre la qualité.

### SCAN & DESIGN avec Aadvia Lab Scan 3

Scanner à commande gestuelle avec haute précision et fonctions de numérisation intelligentes



### COLORATION INTERNE EN 2D avec Initial Zirconia Coloring Liquid

Pour un raffinement ultime, choisissez des couleurs à effet.

### MICRO-STRATIFICATION avec Initial IQ ONE SQIN

#### MAQUILLAGE 3D avec Initial IQ Lustre Pastes ONE

Couleur et fluorescence - soit pour un travail purement monolithique, soit par micro-cutback en combinaison avec IQ SQIN.



### FORME & TEXTURE avec Initial IQ SQIN

Vitalité, texture naturelle et brillance dans une micro-couche.



### STRATIFICATION CLASSIQUE avec Initial Zr-FS

Effets optiques inégalés et grande stabilité après plusieurs cuissons pour les armatures avec cutback classique.



OU

### SCELLEMENT avec FujiCEM Evolve

Le choix idéal pour la zircone, facile à utiliser et idéal pour les limites juxta-gingivales ou sous-gingivales.



# initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Le premier choix pour les normes les plus élevées

## Les avantages d'un seul coup d'œil

- Esthétique supérieure grâce à un **gradient combiné de teinte et de translucidité**.
- **Résistance élevée** dans toutes les couches, ce qui permet de l'utiliser pour une large gamme d'indications.
- Finition limitée grâce à **l'armature dans la bonne teinte**.
- **Synergie optimale** avec les Initial Zirconia Coloring Liquid et le concept IQ ONE SQIN pour une individualisation haut de gamme.
- Les 16 teintes V et les 3 types bleach sont disponibles en disques de 14, 16, 20 et 25 mm d'épaisseur et 98,5 mm de diamètre



## Synergies parfaites



Initial Zirconia Coloring Liquid



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zr-FS

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tél. +32 16 74 10 00  
Fax. +32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

### GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin  
94370 Sucy en Brie Cedex  
Tél. +33.1.49.80.37.91  
Fax. +33.1.45.76.32.68  
info.france@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/fr-FR>

Indications : Restaurations complètes (bridges) et unitaires.  
Classe IIa  
Dispositifs médicaux pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la sécurité sociale.  
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.  
Organisme certificateur n°2797. Distribués par GC France