

# *initial*™ Zirconia Disk Multilayer Elite

La scelta migliore per gli standard più elevati



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



## La scelta migliore per gli standard più elevati

Sviluppato per offrire l'equilibrio perfetto tra resistenza elevata ed estetica eccezionale, Initial Zirconia Disk Multilayer Elite è la scelta ideale per i restauri sia anteriori sia posteriori.




### ESTETICA SUPERIORE

Colore e gradiente di traslucenza naturali per restauri anteriori e posteriori.



### RESISTENZA ELEVATA

Classificato come materiale di Classe V secondo la norma DIN EN ISO 6872 con un valore medio > 1.150 MPa.

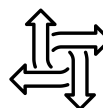

### OMNIFUNZIONALE

Versatile e adatto a un'ampia gamma di indicazioni cliniche. Sinterizzazione rapida oppure sinterizzazione convenzionale.


## Gradiente naturale

Straordinariamente naturale: transizione uniforme da cervicale a incisale sia in termini di colore che di traslucenza, simulando la struttura dei denti naturali nel modo migliore possibile.

Translucenza > 49% Resistenza > 980 MPa		5Y   INCISALE	20%
		4-5Y   STRATO INTERMEDIO 1	15%
		4-5Y   STRATO INTERMEDIO 2	15%
		4-5Y   STRATO INTERMEDIO 3	15%
Translucenza > 45% Resistenza > 1.310 MPa		4Y   CERVICALE	35%

## Proprietà fisiche

- Ossido di zirconio Tipo II Classe V secondo la norma DIN EN ISO 6872
- Resistenza alla flessione: valore medio tipico > 1.150 MPa
- Elevato gradiente di traslucenza da > 45% a > 49%
- Sinterizzazione rapida per corone e ponti fino a 3 elementi

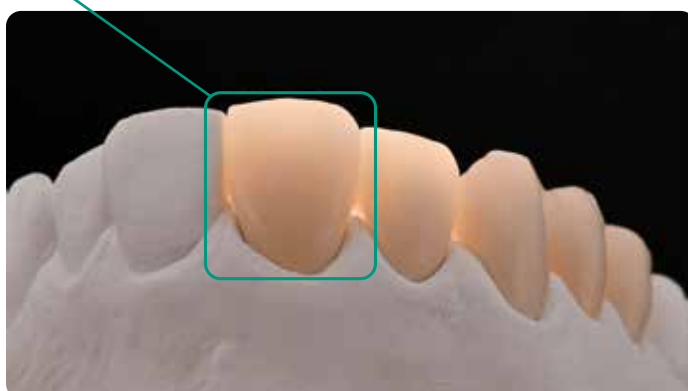

## Perfetto per una produttività di alta qualità

Grazie al flusso di lavoro intuitivo offerto da GC, la produttività può essere massimizzata senza compromettere la qualità.

### SCANSIONE E PROGETTAZIONE con Aadv Lab Scan 3

Scanner controllato tramite gesti con elevata precisione e funzioni di scansione smart



### COLORAZIONE INTERNA 2D con Initial Zirconia Coloring Liquid

Rifinitura con riproduzione degli effetti per il massimo grado di sofisticatezza.

Rifinitura con riproduzione degli effetti per il massimo grado di sofisticatezza.

### MICROSTRATIFICAZIONE con Initial IQ ONE SQIN

Colorazione a effetto 3D con Initial IQ Lustre Pastes ONE

Colore e fluorescenza - per manufatti puramente monolitici o con micro-cutback in combinazione con IQ SQIN.



OPPURE

### STRATIFICAZIONE CLASSICA con Initial Zr-FS

Effetti ottici insuperabili ed elevata stabilità dopo cotture multiple per strutture con cutback classico.



### FORMA E TEXTURE con Initial IQ ONE SQIN

Vitalità, texture naturale e lucentezza all'interno di un micro-strato.



### CEMENTAZIONE con FujiCEM Evolve

La scelta preferita per la zirconia, facile da usare e ideale per i margini iuxtagingivali o subgingivali.



# initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

La scelta migliore per gli standard più elevati

## I vantaggi a colpo d'occhio

- Estetica superiore con un **gradiente combinato di colore e traslucenza**.
- **Elevata resistenza** in tutti gli strati per rendere questo materiale adatto a un'ampia gamma di indicazioni.
- Riduce la rifinitura necessaria grazie alla **struttura nella tonalità cromatica corretta**.
- **Sinergia ottimale** con Initial Zirconia Coloring Liquid e con il sistema IQ ONE SQIN per una caratterizzazione di alta qualità.
- Tutti i 16 colori Vita e i 3 tipi di bleach sono disponibili in dischi dello spessore di 14, 16, 20 e 25 mm e del diametro di 98,5 mm.



## Sinergie perfette



Initial Zirconia Coloring Liquid



Initial IQ ONE SQIN



Initial Zr-FS

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax.+32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

### GC ITALIA S.r.l.

Via Luigi Cadorna, 69  
20055 Vimodrone (MI) Italia  
Tel.: +39 02 98282068  
<https://www.gc.dental/europe/it-IT>