




Oblikujte svet s pomočjo GC Initial.

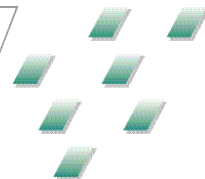

Vsestranski keramični sistem za vsako indikacijo

Gingivalne barve

GC Initial Gum Shades Set MC • GC Initial Gum Shades Set Zr



initial

www.gcinitial.gceurope.com

Sistem GC Initial je linija šestih specializiranih keramik s katerimi lahko oblikujete kovinsko keramične in polno keramične restavracije, ne glede na indikacijo, delovni proces in ogrodje. Za več informacij o celotnem GC Initial sistemu zahtevajte našo brošuro.

Da bodo gingivalne restavracije z GC Initial še bolj estetske in še bolj naravne, vsebuje Initial modularni keramični spekter nekaj gingivalnih barv vrhunske kvalitete. Pripravljeni seti GC Initial MC in GC Initial Zr Gum Shades ustrezajo vsem zahtevam po visoko estetski reprodukciji dlesni - za naraven, lep prehod v področje dlesni in za neomejeno kreativnost.



'GC.'



GC Initial Gum Shades: GC Initial Gum Shades Set MC • GC Initial Gum Shades Set Zr

Estetske zahteve za superstrukture implantatov se neprestano večajo, zato naraščajo tudi želje tehnikov, da naredijo področja mehkih tkiv iz keramike čim lepša. Da omogočimo tehnikom, da oblikujejo naraven prehod od marginalnega dela krone na področje dlesni, sestoji GC Initial keramični sistem iz treh uporabniku prijaznih GC Initial Gum Shades setov.

Novi materiali v barvi dlesni so posebej primerni za indikacije v področjih implantatnih superstruktur, pri tehniki prevlek in mostičkov.

Prav tako pa sledijo že preizkušeni GC Initial konceptu: **"En barvni sistem - eno slojna tehnika"**.



Objavo slik je dovolil zobotehnik Mike Richter, Nemčija.

Neviden prehod - naravna harmonija

Vsako značilnost dlesni, tudi specifično, lahko odlično ponazorite s petimi naravnimi analogi gingivalnih barv, ki se mešajo. Kot pri izdelavi lusk, lahko individualne korake enostavno razdelite med različne peke, odvisno od indikacij in delovnih metod posameznika.

GC Initial MC Gum Shades Set, opaque pasta
GC Initial MC Gum Shades Set, opaque prah
GC Initial MC Gum Shades set je pripravljen v dveh različicah s pasto ali prahom in v petih barvah: svetla osnova, temna osnova, intenzivno vijolična, intenzivno krem in intenzivno rdeča.

GC Initial Zr Gum Shades set
GC Initial Zr Gum Shades Set vsebuje Zr Frame Modifier FM-5 namesto opaker materiala.

Seveda lahko vsako barvo za dlesni dobite tudi posebej.

Tehnične specifikacije:

Značilnosti	GC Initial MC	GC Initial Zr
Dentinsko pečenje (°C)	890	810
	2/4.	2/4.
KTE (25-500°C; 10 ⁻⁶ ×K ⁻¹)	peka 13,1/13,3	peka 9,4/9,4
Tranzicijska temperatura stekla (°C)	575	550
Topljivost (µg/cm ²)	25	12
Specifična gostota (µg/cm ²)	2,52	2,43
Upogibna trdnost (MPa)	84	90
Vezavna trdnost (MPa)	50	-
Povprečna velikost delcev (µm; D 50%)	25	21,5

GC Initial MC in GC Initial Zr sledita EN ISO 9693:2000
(Omenjene tehnično/fizikalne vrednosti so rezultat internih testiranj.)

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Slovenia
Heroja Staneta 6
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
slovenia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com