

Dos modos, un dispositivo,
todas las posibilidades.



Labolight DUO de GC

Unidad de fotopolimerización
de led Dual para técnicas de
composite indirectas



GC

GC Labolight DUO

Los días en los que eran necesarios dos dispositivos de fotopolimerización en el laboratorio (uno para la polimerización intermedia y otro para la final) son cosa del pasado. Ahora GC ofrece un dispositivo de fotopolimerización multifuncional de última generación para protésicos dentales que combina dos modos de polimerización: prepolimerización (modo etapas) y polimerización final (modo completo)



Incluye la última tecnología led


Equipado con tecnología led de doble longitud de onda, Labolight DUO puede usarse para polimerizar cualquiera de los composites de GC de un modo seguro y duradero. Puede abarcar un intervalo de longitud de onda de 380 nm a 510 nm con picos de intervalos espectrales de:

- 465 nm - 485 nm (12 ledes azules)
- 390 nm - 400 nm (3 ledes violeta)

Esta tecnología garantiza un endurecimiento óptimo de todos los materiales dentales fotopolimerizables, al tiempo que la salida de alta potencia reduce los ciclos de fotopolimerización.

Sistema rotatorio automatizado

La placa reflectante distribuye toda la luz de manera eficaz y muestra su trabajo desde todos los ángulos. El soporte de polimerización posiciona los objetos con cuidado durante los ciclos de fotopolimerización.

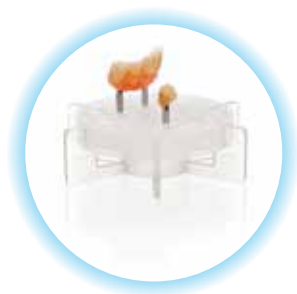

Diseño compacto y ergonómico

GC Labolight DUO no solo es capaz de realizar la mayoría de sus tareas, sino que también ofrece un buen aspecto. El premiado diseño elegante, contemporáneo y con superficies suaves, permite una fácil limpieza y reduce el espacio que ocupa en su laboratorio. Este diseño proporciona una gran facilidad de uso: la interfaz/panel de comunicación es muy sencilla e intuitiva y sus componentes internos son fácilmente accesibles gracias a su amplia apertura.



Modo por pasos



Modo completo

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas 2, 1º, Of. 4
ES -28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
http://spain.gceurope.com

