



Két mód, egy eszköz,
kettő az egyben



GC Labolight DUO

Kettős módú LED
fénypolimerizáló készülék
indirekt kompozit technikákhoz



GC

GC Labolight DUO

Azok a napok, amikor két polimerizáló készülékre volt szüksége (egy a rész-, egy a végső polimerizáláshoz) mostantól a múlté. A GC most bemutatja a legkorszerűbb multifunkcionális fénypolimerizáló készüléket fogtechnikusok számára, amely két polimerizálási módot kombinál: előpolimerizálás (lépcsőzetes mód) és végső polimerizálás (teljes mód).



A legfrissebb LED technológiával felszerelve

Kettős hullámhosszú LED technológiával felszerelve a Labolight DUO alkalmas minden GC kompozit biztonságos és tartós polimerizálására. 380 és 510 nm közötti fényhullámhossza a következő csúcsokkal:

- 465 nm-485 nm (12 kék LED)
- 390 nm-400 nm (3 lila LED)

Ez a technológia biztosítja az optimális keményedést minden fényre kötő fogászati anyag esetén, miközben a magas teljesítmény rövidíti a polimerizációs ciklusokat.

Automatizált forgórendszer

A fényvisszaverő lemez hatékonyan oszlatja el az összes fényt, így az a munkadarab összes felületét egyaránt éri. Az állvány precízen pozicionálja a darabot minden

Kompakt és ergonomikus kialakítás

A GC Labolight DUO amellet, hogy a legtöbb munkájához használható, még megjelenésében is nagyszerű. A díjnyertes, karcsúsított, modern stílus sima felszínével lehetővé teszi az egyszerű tisztítást és csökkenti a helyigényt.


A kialakítás felhasználóbarát: a felület nagyon egyszerű és intuitív, a belső részek könnyen hozzáférhetőek, köszönhetően a széles nyílásnak.



Lépcsőzetes mód



Teljes mód

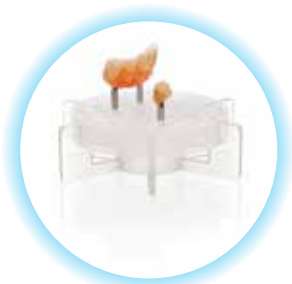

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Hungary
 Fazekas utca 29-31.
 H-1027 Budapest
 Tel. +36.1.224.04.00
 Fax. +36.1.224.04.01
 hungary@eeo.gceurope.com
 www.eeo.gceurope.com

