

GC Metal Primer Z

Heroj za
sve radove s
metalnom osnovom

Sredstvo za spajanje
akrilata za metal u
jednom koraku


GC

Tražite sredstvo za spajanje za čvrsto vezivanje metalnih osnova i bilo koje vrste akrilatnog materijala?

S Metal Primer Z, GC dovodi nasljednika iskušanog Metal Primer II, koji je godinama bio materijal izbora brojnih dentalnih stručnjaka. S dva funkcionalna monomera u sastavu, Metal Primer Z izradit će još čvršće veze.

Spoj s plemenitim legurama poboljšan je **MDTP** monomerom.

Drugi monomer, **MDP**, omogućuje čvrstu vezu za neplemenite legure te čak i za cirkonij-oksidnu keramiku za određene indikacije.

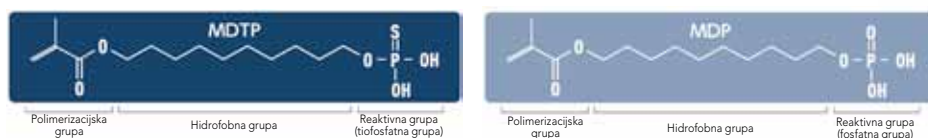

Metal Primer Z ističe se sledećim osobinama:

- Brz i jednostavan postupak
 - Nije potrebna dodatna oprema
- Nije potrebna toplinska obrada
 - Izbjegavanje nepotrebnih varijacija koeficijenta toplinske ekspanzije
- Stvaranje trajne veze, čak i u vlažnom okruženju
 - Može se nanositi direktno u usta
- Univerzalna upotreba
 - Koristi se sa svim dentalnim legurama i akrilatima



009295 GC Metal Primer Z, 5 ml

Uvijek kada radite s metalnim osnovama i akrilatnim materijalima, odaberite ovog univerzalnog heroja svih vremena.

- Nanošenje (opaknih) materijala na bazi akrilata za metalne krunice i mostove te krunice i mostove iz cirkonij-oksidne keramike
- Spajanje ili popravak dentalnih proteza s metalnim osnovama, kvačicama ili pričvrscima




Metal Primer Z korak po korak



Pjeskarenje



Nanošenje

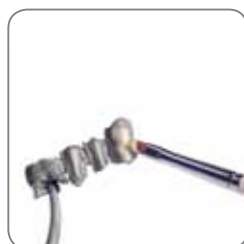

Akrilat/Opaker

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Bosnia and Herzegovina
Carice Milice 11
BIH - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.47.07.36
Fax. +387.51.47.07.36
bosniaherzegovina@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com