




Metal Primer Z de GC

El héroe para
todas sus estructuras
con base metálica
Adhesivo de un solo paso
para la adhesión
de resina a metal

GC

¿Busca un adhesivo para crear conexiones resistentes entre estructuras metálicas y cualquier tipo de material de resina?

GC le presenta Metal Primer Z, sucesor del eficaz Metal Primer II, que ha sido la opción elegida por muchos profesionales dentales desde hace muchos años. Gracias a sus dos monómeros funcionales, Metal Primer Z consigue crear conexiones aún más sólidas. La adhesión a aleaciones preciosas aumenta con el monómero **MDTP**. El segundo monómero (**MDP**) permite una adhesión fuerte a aleaciones no preciosas e incluso al zirconio en determinadas indicaciones.

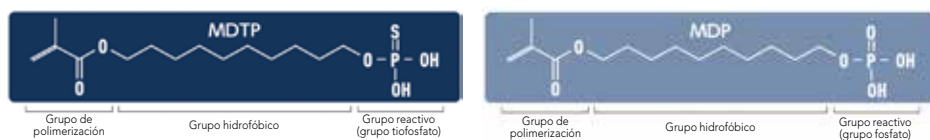

Metal Primer Z destaca por las siguientes características:

- Un procedimiento rápido y sencillo
 - Sin necesidad de ninguna aparatología adicional
- Sin necesidad de tratamiento de calor
 - Sin variaciones innecesarias del coeficiente de expansión térmica
- Crea una adhesión permanente, incluso en un ambiente húmedo
 - Se puede aplicar directamente en la boca
- Uso universal
 - Se usa con todo tipo de aleaciones dentales y materiales acrílicos



Siempre que tenga que trabajar con estructuras con base metálica y con materiales de resina, recurra al héroe más versátil de todos los tiempos.

- Aplicación de materiales de resina (opaca) a metales y zirconio para coronas y puentes
- Adhesión o reparación de prótesis removibles de base metálica, retenedores o ataches



Metal Primer Z paso a paso



Arenado

Aplicación

Resina/opaco

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC IBÉRICA

Dental Products, S.L.
Edificio Codesa 2
Playa de las Américas, 2, 1º, Of. 4
28290 Las Rozas, Madrid
Tel. +34.916.364.340
Fax. +34.916.364.341
info@spain.gceurope.com
http://spain.gceurope.com