

GC Metal Primer Z

Heroj za
sve radove s
metalnom osnovom

Sredstvo za spajanje
akrilata za metal u
jednom koraku

GC

Tražite sredstvo za spajanje za čvrsto vezivanje metalnih osnova i bilo koje vrste akrilatnog materijala?

S Metal Primer Z, GC dovodi nasljednika prokušanog Metal Primer II, koji je godinama bio materijal izbora brojnih dentalnih stručnjaka. S dva funkcionalna monomera u sastavu, Metal Primer Z izradit će još čvršće veze.

Spoj s plemenitim legurama poboljšan je **MDTP** monomerom.

Drugi monomer, **MDP**, omogućuje čvrstu vezu za neplemenite legure te čak i za cirkonij-oksidnu keramiku za određene indikacije.



Metal Primer Z ističe se sljedećim svojstvima:

- Brz i jednostavan postupak
 - Nije potrebna dodatna oprema
- Nije potrebna toplinska obrada
 - Izbjegavanje nepotrebnih varijacija koeficijenta toplinske ekspanzije
- Stvaranje trajne veze, čak i u vlažnom okruženju
 - Može se nanositi direktno u usta
- Univerzalna uporaba
 - Koristi se sa svim dentalnim legurama i akrilatima



009295 GC Metal Primer Z, 5 ml

Uvijek kada radite s metalnim osnovama i akrilatnim materijalima, odaberite ovog univerzalnog heroja svih vremena.

- Nanošenje (opaknih) materijala na bazi akrilata za metalne krunice i mostove te krunice i mostove iz cirkonij-oksidne keramike
- Spajanje ili popravak dentalnih proteza s metalnim osnovama, kvačicama ili pričvrscima




Metal Primer Z korak po korak



Pjeskarenje



Nanošenje

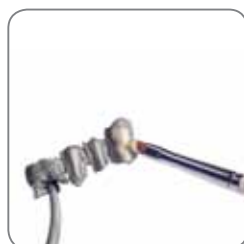

Akrilat/Opaker

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Croatia
 Siget 19b
 HR - 10020 Zagreb
 Tel. +385.1.61.54.597
 Fax. +385.1.61.54.597
 croatia@eeo.gceurope.com
 www.eeo.gceurope.com

'GC'