




Metal Primer Z de la GC

Agent de
legătură între metal
și rășini acrilice,
într-o singură etapă

GC

Căutați un agent de legătură pentru a crea o conexiune puternică între sub-structurile metalice și orice tip de material rășinic?

GC introduce succesorul deja consacratului Metal Primer II, Metal Primer Z, alegerea multor profesioniști din domeniul stomatologic de-a lungul anilor. Având 2 monomeri funcționali, Metal Primer Z va crea conexiuni mai puternice. Adeziunea la aliajele prețioase este îmbunătățită datorită monomerului **MDTP**. Cel de-al doilea monomer, **MDP**, oferă o adeziune puternică la aliajele neprețioase, chiar și la zirconiu pentru anumite indicații.

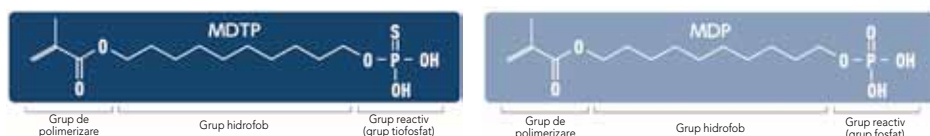

Metal Primer Z prezintă următoarele caracteristici:

- Un procedeu rapid și simplu
 - Nu necesită echipament suplimentar
- Nu necesită tratament termic
 - Se evită variațiile T.E.C. nedorite
- Crează o adeziune permanentă, chiar și în mediul umed
 - Poate fi aplicat direct în cavitatea orală
- Utilizare universală
 - Se utilizează cu toate aliajele dentare și rășinile acrilice



Atunci când trebuie să lucrați cu sub-structuri metalice și materiale rășinice alegeți acest produs complex.

- Aplicarea materialelor rășinice (opace) pe metal & zirconiu pentru coroane și punți
- Adeziunea sau repararea protezelor cu suport metalic, cleme sau atașamente



Metal Primer Z pas cu pas



Sablare



Aplicare



Rășină/Opac

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Romania
 Str. Gen. N. Dona, nr.22-24,
 sc.1, et.1, ap.13, sect.1
 RO - 010782 București
 Tel. +40.21.313.41.53
 Fax. +40.21.313.41.53
 romania@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

GC