

GC Metal Primer Z

Heroj za
sve radove s
metalnom osnovom

Sredstvo za spajanje
akrilata za metal u
jednom koraku


GC

Tražite sredstvo za spajanje za čvrsto vezivanje metalnih osnova i bilo koje vrste akrilatnog materijala?

S Metal Primer Z, GC dovodi naslednika proverenog Metal Primer II, koji je godinama bio materijal izbora brojnih stomatologa. Sa dva funkcionalna monomera u sastavu, Metal Primer Z formiraće još čvršće veze.

Spoj sa plemenitim legurama poboljšan je **MDTP** monomerom.

Drugi monomer, **MDP**, omogućava čvrstu vezu za neplemenite legure te čak i za cirkonijum-oksidnu keramiku za određene indikacije.

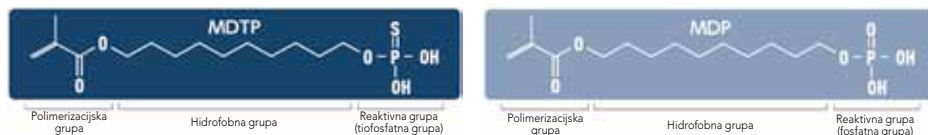

Metal Primer Z ističe se sledećim svojstvima:

- Brz i jednostavan postupak
 - Nije potrebna dodatna oprema
- Nije potrebna toplotna obrada
 - Izbegavanje nepotrebnih varijacija koeficijenta toplotne ekspanzije
- Stvaranje trajne veze, čak i u vlažnom okruženju
 - Može se nanositi direktno u usta
- Univerzalna upotreba
 - Koristi se sa svim dentalnim legurama i akrilatima



Uvek kad radite sa metalnim osnovama i akrilatnim materijalima, odaberite ovog univerzalnog heroja svih vremena.

- Nanošenje (opaknih) materijala na bazi akrilata za metalne krunice i mostove te krunice i mostove od cirkonijum-oksidne keramike
- Spajanje ili popravak dentalnih proteza sa metalnim osnovama, kvačicama ili pričvrscima



Metal Primer Z korak po korak



Peskarenje



Nanošenje



Akrilat/opakni

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
 GCEEO Serbia
 Cvijićeva 82
 RS - 11000 Beograd
 Tel. +381.11.20.88.033
 Fax. +381.11.20.88.033
 serbia@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

GC