

Készüljön fel a könnyed kompozit rétegzésre a GC Modeling Liquid és a Gradia ecsetek használatával



012244 - GC Modeling Liquid, Refill 6mL EEP

001533 - GC GRADIA, Brush Round, n°1 x10

001534 - GC GRADIA, Brush Flat, n°1 x10

001535 - GC GRADIA, Brush Holder x2

900744 - GC Composite Modeling Kit EEP

Tartalma: GC Modeling Liquid EEP,
Gradia Brush Flat (x5), Gradia Brush Round (x5),
Gradia Brush Holder (x2), Mixing Pads.

Fedezze fel a kiváló kezelhetőséget és esztétikumot egyesítve a GC paszta kompozitjaival



Gradia Direct Anterior / Posterior / X



G-aenial Anterior / Posterior



Essentia

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Hungary
Fazekas 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.0400
hungary@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

'GC.'

zOLF882 HU 02/18

Applikálja, alakítsa,
simítsa,
élvezze!

Kompozitok
rétegzése még
egyszerűbben

a GC Modeling Liquid
és a GC ecsetek
alkalmazásával

'GC.'

Egyszerűsítse kompozit munkáit alkalmazzon **ecsettechnikát**

A direkt kompozitok sokszor tükkösen viselkednek: néha erősen tapadnak a műszerekhez, néha bonyolult a kialakításuk vagy elsimításuk ahogyan szeretné, aztán a legvégén meg megjelennek a szélek...

Az ecsettechnika és modeling liquid használata a kompozitok applikálásához valóban az egészet megváltoztatja



Gyors és egyszerű
applikálás
és kialakítás

Egy modeling liquidben megnedvesített ecsethez a kompozit kevésbé ragad, ennek eredménye az egyszerűbb és gyorsabb applikálás és formálás.



Sima befejezés
a rövidebb
finírozásért

Az utolsó réteg applikálása egy megnedvesített ecsettel segít a hatékony elsimításban és a csodaszép felszín létrehozásában. Ez megkönnyíti a finírozást és értékes időt takarít meg.




Láthatatlan
a legjobb esztétikus
eredményért

Annak elenére, hogy kissé sárgás az applikálás alatt, a GC Modeling Liquid teljesen transzparens fénykezelést követően – ezzel garantálja a legjobb esztétikus eredményt.



GC Modeling Liquid, a tökéletes nedvesítő rezin az ecsettechnikához:

- Optimális alacsony viszkozitás
- Teljesen láthatatlan a fénykezelés után
- Nagyon egyszerű és időtakarékos eljárás
- 350 csöpp üvegenként 350 restaurációhoz
- Kompatibilis minden direkt kompozittal
- Tárolható szobahőmérsékleten

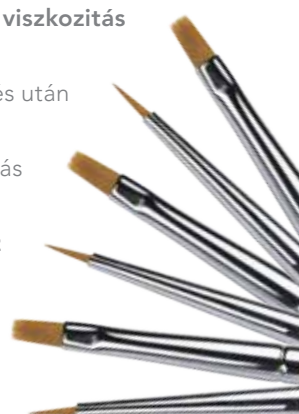

Viszlát trükkös kompozitok Applikálja, alakítsa, simítsa, élvezze!



Adagoljon ki egy cseppet a GC Modeling Liquidből egy lapra



Nagyon gyorsan használja fel és védje fedéllel



Nedvesítse meg az ecsetet a folyadékkal



Távolítsa el a felesleget egy zsebkendővel



A palatinális zománc létrehozásához használjon lapos ecsetet



A kerek ecset jól használható az interproximális területen



Applikálja a dentin pasztát a lapos ecsettel



A dentin mamelonok kialakításához a kerek ecsetet használja



Az ecsetek alkalmazásának köszönhetően a végső felszín sima

Optimális a poszterior eseteihez is

A kerek ecset segítségével felépíthetők a csücskök és finomítható a barázdarendszer



Az ecset könnyen meghajtható, így jobban elérhető a poszterior terület



Az ecsettel az anyag csücsköként applikálható



A físzúrák és a finom anatómia kialakításához is optimális