

A jó dolgoknak tökéletes  
védelem kell:  
**Optiglaze** a **GC**-től



Nanotöltésű fényrekötő védőlakk kompozit  
és akril indirekt helyreállításokhoz



Az **Optiglaze**-zel a GC **egyszerű** és **gazdaságos** megoldást kínál az **esztétikus és fényes**, polírozott hatású felületek elérésére.

Az időigényes mechanikus polírozás helyett **mindössze két lépésben** tökéletes eredményt érhet el: vigye fel a védőréteget - világítsa meg – és kész!


A GC **egyedülálló** nanoszemcsés technológiája kimagasló kopásállóságot, hosszan tartó fényt és magas szakítószilárdságot biztosít.

**GC**



## Indikációk

Az egyszerűsített finirozási eljáráshoz a GC egy olyan **Optiglaze** nevű védőlakot fejlesztett ki, mely esztétikus, fényes felületet ad műfogakon, kivehető pótlásokon, ideiglenes koronákon és egyéni akrilkanalakon. Olyan területek fényesítésére is használható, mint pl. poszterior barázdák vagy indirekt kompozit helyreállításoknál az interproximális területen. Tehát a mechanikus polírozás helyett válassza az egyszerűbb utat, és érjen el minőségibb fényt az **GC Optiglaze**-zel!

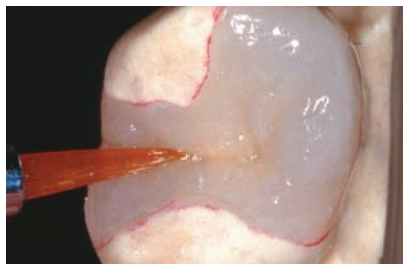


- időtakarékos
- könnyen kezelhető
- tökéletes esztétikum
- hosszan tartó fény
- új nanotöltésű technológia
- kimagasló kopásállóság
- kiváló kötési tartósság
- nagyon vékony fedőréteget képez (25-50 µm)
- igen ellenálló az elszíneződésekkel szemben
- nincs befolyással a helyreállítás színére


## Új nanotöltésű technológia!

■ Kopás    ● Nano-töltőanyag    □ A védőlakk rezinmátrixa

### Jelenlegi technológia

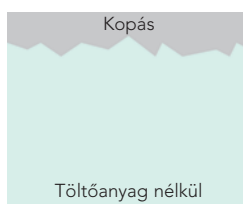


Töltőanyag nélkül az anyag gyorsan lekopik

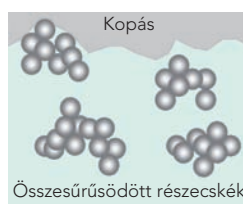

A megszokott töltéstechnológiájánál a részecskescsoportok könnyen összecsomósodnak, így az anyag még mindig hajlamos a kopásra

### Nano-töltőanyag technológia

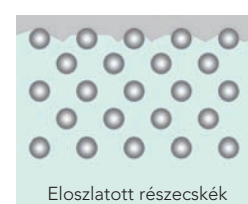

A GC új nanotöltésű technológiájának köszönhetően a részecskék egyenletesen oszlanak el, ezáltal ellenállnak a kopásnak, elszíneződéseknek, kimagasló szakítószilárdságot és hosszan tartó fényt biztosítva


## Kiszerezés



Flakon (15 ml)

## Csak két lépésre a tökéletes eredménytől


Vigye fel a védőréteget (folyadékot) egy ecsettel, majd világítsa meg a megfelelő eszközzel (pl. GC Labolight LV-II/III) mindössze 3 perccig.

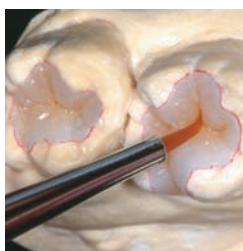

Applikálás



Fénykezelés

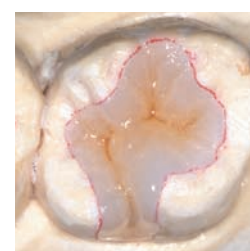

Végeredmény

**GC EUROPE N.V.**  
**Head Office**  
 Interleuvenlaan 13  
 B - 3001 Leuven  
 Tel. +32.16.39.80.50  
 Fax. +32.16.40.02.14  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
**GC EEO – Hungary**  
 H - 1119 Budapest  
 Etele út 65.  
 Tel.: +36.1.205.36.02  
 Fax: +36.1.205.36.03  
 hungary@eoo.gceurope.com  
 www.eoo.gceurope.com

