

Dobre stvari potrebujejo
odlično pokrivalo:
GC Optiglaze.

Zaščitni premaz z nano polnili in svetlobno polimerizacijo
za kompozite in akrilne indirektne restavracije.



Z **Optiglaze GC**
zagotavlja **enostaven**
in **ekonomičen** način,
kako dobiti **estetsko**
svetlečo površino podobno
kot pri končnem poliranju.

Namesto mehničnega
poliranja, ki pomeni porabo
časa, potrebujete **le dva**
koraka za odličen rezultat:
nanos premaza - svetlobna
polimerizacija - končano!



GC **nova** nano tehnologija
za odlično odpornost
na obrabo, dolgotrajni sijaj
in visoko vezavno trajnost!

GC



Indikacije

Za poenostavitev procesa obdelovanja je GC razvil novo sredstvo za premaze, imenovano **Optiglaze**, ki zagotavlja estetsko svetlečo površino na umetnih zobeh, protezah, začasnih prevlekah in individualnih akrilnih izdelkih. Uporablja se lahko v predelih, kjer je poliranje težko, kot so posteriorne fisure ali interproksimalna področja indirektnih kompozitnih restavracij. Tako lahko namesto mehaničnega poliranja izberete lažjo pot in dosežete visoko kvalitetni končni sijaj z **GC Optiglaze**.

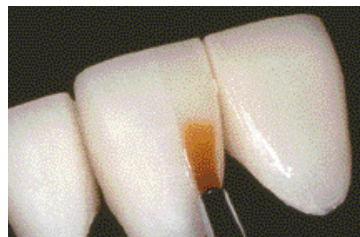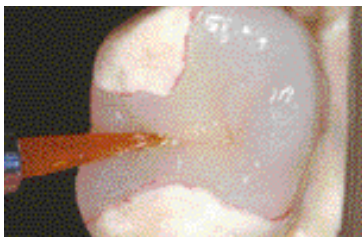


- prihranek časa
- enostavno delo
- odlična estetika
- dolgotrajni sijaj
- nova tehnologija nano delcev
- superiorna odpornost na obrabo
- odlična trajnost vezave
- zelo tanek sloj premaza (25-50 µm)
- visoka odpornost na zabarvanje
- ni vpliva na barvo restavracije


Vsebuje novo tehnologijo z nano polnili!

▭ Obraba ● Nano-polnila ▭ Smolnati matriks premaza

Sedanja tehnologija

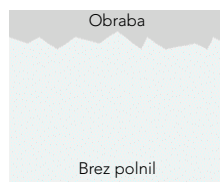


Brez polnil se lahko material hitro obrabi.

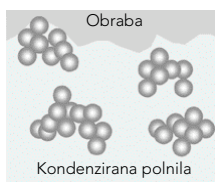

S konvencionalno tehniko polnil se pogosto pojavijo kupčki delcev in material je zato bolj občutljiv na obrabo.

Tehnologija nano polnil

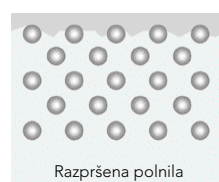

Zaradi nove GC-jeve tehnike nano polnil, so delce enakomerno razporejeni, kar nudi visoko odpornost na obrabo in odpornost na zabarvanje, visoko trajnost vezave in dolgotrajnen sijaj!


Pakiranje



Steklenička 15 ml

Dva koraka do popolnega rezultata


Nanesite premaz (tekočino) s čopičem in svetlobno polimerizirajte z lučko (npr. GC Labolight LV-II/III) samo 3 minute.

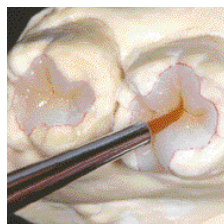

Nanesite



Svetlobno polimerizirajte

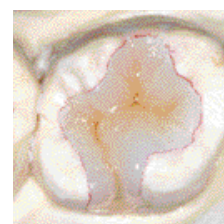

Končano

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Slovenia
Heroja Staneta 6
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
slovenia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

