

Värdefulla ting behöver ett
bra skydd:
Optiglaze från **GC.**



Nanofyllad ljushärdande skyddslack för indirekta restaurationer framställda av komposit eller akrylat.



Med **Optiglaze** erbjuder GC ett **enkelt** och **ekonomiskt** sätt att få en estetiskt skinande yta som du annars bara får med optimal finputs.

Istället för tidskrävande mekanisk polering utför **dess** **två steg**: applicera Optiglaze – ljushärda – färdigt!

Den nya **unika** nanofillerteknologin från GC ger överlägsen abrasionsresistens, bra bindning, och en högglans som håller!

GC



Indikationer

För att göra ditt liv så enkelt som möjligt har GC utvecklat en ny skyddslack, **Optiglaze**, som ger en estetiskt skinande yta på artificiella tänder, avtagbara proteser, temporära kronor och temporära kronor. Produkten används med fördel på ytor som är svåra att komma åt vid polering, t.ex. posteriora fissurer eller i approximala ytor på indirekta restaurationer av komposit.

Så, istället för mekanisk polering, välj det enkla sättet. Använd **Optiglaze** och få en skinande blank yta på rekordtid.




- sparar tid
- lätt att använda
- perfekt estetik
- långvarig glans
- ny nanofillerteknologi
- överlägsen abrasionsresistens
- hållbar bindning
- mycket tunnt skikt (25-50µm)
- högresistent mot missfärgning
- påverkar inte färgen på restaurationen


Ny nanofillerteknologi invändigt!

■ Nötning ● Nanofiller □ Resindel av skyddslacket

Nuvarande teknologi

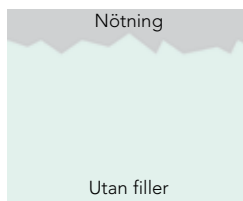


Utan filler nöts materialet lätt.

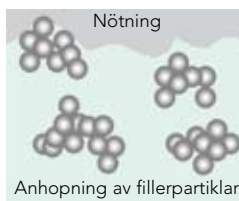

Med konventionell fillerteknologi samlas fillerpartiklar i s.k. kluster. Därför ser man kraftiga nötningstendenser med den typen av teknologi.

Nanofillerteknologi

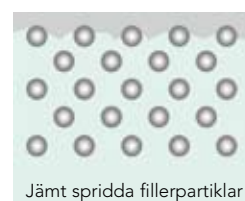

Med GC's nya nanofillerteknologi, distribueras fillerpartiklarna jämt i resindelen vilket ger en minimal nötning, god resistens mot missfärgningar, bra bindning och en skinande blank yta som håller!


Förpackning



Flaska 15 ml

Endast två steg för ett perfekt resultat


Applicera Optiglaze (vätska) med en pensel och ljushärda med en lampa (t.ex. GC Labolight LV-II/III) under 3 minuter.

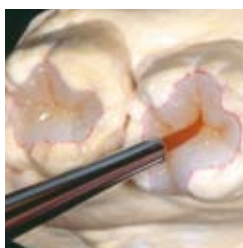

Applicera



Ljushärda

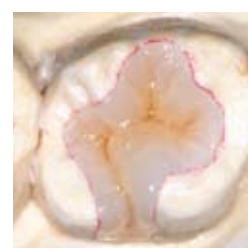

Färdigt

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC NORDIC AB
Kungsposten 4 A
S - 427 50 Billdal
Tel. +46 31 939553
Fax. +46 31 914246
info@nordic.gceurope.com
www.nordic.gceurope.com

