

# RELINE™ II Soft a RELINE™ II Extra Soft

## Dokonale padnoucí náhrady pro aktivní život



Objevte všestrannou rodinu podkládacích materiálů od GC



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
<b>Materiál</b>	Akrylátová pryskyřice	A-silikon	A-silikon	Akrylátová pryskyřice (bez MMA)
<b>Indikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlakové body</li> <li>• Během implantologické léčby</li> <li>• Měkké podkládání</li> <li>• Zotavení tkáně po úrazech/operacích</li> <li>• Funkční otisky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tonizace tkáně</li> <li>• Citlivá sliznice</li> <li>• Tlakové body</li> <li>• Zklidnění podrážděné tkáně</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantologické případy</li> <li>• Tlakové body</li> <li>• Kostěné výběžky</li> <li>• Redukce bolesti a zvýšení komfortu</li> <li>• Dlouhodobé podložení v případě ztráty podpůrné tkáně</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dlouhodobé podkládání</li> <li>• Nepadnoucí protězy bez slizničních traumat</li> <li>• Závěrečný krok po předchozím ošetření pomocí měkkých podkládacích materiálů nebo tkáňových kondicionerů</li> </ul>
<b>Doba v ústech</b>	Dny/týdny/měsíc	Dny/týdny	Týdny/měsíce	Měsíce/roky

### Dostupná balení materiálu Reline II Soft a Extra Soft

#### Intro Kit

010260 **GC RELINE II Soft Intro Kit** EEP:  
 1x GC RELINE II kartuše Soft  
 1x GC RELINE II Primer pro pryskyřici  
 1x GC RELINE II Špička pro úpravu okrajů  
 1x GC RELINE II Kotouč pro dokončení  
 1x GC RELINE II Remover pro pryskyřici

010263 **GC RELINE II Extra Soft Intro Kit** EEP:  
 1x GC RELINE II kartuše Extra Soft  
 1x GC RELINE II Primer pro pryskyřici  
 1x GC RELINE II Špička pro úpravu okrajů  
 1x GC RELINE II Kotouč pro dokončení  
 1x GC RELINE II Remover pro pryskyřici

#### Refill

010266 GC RELINE II Soft kartuše, 48 ml EEP  
 010269 GC RELINE II Extra Soft kartuše, 48 ml EEP  
 010273 GC RELINE II Primer pro pryskyřici, 10 ml  
 010271 GC RELINE II Dokončovací materiál (Modifier), balení 1-1, 2x 9 ml  
 010275 GC RELINE II Remover pro pryskyřici, 5,5 ml  
 010277 GC RELINE II Špička pro úpravu okrajů x3,  
 010280 GC RELINE II Kotouč pro dokončení x 12,  
 010283 GC RELINE II Jednorázový štětec x 6

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
 GCEEO Czech Republic  
 V Olšínách 82  
 CZ - 100 00 Prague 10  
 Tel. +420.274.771.965  
 Fax. +420.274.771.965  
 czech@eeo.gceurope.com  
 www.eeo.gceurope.com

# Dokonale padnoucí náhrady pro aktivní život



RELINE™ II Soft a  
 RELINE™ II Extra Soft  
 od GC

Měkké silikonové podkládací  
 materiály v kartuších



# Dokonalá funkčnost a pohodlí pro bezstarostný

# úsměv za všech okolností

Podráždění, extrakce či zavedení implantátů způsobuje změny měkkých i tvrdých tkání, **a to vede k potřebě přizpůsobit zubní protézy místně změněným podmínkám.**

Pacienti se dožívají stále vyššího věku a zůstávají déle aktivní; chtějí se i nadále smát, mluvit, užívat si dobrého jídla a to i přesto, že nosí zubní protézy.

**Reline II Soft a Extra Soft od GC** byly navrženy tak, aby vytvořily měkkou vrstvu mezi protézou a sliznicí pro **podporu hojení, zachování pohodlí a funkčnosti** a to po dobu týdnů až několika měsíců.



Fotografie použity s laskavým svolením Dr. Garcia-Baeza, Španělsko

**Snadno aplikovatelný silikonový materiál v kartuších**

Díky své **ideální viskozitě** materiál **pod tlakem teče a přesně se přizpůsobuje** všem anatomickým detailům.

Jeho **vylepšené mechanické vlastnosti** činí konečnou úpravu okrajů mnohem jednodušší.

**Dlouhodobý komfort a příjemná úleva pro vaše pacienty**

O větší pohodlí vašich pacientů je postaráno mimo jiné tím, že se teplota Reline II během tuhnutí nezvyšuje.

Materiál **zůstává hladký a bez zápachu**, udržuje si svou **rozměrovou stabilitu a pružnost** po několik týdnů i měsíců. Výsledek? **Odolné a pohodlné řešení** pro pacienty se zubními protézami.

**Silná adheze, snadná údržba, jednoduchá úprava**

Vylepšené složení **GC Reline II Primeru pro pryskyřici** poskytuje na delší dobu **silnou adhezi k zubní protěze**. Nicméně tato silná adheze nemá žádný vliv na pružnost podkládacího materiálu.

V průběhu **tří měsíců po první aplikaci lze materiál doplnit** tak, aby se podložení přizpůsobilo změnám na sliznici či kosti. Nový **GC Reline II Remover pro pryskyřici** umožňuje velmi rychle odstranění stávající vrstvy podkládacího materiálu a její případné nahrazení.



Vylepšené mechanické vlastnosti pro lepší konečnou úpravu okrajů



Ochrana okrajů s dokončovacím materiálem Reline II



**GC RELINE II Primer pro pryskyřici**




**GC RELINE II Remover pro pryskyřici**

Fotografie použity s laskavým svolením Dr. Seiferta, Chorvatsko

**Od odolnosti k elasticitě: vyberte si takový produkt, který nejlépe vyhovuje dané klinické situaci**

Díky tvrdosti 32 (Shore A) je **GC RELINE™ II Extra Soft** rezilientním materiálem. To je zvláště užitečné pro normalizaci podrážděných tkání a **podporu tkáňového hojení** po extrakci nebo implantologickém zákroku. V protěze může zůstat několik dní nebo týdnů.

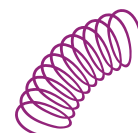

S tvrdostí 48 (Shore A) zůstává **GC RELINE™ II Soft** dlouhodobě elastický a podobně jako **tlumič nárazů rozkládá tlakové zatížení** v případech anatomických problémů. Je také ideální pro podkládání **zubních protéz nesených implantáty** po fázi hojení. V protěze může zůstat několik týdnů či měsíců.



**Jednoduchá aplikace a zpracování během celého postupu**



Výchozí stav protězy určené k podložení po umístění 4 implantátů.



Odlehčení podkládané oblasti a zdrsnění povrchu.



Nanesení GC RELINE II Primer na podkládanou oblast. jemně osušení vzduchem.



Snadné dávkování z kartuše.



Aplikace GC RELINE II (Extra Soft). Pracovní čas je 2'00".



Usazení protězy do úst a funkční úprava. Ponechat na místě po dobu 5'00".



Odstranění přebytků pomocí skalpelu nebo nůžek. Úprava pomocí GC RELINE II ŠPIČKY PRO LEMOVÁNÍ.



Dokončení pomocí GC RELINE II DOKONČOVACÍHO KOTOUČE.



Podložená protěza.