

# RELIN<sup>TM</sup> II Soft & RELIN<sup>TM</sup> II Extra Soft

## Prianjanje i udobnost za aktivan život



Otkrite celu porodicu GC Reline materijala



	GC TISSUE CONDITIONER	GC RELINE II Extra Soft	GC RELINE II Soft	GC RELINE P/L
Materijal	Akrlilat	Adicioni silikon	Adicioni silikon	Akrlilat (bez MMA)
Indikacije	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mesta pritiska</li> <li>Tokom postavljanja implantata</li> <li>Meko podlaganje</li> <li>Zarastanje tkiva nakon traume/hirurškog zahvata</li> <li>Funkcijski otisci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materijal za poboljšanje tonusa tkiva</li> <li>Osetljiva sluzokoža</li> <li>Mesta pritiska</li> <li>Normalizacija iritiranih tkiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radovi s implantatima</li> <li>Mesta pritiska</li> <li>Potkopana koštana područja</li> <li>Smanjenje bola i povećanje udobnosti</li> <li>Dugotrajno podlaganje kod nedostatka potpornog tkiva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dugotrajno podlaganje</li> <li>Proteze koje ne prijanaju bez oštećenja</li> <li>Završna faza nakon pripreme terapije materijalima za meko podlaganje i/ili kondicioniranje tkiva</li> </ul>
Vreme u ustima	Dani/nedelje/meseci	Dani/nedelje	Nedelje/meseci	Meseci/godine

### Dostupna pakovanja materijala Reline II Soft & Extra Soft

#### Početni komplet

010260 **GC RELINE II Soft Početni komplet:** EEP  
 1x GC RELINE II patrona Soft  
 1x GC RELINE II Primer za akrilat  
 1x GC RELINE II gumica za obradu  
 1x GC RELINE II polirer za završnu obradu  
 1x GC RELINE II odstranjivač za akrilat

010263 **GC RELINE II Extra Soft Početni komplet:** EEP  
 1x GC RELINE II patrona Extra Soft  
 1x GC RELINE II Primer za akrilat  
 1x GC RELINE II gumica za obradu  
 1x GC RELINE II polirer za završnu obradu  
 1x GC RELINE II odstranjivač za akrilat

#### Dopuna

010266 GC RELINE II Soft patrona, 48 ml EEP  
 010269 GC RELINE II Extra Soft patrona, 48 ml EEP  
 010273 GC RELINE II Primer za akrilat, 10 ml  
 010271 GC RELINE II materijal za završnu obradu (modifikator), 1-1 pakovanje, 2x 9 ml  
 GC RELINE II odstranjivač za akrila, 5,5 ml  
 010275 GC RELINE II gumica za obradu x 3,  
 010277 GC RELINE II polirer za završnu obradu x 12  
 010280 GC RELINE II polirer za završnu obradu x 12  
 010283 GC RELINE II jednokratna četkica x 6

**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Researchpark  
 Haasrode-Leuven 1240  
 Interleuvenlaan 33  
 B-3001 Leuven  
 Tel. +32.16.74.10.00  
 Fax. +32.16.40.48.32  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
 GCEEO Serbia  
 Cvijićeva 82  
 RS - 11000 Beograd  
 Tel. +381.11.20.88.033  
 Fax. +381.11.20.88.033  
 serbia@eeo.gceurope.com  
 www.eeo.gceurope.com

# Prianjanje i udobnost za aktivan život



GC  
RELIN<sup>TM</sup> II Soft &  
RELIN<sup>TM</sup> II Extra Soft

Meki silikonski materijali  
za podlaganje u patronama



# Prianjanje, funkcija i udobnost za osmeh u svim situacijama

Iritacije, vađenja zuba ili postavljanje implantata dovode do promena mekih i tvrdih tkiva pa **proteze treba prilagoditi novim okolnostima u okruženju.**

Budući da stariji pacijenti sve duže ostaju zdraviji i aktivniji, žele moći nastaviti smejeti se, govoriti i jesti u svim situacijama, čak i kad nose proteze.

**GC Reline II Soft i Extra Soft** izrađeni su za stvaranje mekog sloja između proteze i sluzokože, koji nedeljama, a čak i do nekoliko meseci **pomaže zarastanju i održava udobnost i funkciju.**



Slike ustupio dr. Garcia-Baeza, Španija

Silikonski premaz jednostavan za nanošenje u obliku patrone

Idealna viskoznost materijala omogućava mu **tečenje pod pritiskom**, uz lepo **prilagodavanje** svim anatomskim detaljima.

**Poboljšano obrezivanje** dodatno olakšava završnu obradu rubova.

Dugotrajna udobnost i olakšanje za vaše pacijente

Kod materijala Reline II temperatura se neće povećati tokom stvrdnjavanja, što povećava udobnost pacijenata.

Materijal **ostaje gladak i bez mirisa** i zadržava **dimenzionu postojanost i elastičnost** tokom nedelja i meseci. A rezultat? **Trajno i udobno rešenje** za pacijente s protezom.

Snažna adhezija, jednostavno održavanje i prilagođavanje

Poboljšani sistem **GC Reline II Primer za akrilate** pruža **snažnu adheziju za zubnu protezu** kroz duže vreme. Međutim, ta ga snažna adhezija ne čini ništa manje fleksibilnim.

**Materijal se može dodati kroz tri meseca** od prvog nanošenja, kako bi se izvršilo prilagođavanje promenama sluzokože i kosti. Novi **GC Reline II odstranjivač za akrilat** omogućava lako odstranjivanje sloja za podlaganje i njegovu brzu zamenu.



Poboljšano obrezivanje za bolju završnu obradu rubova



Zaštita rubova materijalom za završnu obradu Reline II



**GC RELINE II Primer za akrilat**




**GC RELINE II Odstranjivač za akrilat**

Slike uz dozvolu dr. Seifert, Hrvatska

Od rezilijencije do elastičnosti: odaberite proizvod koji najbolje odgovara kliničkoj situaciji

Tvrdoćom od 32 (Shore A), **GC RELINE™ II Extra Soft** je rezilijentni materijal. Pogotovo pomaže u **normalizaciji** iritiranih tkiva i **zarastanju tkiva** nakon vađenja zuba ili postavljanja implantata. Može se koristiti **danima ili nedeljama.**

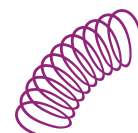

Tvrdoćom od 48 Shore A, **GC RELINE™ II Soft** zadržava elastičnost s vremenom, poput **amortizera**, šireći **pritisak opterećenja** u slučaju anatomskih problema. Takođe je idealan za podlaganje **implantatom poduprtih proteza** nakon faze zarastanja. Može se koristiti **nedeljama ili mesecima.**



Jednostavno nanošenje i rukovanje, kroz ceo postupak



Početa proteza za podlaganje, nakon postavljanja 4 implantata.



Odstraniti opterećenje s područja za podlaganje i ohrapaviti površinu.



Naneti GC RELINE II Primer na područje za podlaganje. Blago osušiti vazduhom.



Jednostavno doziranje iz patrone.



Naneti GC RELINE II (Extra) Soft. Vreme rada iznosi 2 minuta.



Postaviti protezu u usta i izvesti pasivne funkcijske kretnje. Ostaviti u mestu 5 minuta.



Višak materijala odstraniti skalpelom ili makazama. Obraditi gumicom GC RELINE II POINT FOR TRIMMING.



Završno obraditi polirerom GC RELINE II WHEEL FOR FINISHING.



Podložena proteza.