



Τόσο εύκολα όσο και
το 1-2-3

ΣΕΤ
επιδιόρθωσης
αποκατάστασεω
από τη GC

Έξυπνα προϊόντα και
οδηγίες για όλες τις
ενδοστοματικές
επιδιορθώσεις
αποκαταστάσεων

GC

Με το σετ επιδιόρθωσης GC Repair Kit η επιδιόρθωση αποκαταστάσεων στο ιατρείο γίνεται εύκολα

Ένα **πλήρες σετ** όλων των προϊόντων και οδηγιών για την κάλυψη όλων των **καθημερινών ενδοστοματικών επιδιορθώσεων με τρόπο εύκολο και έξυπνο.**



Μεταλλικής βάσης έμμεσες αποκαταστάσεις (με πολύτιμα ή μη πολύτιμα μέταλλα)



Έμμεσες αποκαταστάσεις από **ολοκεραμικά, ζirkονία, αλουμινία ή υβριδικά κεραμικά** (π.χ. CERASMART)



Σύνθετες αποκαταστάσεις (άμεσες ή έμμεσες)

Τι υπάρχει για εσάς? Τρία στοιχεία για όλες τις αποκαταστάσεις!

Ceramic Primer II

Ακολουθώντας την ταχτική του μηδενικού συμβιβασμού, προτείνουμε τη χρήση **ξεχωριστού ενεργοποιητή σιλανιού** (Ceramic Primer II) μαζί με τον συγκολλητικό παράγοντα G-Premio BOND για μακροχρόνια συγκόλληση σε ολοκεραμικά και υβριδικά κεραμικά.



GRADIA PLUS Opaque

Αυτός ο **φωτοπολυμεριζόμενος αδιαφανής** παράγοντας καλύπτει σκούρο υπόστρωμα προκειμένου να αποδοθεί αισθητική σε μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις.

G-Premio BOND

Ένας γενικής **εφαρμογής συγκολλητικός παράγοντας** που προσφέρει ιδανική συγκόλληση σε όλα τα υποστρώματα χάρη στην παρουσία 3 διαφορετικών μονομερών.

4-MET


Για αξιόπιστη συγκόλληση στην **αδαμαντίνη** και **οδοντίνη**

MDP

Για άριστη συγκόλληση στην **αδαμαντίνη** και **οδοντίνη**, **ζirkονία**, **αλουμινία** και **μη πολύτιμα μέταλλα**.

MDTP

Για συγκόλληση σε **πολύτιμα μέταλλα**

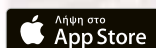

Για τις οδηγίες βήμα προς βήμα αναφερθείτε επίσης στους οδηγούς της επανορθωτικής οδοντιατρικής της GC

| Κωδικός παραγγελίας | Περιγραφή |
|---------------------|--|
| 901139 | Σετ επιδιόρθωσης GC: Ceramic Primer II (5 δόσεις μίας χρήσης), G-Premio BOND (5 δόσεις μίας χρήσης), GRADIA PLUS OPA1 (1 σύριγγα 2.0mL) |



MDTP:
Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate
για συγκόλληση σε πολύτιμα μέταλλα

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://www.gceurope.com



Φειδιππίδου 43, 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ : 210 7489 031, 210 7792 584
Fax : 210 7489 032
E-mail : info@faratzi.gr
www.faratzi.gr



N. Κουντουριώτου 3
546 25 Θεσ/νίκη
Τηλ : 2310 270 550
2310 270 850
Email : newdent@otenet.gr
www.newdent.gr

