

Lako kao i brojati 1-2-3



GC Repair Kit

Pametni proizvodi
i upute za SVE
intraoralne postupke



GC

GC Repair Kit, za lake direktne popravke...

Komplet svih proizvoda i uputa potrebnih za sve **rutinske oralne popravke na jednostavan i pametan način.**



Indirektni radovi s **metalnom osnovom** (iz plemenitog i neplemenitog metala)



Indirektni radovi izrađeni iz **staklokeramike, cirkonij-oksidge i aluminij-oksidge keramike** ili **hibridne keramike** (npr. CERASMART).



Kompozitni radovi (direktni i indirektni)

Koja je prednost za vas? Tri komponente za rješavanje svih popravaka!

Ceramic Primer II

Sukladno pristupu da kompromisi nisu prihvatljivi, preporučamo koristiti zaseban silanski primer (Ceramic Primer II), zajedno s našim adhezivom G-Premio BOND, za dvostruku adheziju za **staklokeramiku i hibridnu keramiku.**



GRADIA PLUS Opaque

Svjetlosno polimerizirajući opaker za učinkovito prekrivanje tamnih površina i osiguranje visoke estetike kod metal-keramičkih radova

G-Premio BOND

Univerzalni bond koji nudi optimalnu adheziju za sve površine zahvaljujući tri različita monomera

4-MET


Za pouzdanu adheziju za **caklinu i dentin**

MDP

Za izvrsnu adheziju za **caklinu i dentin, cirkonij-oksidge i aluminij-oksidge keramiku te neplemenite metale**

MDTP

Za spajanje za **plemenite metale***

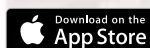

Opis uporabe korak po korak potražiti u GC priručniku za restaurativne radove.

Broj artikla	Opis
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 jediničnih doza), G-Premio BOND (5 jediničnih doza) i GRADIA PLUS OA1 (1 štrcaljka od 2,0 ml)



*MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate za spajanje za plemenite metale

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
croatia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com