

Enkelt och smart ...

Repair Kit från GC

Smarta produkter
och enkla anvisningar
för ALLA intraorala
reparationer

GC

GC:s Repair kit – chairside-reparationer på enkelt sätt ...

En **komplett uppsättning** produkter och anvisningar som förenklar alla dina **intraorala rutinreparationer. Ett system för alla indikationer.**



Metallbaserade
indirekta restaurationer
(ädla och oädla legeringar)



Indirekta restaurationer framställda
av **glaskeramer, zirkoniumdioxid,
alumina eller hybridkeramer**
(t.ex. CERASMART)



Kompositrestaurationer
(direkta och indirekta)

Vilka är fördelarna? Tre produkter för alla reparationer!

Ceramic Primer II

Eftersom vi alltid tar det säkra före det osäkra rekommenderar vi att du använder en separat silanprimer (Ceramic Primer II) tillsammans med vårt adhesiv G-Premio BOND för att få en hållbar vidhäftning till **glaskeramer** och **hybridkeramer**.



GRADIA PLUS Opaque

Ljushärdande opaque-färg som effektivt döljer mörka underlag och erbjuder högestestetiska resultat vid porslin-på-metall-restaurationer.

G-Premio BOND

En **universalbonding** som innehåller tre olika monomerer och ger bästa tänkbara vidhäftning till alla underlag.

4-MET


4-MET ger tillförlitlig vidhäftning till **emalj och dentin**

MDP

MDP ger utmärkt vidhäftning till emalj och **dentin, zirkoniumdioxid, alumina och oädla legeringar**

MDTP

MDTP binder till ädla **legeringar*****

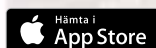

Med vår hygieniska Unit Dose undviker du att behöva kasta oanvänt material. Det är särskilt praktiskt om du bara utför ett begränsat antal reparationer om året!

Artikel-nummer	Beskrivning
901139	GC Repair Kit: Ceramic Primer II (5 Unit Dose), G-Premio BOND (5 Unit Dose och GRADIA PLUS OAI (1 spruta 2,0 ml)



*MDTP:
Methacryloyloxydecyl dihydrogen
thiophosphate to bond to precious metals

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC NORDIC AB

Box 703 96
SE-107 24 Stockholm
Sweden
Tel. +46 850 636 185
info@nordic.gceurope.com
http://www.gceurope.com/local/nordic