

# TEMPSMART™ DC

Ο εύκολος δρόμος για την τελική αποκατάσταση

Σύνθετη ρητίνη διπλού  
πολυμερισμού για προσωρινές



# TEMPSMART DC από την GC

## Ανακαλύψτε την απόλυτη καινοτομία: ισχυρή, γρήγορη... υπέροχη

Οι προσωρινές αποκαταστάσεις είναι ιδιαίτερες σημαντικές στην επανορθωτική οδοντιατρική. Όχι μόνο προστατεύουν τα παρασκευασμένα δόντια αλλά προσφέρουν **άνεση και αισθητικό αποτέλεσμα** μέχρι ο ασθενής σας να υποβληθεί στην τελική αποκατάσταση. Με το TEMPSMART DC, η GC παρουσιάζει μια νέα τεχνολογία η οποία καθιστά τα προσωρινά υλικά πιο έξυπνα. Το TEMPSMART DC είναι **το πρώτο προσωρινό υλικό διπλού πολυμερισμού χωρίς πλαστικοποιητή, σχεδιασμένο για να διευκολύνει την εργασία του οδοντιάτρου κάνοντάς την πιο ευχάριστη.**


### Επιλέξτε τον **ΕΞΥΠΝΟ** δρόμο

Το TEMPSMART DC μπορεί να **φωτο-πολυμεριστεί**, γεγονός που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα: μπορείτε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο της τοποθέτησης για ποιοτικότερο τελικό πολυμερισμό. Έτσι, η διαδικασία είναι **ευκολότερη και πιο αποτελεσματική**, ενώ παράλληλα **εξοικονομείτε πολύ χρόνο**. Ο φωτοπολυμερισμός ενισχύει επίσης τις φυσικές ιδιότητες της προσωρινής αποκατάστασης, και ειδικά την αντοχή στην κάμψη.



Εξωστοματικός φωτοπολυμερισμός

Χρόνος διαδικασίας με το TEMPSMART DC συγκριτικά με τους ανταγωνιστές (λεπτά)

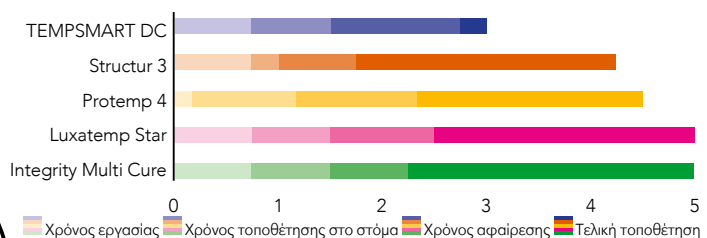


Πηγή: Το αρχείο περιέχει δεδομένα ΕΣΑ της GC, Ιανουάριο 2018

### Επιλέξτε τον **ΑΣΦΑΛΗ** δρόμο

Οι μακρές αλυσίδες πολυμερών σχηματίζουν ένα **πολύ πυκνό δίκτυο από πολυμερή**, γεγονός που συνεπάγεται μοναδικά **υψηλή αντοχή σε κατάγματα**. Έτσι, το προϊόν είναι ιδανικό για μακροχρόνια προσωρινή αποκατάσταση και για μεγάλες γέφυρες.

Αντοχή σε κατάγματα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές (MPa·m<sup>1/2</sup>)

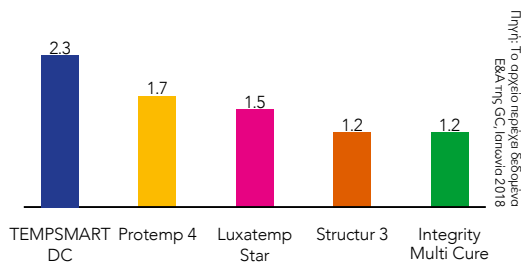

Πηγή: Το αρχείο περιέχει δεδομένα ΕΣΑ της GC, Ιανουάριο 2018

### Επιλέξτε τον **ΟΜΑΛΟ** δρόμο

Το TEMPSMART DC διατίθεται σε φύσιγγα 1:1 και η σύνθεσή του δεν περιέχει πλαστικοποιητή. Έτσι, έχετε εξαιρετικό πολυμερισμό για τη δημιουργία **σκληρών, λείων επιφανειών** που δεν κολλάνε χωρίς τη δημιουργία ανασταλτικού στρώματος. Συνεπώς, τα ούλα επουλώνονται καλύτερα και η πλάκα μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία.



Σύγκριση παραδοσιακού φυσιγγίου 10:1 με πλαστικοποιητές (αριστερά) έναντι τελικού αποτελέσματος με TEMPSMART DC φυσιγγίο 1:1 χωρίς πλαστικοποιητή (δεξιά).

Η υψηλή αντοχή σε κατάγματα καθιστά το υλικό ιδανικό για οπίσθιες γέφυρες

1. Αρχική κατάσταση.
2. Έγχυση TEMPSMART DC στο αποτύπωμα.
3. Αφαίρεση αποτυπώματος 2'00"-2'30" μετά την έναρξη ανάμειξης. Φωτοπολυμερισμός για 5 δευτ. ανά επιφάνεια κατόπιν αφαίρεση της περίσσειας ποσότητας.
4. Μετά τη στίλβωση: συγκόλληση της γέφυρας με Freegenol ή Fuji TEMP LT.



Ευγενική παραχώρηση του Δρα. C. Lamprou, Γερμανία

## Αποκτήστε ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ασθενείς!

Χάρη στην μη κολλώδη επιφάνεια, μόνο λίγα βήματα στίλβωσης αρκούν για πανέμορφα αποτελέσματα

1. Αρχική κατάσταση.
2. Μετά την έγχυση του TEMPSMART DC και την τοποθέτησή του στο στόμα, η αποκατάσταση αφαιρείται εντός 2'30" και φωτοπολυμερίζεται.
3. Τελική στίλβωση της αποκατάστασης σε λίγα βήματα.
4. Τελικές προσωρινές αποκαταστάσεις με υψηλή στιλπνότητα.



Ευγενική παραχώρηση του Δρα. J. Taria Guadix, Ισπανία

## Επιλέξτε τον ΟΜΟΡΦΟ δρόμο

Το TEMPSMART DC διατίθεται σε 6 αποχρώσεις, όλες με φυσικό φθορισμό. Χάρη στην τεχνολογία έξυπνης ενισχυτικής ουσίας, στίλβώνεται πανεύκολα προσφέροντας μοναδικά υψηλή στιλπνότητα.



Επιλέξτε μεταξύ υψηλής στιλπνότητας με χειροκίνητη στίλβωση ή με τη χρήση του OPTIGLAZE color με ενισχυμένη επίστρωση νανοσωματιδίων (GC).



# TEMPSMART DC από την GC

Ο εύκολος δρόμος για την τελική αποκατάσταση

## Επιλέξτε τον ΕΞΥΠΝΟ δρόμο

Μικρός χρόνος διαδικασίας χάρη στη βολική δυνατότητα του φωτοπολυμερισμού



## Επιλέξτε τον ΑΣΦΑΛΗ δρόμο

Υψηλή αντοχή σε κατάγματα για προσωρινές αποκαταστάσεις με διάρκεια

## Επιλέξτε τον ΟΜΑΛΟ δρόμο

Μη κολλώδεις αποκαταστάσεις για υψηλή στιλπνότητα σε λίγα μόνο βήματα



## Επιλέξτε τον ΟΜΟΡΦΟ δρόμο

Φθορισμός και στιλπνότητα που διαρκεί για χαρούμενους ασθενείς

Tempsmart DC, φυσιγγιο 48 ml, 16 ρύγχη ανάμειξης						
Κωδ.	10001473	10001474	10001475	10001476	10001477	10001478
Απόχρωση	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

Tempsmart DC, φυσιγγιο 10 ml cartridge, 10 ρύγχη ανάμειξης				
Κωδ.	10001479	10001480	10001481	10001482
Απόχρωση	A1	A2	A3	B1

## Σχετικά προϊόντα



Ανακατασκευή βάσης

Unifast III



Επανόρθωση

G-aenial Universal Injectable



Χαρακτηρισμός

OPTIGLAZE color



Προσωρινή συγκόλληση

FREEGENOL Fuji TEMP LT



Αφαίρεση στεφάνης

PLIERS

Τα FREEGENOL, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE color και UNIFAST Trad αποτελούν εμπορικά σήματα της GC. Τα Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 και Structur 3 δεν αποτελούν εμπορικά σήματα της GC.

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax.+32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>