

TEMPSMART™ DC

Kettős kötésű kompozit ideiglenes koronákhoz és hidakhoz

Sima út a
végső megoldáshoz




GC TEMPSMART DC

Fedezze fel a legújabb innovációt:
erős, gyors ... briliáns!

Az ideiglenes fogpótlások fontos szerepet játszanak a restauratív fogászatban. Ezek nemcsak védik a preparált fogat, de **kényelmet és esztétikát** is biztosítanak, amíg páciense a végső pótlás elkészülésére vár. A GC az új technológiájú TEMPSMART DC bevezetésével nagy előrelépést tesz az ideiglenes anyagok területén. A TEMPSMART DC az **első plasztizáló szer mentes, kettős kötésű ideiglenes anyag, ami arra hivatott, hogy a fogorvos munkáját könnyebbé és élvezetesebbé tegye.**


Válassza az OKOS utat

TEMPSMART DC **fénnyel is polimerizálható**, ami sok előnnyel jár: kontrollálhatja a kötési pillanatot, így a végpolimerizáció optimális lesz. Ezáltal az eljárás **könnyebb és sokkal hatékonyabb** lesz, így **rengeteg időt tud megspórolni**. A fénnyel történő polimerizáció ezen kívül az ideiglenes fogpótlás fizikai tulajdonságaira is jó hatással van, különös tekintettel a hajlítási modulusra.

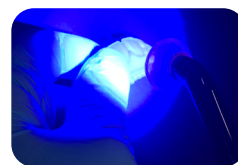

Extraorális fénykezelés

TEMPSMART DC eljárási idő versenytársakkal összehasonlítva (min)

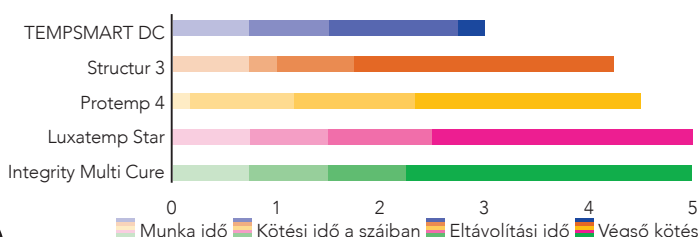


Forrás: GC R&D, Japan, 2018. Adatok elérhetők

Válassza a BIZTONSÁGOS utat

Hosszú polimer láncok **nagy sűrűségű polimerhálót** alkotnak, melynek eredménye a különlegesen **magas szakítószilárdság**. Ez teszi alkalmassá hosszú távú ideiglenes pótlások és nagy fesztávú hidak kialakításához.

Szakítószilárdság
versenytársakkal összehasonlítva (MPa·m^{1/2})

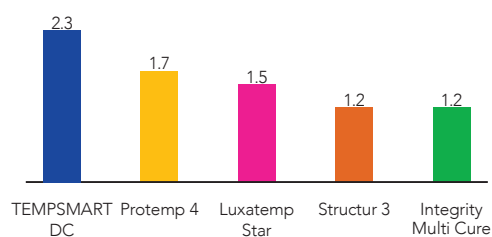

Forrás: GC R&D, Japan, 2018. Adatok elérhetők

Válassza a SIMA utat

A TEMPSMART DC 1:1 **arányban kerül kiszerelésre**, plasztizáló anyag nélkül. Ez kiváló polimerizációt biztosít kemény, **sima, nem ragacos felületek eléréséhez**, gyakorlatilag inhibíciós réteg nélkül. Ezáltal, az így jobban tud gyógyulni, és a plakk könnyebben eltávolítható.



A hagyományos 10:1 arányú tubus plasztizáló anyag használatával (balra), az 1:1 arányú TEMPSMART DC-vel, plasztizáló anyag nélkül (jobbra) összehasonlítva.



A magas szakítószilárdsága miatt ideális poszterior hidakhoz

1. Kiindulási állapot.
2. TEMPSMART DC fecskendezése a lenyomatba.
3. Lenyomat eltávolítása 2'00"-2'30" a keverés megkezdése után. A felesleg eltávolítása után fénypolimerizálás felületenként 5 mp-ig.
4. Polírozás után: a híd beragasztása Freegenol vagy Fuji TEMP LT használatával.




Dr. C. Lampson, Németország jóvoltából

Legyen büszke BOLDOG páciensére!

Köszönhetően a nem ragacsos felületének, egy néhány lépéses polírozással csodálatos végeredmény érhető el


1. Kiindulási állapot.
2. A Tempsmart DC lenyomatba fecskendezése és szájba helyezése után 2'30"-cel a restauráció eltávolítható és fényrel polimerizálандó.
3. A restauráció végpolírozása néhány lépésben.
4. Magas fényű ideiglenes fogpótlás.

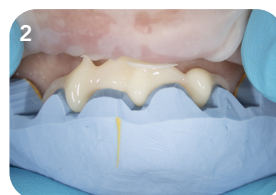

Dr. J. Tapia Guadix, Spanyolország jóvoltából

Válassza a MUTATÓS utat

A TEMPSMART DC **6 színben** kapható, mindegyik **természetes fluorescenciával**. A smart filler technológiának köszönhetően **könnyen polírozható**, a szembetűnően **magas fény eléréseért**.

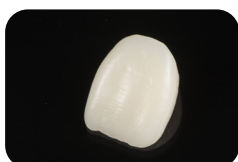

A magas fény kézi polírozással, vagy OPTIGLAZE color nano-töltésű megerősített karakterizáló lakkal (GC).



GC TEMPSMART DC

Sima út a végső megoldáshoz

Válassza az OKOS utat

Rövid munkaidő a kényelmes fényre-keményedő opciónak köszönhetően



Válassza a BIZTONSÁGOS utat

Magas törési szilárdság az időtálló ideiglenes pótlásokért

Válassza a SIMA utat

Magas fényű, nem ragacos restaurációk néhány lépésben



Válassza a MUTATÓS utat

Fluoreszcencia és hosszan tartó fényes felület a mosolygó páciensekért

TEMPSMART DC, 48 ml cartridge, 16 keverőcsőr EEP						
Ref.	10001473	10001474	10001475	10001476	10001477	10001478
Szín	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

TEMPSMART DC, 10 ml cartridge, 10 keverőcsőr EEP				
Ref.	10001479	10001480	10001481	10001482
Szín	A1	A2	A3	B1

Kapcsolódó termékek



Alábélelés

Unifast III



Javítás

G-aëniel Universal
Injectable



Karakterizálás

OPTIGLAZE color



Ideiglenes ragasztás

FREEGENOL
Fuji TEMP LT



Korona eltávolítás

PLIERS

A FREEGENOL, FujiTEMP LT, G-aëniel Universal Injectable, OPTIGLAZE color, PLIERS és az Unifast III GC védjegyek.
Az Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4, Structur 2 és Structur 3 nem a GC védjegyei.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEE Hungary
Fazekas utca 29-31.
1027 Budapest
Tel. +36 1 224 04 00
info.hungary@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/hu-HU>