



Комфортний шлях до постійної ортопедичної конструкції

TEMPSMART™ DC
від GC

Композит подвійного твердіння
для тимчасових коронок та мостів

GC

TEMPSMART DC від GC

Відкрийте для себе найкращу інновацію:
міцність, швидкість... яскравість!

Тимчасові реставрації відіграють важливу роль в ортопедичній стоматології. Вони не тільки захищають препаровані зуби, а й забезпечують **комфорт та естетичність**, поки ваш пацієнт очікує на постійну конструкцію. GC представляє нову технологію з TEMPSMART DC, що робить тимчасові матеріали розумнішими. TEMPSMART DC – **це перший тимчасовий матеріал подвійного затвердіння без пластифікаторів, розроблений, щоб полегшити роботу стоматолога та зробити її приємнішою.**


Здійсніть ЗРУЧНУ поїздку

TEMPSMART DC можна **полімеризувати світлом**, що дає великі переваги: ви можете контролювати момент твердіння та оптимізувати кінцеву полімеризацію. Це дозволяє зробити процедуру **легшою та ефективнішою**, що може **заощадити вам багато часу**. Світлове затвердіння також покращує фізичні властивості тимчасової реставрації, зокрема міцність на злам.



Полімеризація світлом
екстраорально

Тривалість процедури TEMPSMART DC порівняно з конкурентами (хв.)

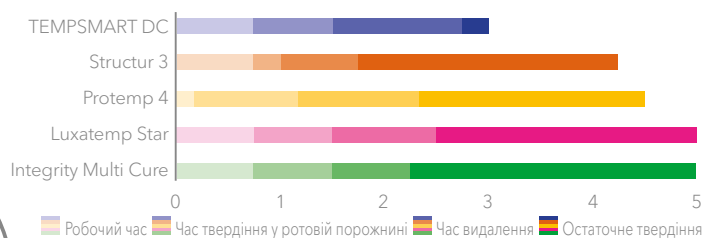


Джерело: GC R&D, Японія, 2018.
Файл даних.

Здійсність БЕЗПЕЧНУ поїздку

Довгі полімерні ланцюги утворюють **полімерну мережу високої щільності**, що забезпечує винятково високу **міцність на злам**. Це робить його ідеальним для довговічних тимчасових мостів великої протяжності.

Міцність на розрив порівняно з конкурентами
(MPa·m^{1/2})

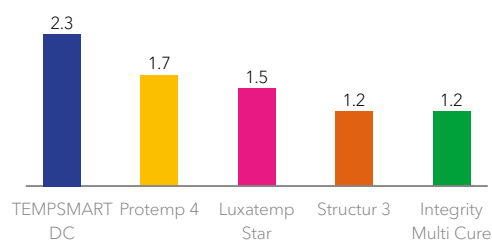

Джерело: GC R&D, Японія, 2018.
Файл даних.

Здійсніть ПЛАВНУ поїздку

TEMPSMART DC постачається в картриджі **1:1** і не містить у своєму складі пластифікаторів. Це забезпечує чудову полімеризацію з твердими, **гладкими, нелипкими, поверхнями** практично без інгібованого киснем шару. Таким чином, ясна можуть краще заживати, а зубний наліт можна легко видалити.



Порівняння класичного матеріалу в картриджі 10:1 із пластифікаторами (ліворуч) із результатами, отриманими з картриджем TEMPSMART DC 1:1 без пластифікаторів (праворуч).

Висока міцність на вигін робить цей матеріал ідеальним для мостів на жувальній ділянці

1. Початкова ситуація
2. Внесення TEMPSMART DC у відбиток.
3. Зняття відбитку через 2'00"-2'30" після початку змішування. Світлова полімеризація кожної поверхні протягом 5 с після видалення надлишків.
4. Після полірування: фіксація мостоподібного протеза за допомогою Freegenol або Fuji TEMP LT.



З ліофільного дозволу лікарів С. Lamprson, Німеччина

Пишайтеся ЩАСЛИВИМ пацієнтом!

Завдяки нелипкій поверхні можна досягти прекрасних результатів всього за кілька кроків полірування

1. Початкова ситуація.
2. Після внесення TEMPSMART DC і розміщення в ротовій порожнині реставрацію знімають за 2'30" та полімеризують світлом.
3. Фінальне полірування реставрації в кілька кроків.
4. Як результат - тимчасова конструкція з вражаючим блиском.



З ліофільного дозволу Д. Тарія Guadix, Іспанія

Здійсніть ПРИВАБЛИВУ поїздку

TEMPSMART DC доступний у **6 відтінках**, усі з **природною флюоресценцією**. Завдяки інтелектуальній технології наповнювача його легко полірувати до неймовірно **високого блиску**.



Оберіть між чудовим блиском із ручним поліруванням та характеристикою за допомогою нанонаповненого підсиленого покриття OPTIGLAZE Color (GC).



TEMPSMART DC від GC

Комфортний шлях до постійної ортопедичної конструкції

Здійсніть ЗРУЧНУ поїзду

Швидка процедура, завдяки зручній можливості полімеризації світлом



Здійсніть ПЛАВНУ поїзду

Висока міцність на злам для довготривалих тимчасових реставрацій

Здійсніть ПЛАВНУ поїзду

Нелипка реставрація з високим блиском всього за декілька кроків



Здійсніть ПРИВАБЛИВУ поїзду

Флюоресценція та довготривалий блиск для пацієнтів, що люблять посміхатися

TEMPSMART DC, 48 мл картридж, 16 змішувальних насадок ЕЕР						
	12770	12771	12772	12773	12774	12775
Відтінок	A1	A2	A3	A3,5	B1	BW

TEMPSMART DC, 10 мл картридж, 10 змішувальних насадок ЕЕР				
	12776	12777	12778	12779
Відтінок	A1	A2	A3	B1

Супутні продукти



Перебазування

Unifast III



Починка

G-aenial Universal Injectable



Характеризація

OPTIGLAZE color



Тимчасова фіксація

FREEGENOL Fuji TEMP LT



Видалення коронок

GC PLIERS

FREEGENOL, G-aenial Universal Injectable, OPTIGLAZE color та UNIFAST Trad є торговими марками GC. Integrity Multi Cure, Luxatemp Star, Protemp 4 та Structur 3 не є торговими марками GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська, 32, оф. 10
Тел. (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор компанії GC в Україні: Група компаній "КРИСТАР" 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел/Факс (044) 503.11.11
info@kristar.ua
www.kristar.ua



Since 1921
100 years of Quality in Dental