


עבודה בכל השיטות

UNIFAST III מתאים לעבודה הן בשיטת ה"נקניק" והן בשיטת ה"Brush-On".

בשיטת ה"נקניק" החומר מתערבב בקלות בצורה אחידה וללא בועות, אינו נדבק לכלים ומתקשה מהר:



שיטת ה"Brush-On" מאפשרת יצירת שחזור אסתטי במיוחד תוך חסכון משמעותי בעיבוד הסופי של השחזור:

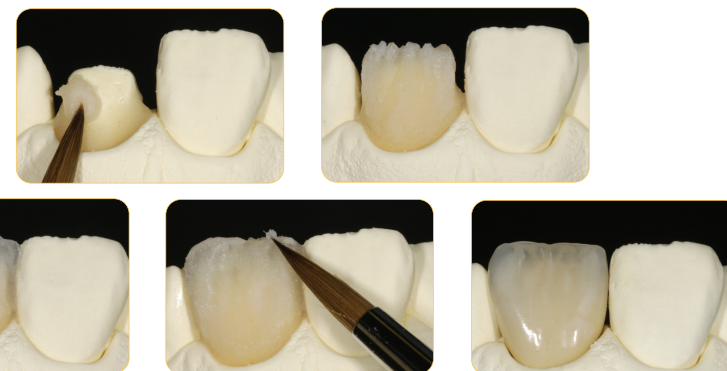

שחזור זמני
צריך להיות אסתטי?



שחזור זמני
חייב להיות אסתטי!



GC UNIFAST III

אקריל לשחזורים זמניים
אסתטיים



GC

GC - יומרים טיבים מביא 216
כשתנסה, תבין!




GC

GC Europe - Israel Branch
4 Koifman St., Tel Aviv 68012, Israel
Tel. +972-3-7979630, Fax. +972-3-5106279
E-mail: info@gcisrael.com
www.gcisrael.com


טכנולוגיית SURF החדשנית

לאחר יותר מ-30 שנים של שימוש מוצלח ב-UNIFAST, חברת GC גאה להציג את GC UNIFAST III. GC UNIFAST III מהווה מהפכה אמיתית בפיתוח האקרילים לשימוש במרפאה. GC Unifast III מבוסס על טכנולוגיית SURF היחודית - Surface Uniformity Revolutionery Fixation Technology (הטכנולוגיה המהפכנית לציפוי פני השטח).

טכנולוגיה קונבנציונאלית

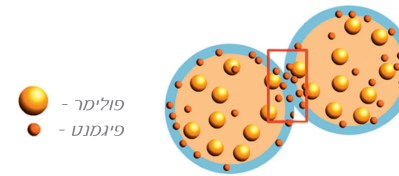

טכנולוגיית SURF החדשנית

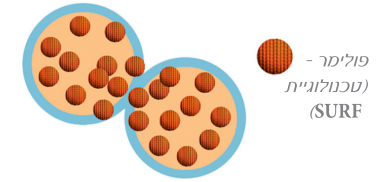

עד היום השיטה המקובלת אשר איפשרה הגברת חוזק האקרילים וקבלת גוונים שונים הייתה ע"י הוספת חומר מילוי (FILLER). החיסרון של שיטה זו הינו בכך שלא כל המילוי מתקשר אל המטריצה של האקריל, וכתוצאה מכך השחזור נחלש ומשנה את צבעו. טכנולוגיית SURF מאחה את הפיגמנטים על פני הפולימרים ולכן השחזור הופך להיות חזק ועמיד יותר לאורך זמן.

מגוון רחב של שימושים קליניים עם GC UNIFAST III



גשרים זמניים



Inlays זמניים




שחזור חניכיים



שיקום זמני על גבי שתלים



תיקון תותבות

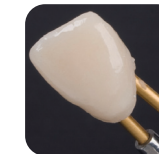


כתרים זמניים



מבחר צבעים

בעזרת GC UNIFAST III ניתן ליצור הדמיה מדויקת של השחזור הקבוע העתידי. כיום מתרפאים מייחסים חשיבות מיוחדת לאסתטיות של השחזורים הזמניים. יצירת שחזור זמני אסתטי מעניקה ערך מוסף הן לתהליך השיקום כולו והן לך, כרופא. לפיכך, חברת GC ייצרה את GC UNIFAST III במספר גוונים, זאת על מנת להקל ביצירת שחזור זמני אסתטי. על ידי GC UNIFAST III ניתן לשחזר שיניים לאחר הלבנה, להשיג שקיפות הלהב בשיניים צנטרליות ועוד. מספר גוונים בצבע ורוד מאפשרים שחזור חניכיים ותיקון תותבות.

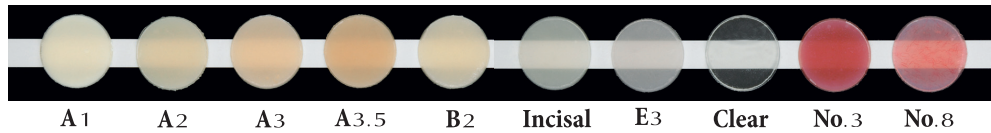

GC G-COAT - פתרון "מבריק" לחסכון בזמן

... ומעל הכול GC G-COAT. במקום לבזבז זמן יקר על ליטוש בשיטה הרגילה בעזרת מקדחים, דיסקים, גמיות, פסטות וכו', פשוט הניחו שכבה אחת של GC G-COAT ותהנו ממראה שחזור זמני מבריק כאילו לוטש דקות ארוכות. "הליטוש הנזיל" מבית GC מאפשר לסיים את מלאכת הליטוש בפחות מחצי דקה (!) רק להניח שכבה אחת של GC G-COAT על השחזור הלא מלוטש ולהקשות אותה באור. תופתעו עד כמה זה פשוט ויעיל.

אריזה ארגונומית

ל- GC UNIFAST III אריזה אכסון המשתלבת יפה בסביבת העבודה ומונעת התפשטות של ריח האקריל. לאריזה מצורף מתקן מיוחד לעבודה עם מכחול, לקבלת תוצאות אסתטיות גבוהות.

