

GC UNIFAST

OD PROBLEMA DO RJEŠENJA

Privremeno zbrinjavanje prepariranih zubi i praznina predstavlja najvažniji dio uspješnog dobro prijanjućeg protetskog rada, i mora voditi računa o funkcijskim, parodontološkim i estetskim aspektima.

Praksa pokazuje da jedan dentalni materijal ne može udovoljiti svim tim raznovrsnim zahtjevima.

Na temelju tih saznanja tvrtka GC razvila je **GC UNIFAST TRAD** i svjetlospolimerizirajući ekvivalent **GC UNIFAST LC**, koji oboje točno odgovaraju zahtjevima korisnika.

Kratkotrajni, privremeni protetski rad, što je najčešća indikacija, ima specifične zahtjeve u pogledu materijala, kao što su

- brzina postupka,
- jednostavno skidanje tijekom stvrdnjavanja
- i ekonomičnost postupka.

GC UNIFAST¹, akrilat na bazi metil metakrilata, potpuno udovoljava tim zahtjevima. Prednosti te vrste materijala zadovoljavaju pojedine zahtjeve vezane za kratkotrajno zbrinjavanje privremenim

- inlejmima ili onlejmima,
- pojedinačnim krunicama
- i mostovima malog raspona.

¹ Sljedeći podaci jednako se odnose na proizvode **GC UNIFAST TRAD** i **GC UNIFAST LC**.

SVOJSTVA PROIZVODA

Metil metakrilat je glavni razlog pogodnosti materijala **GC UNIFAST** za praktičnu uporabu.

Dobra sposobnost apsorpcije praška i tekućine olakšava stvaranje homogene smjese bez mjehurića zraka.

Karakteristična gumasta elastičnost materijala **GC UNIFAST** omogućuje lako skidanje privremenog protetskog rada, čak i kod preparacija s blago podminiranim mjestima i kod teško dostupnih mjesta preparacije.

Drugu prednost materijala **GC UNIFAST** predstavlja vraćanje u prvobitan oblik, poznato pod nazivom "efekt elastičnosti". To učinkovito sprječava trajnu deformaciju prilikom skidanja, što je poznati problem kod drugih materijala.

Kako bi se zadovoljili estetski zahtjevi protetskog rada, može se birati između nekoliko nijansi boje obje verzije materijala **GC UNIFAST**. Dobra nijansa boje i postojanost boje zadovoljavaju potrebe za izradbom privremenog protetskog rada u boji zuba.



Estetski protetski radovi



Jednostavno odstranjivanje

PREDNOSTI PROIZVODA

Izuzetna ekonomičnost


Metil metakrilat ima dobar omjer troškova i koristi. Za verziju proizvoda koji se ručno miješa nije potreban skup pribor.

GC UNIFAST TRAD - radno vrijeme prema potrebi prakse


GC UNIFAST TRAD savršeno zadovoljava taj aspekt, koji je važan za ekonomično i brzo zbrinjavanje pacijenata. Samo 2 minute i 30 sekundi nakon miješanja privremeni protetski rad može se izvaditi iz usta.

GC UNIFAST LC - rad bez žurbe

To je prednost specijalnih proizvoda. Polimerizacija svjetlom pruža stomatologu dovoljno vremena za prilagodavanje i korekciju. Čak se i najsloženije indikacije mogu savršeno riješiti bez vremenskog pritiska.

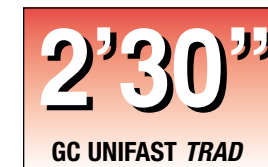

Radno vrijeme prema potrebi prakse

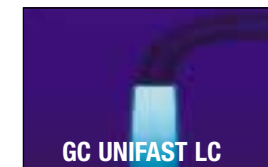

Rad bez žurbe

KLINIČKI POSTUPAK KORAK PO KORAK

Primjer GC UNIFAST TRAD



Pacijent s metalno-keramičkom krunicom na zubu 12 koja se mora zamijeniti.



Uzimanje otiska prije preparacije.



Završena preparacija.



GC UNIFAST TRAD miješati 10-15 sekundi.



Otisak ispuniti zamiješanim materijalom GC UNIFAST TRAD.



Postavljanje u usta.




Odstraniti 2 min. i 30 sek. nakon početka miješanja. Materijal dostiže temperaturu od $\pm 40^{\circ}\text{C}$.



Privremena krunica prije završne obrade.



Završna obrada privremene krunice 4 minute nakon početka miješanja.

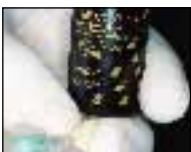

Sjajna površina postiže se uporabom premaza GC Fuji COAT LC.



Privremenu krunicu izradenu od GC UNIFAST TRAD cementirati GC Freegenol-om.



Konačni rezultat.

• VIK DENTAL, Zagreb, Tel. 01/2313 979 • MEDIKA, Zagreb, Tel. 01/46 00 661
• MAICO, Varaždin, Tel. 042/211 368

PRIKAZ GC PROIZVODA ZA PRIVREMENE PROTETSKE RADOVE

GC PROVITEC

Materijal za izradbu privremenih krunica i mostova na bis-akrilatnoj kompozitnoj bazi



GC FREEGENOL

Cement za privremeno cementiranje privremenih i trajnih krunica i mostova bez eugenola



GC K.Y. PLIER

Kliješta za skidanje privremenih protetskih radova



PAKIRANJE

GC UNIFAST TRAD



• PAKIRANJE

100 g praška, boja bjelokosti, N.3X, N.8
250 g praška, boja bjelokosti, N.3X, N.8
1 kg praška, boja bjelokosti, N.3X, N.8
100 g tekućine
250 g tekućine

GC UNIFAST LC



• POČETNO PAKIRANJE

Prašak boje A2, A3, B2, B3, C2, transparent, svaki po 30 g
Tekućina 2 x 30 g

• DOPUNSKO PAKIRANJE

50 g praška boje A2, A3, B2, B3, C2, transparent
2 x 15 g tekućine

GC EUROPE N.V. Head Office

Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax + 32.16.40.02.14
E-mail: info@gceurope.com
<http://www.gceurope.com>

GC EUROPE N.V. East European Office-Croatia

Čazmanska 8
10000 Zagreb, Croatia
Tel. +385.1.46.77.251,
Tel. + 385.1.46.78.474
Fax. + 385.1.46.78.473
E-mail: croatia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Code z O L F CO 6 35 - 02/01

© VITA je zaštitni znak tvornice Vita Zahnfabrik iz Bad Säckingena, Njemačka.

GC
FIRST IS QUALITY

GC UNIFAST

MATERIJAL ZA PRIVREMENE KRUNICE I MOSTOVE
NA BAZI METIL METAKRILATA



GC UNIFAST u središtu zanimanja

- IZUZETNO EKONOMIČAN
- STVRDNJAVANJE S EFEKTOM ELASTIČNOSTI
- BRZO ILI REGULIRAJUĆE RADNO VRIJEME