

GC UNIFAST

A PROBLÉMÁTÓL A MEGOLDÁSIG

Az előkészített fogak és a keletkezett térköz ideiglenes ellátása a sikeres, jól illeszkedő protetikai munkának elengedhetetlen része, melynek figyelembe kell vennie a funkcionális, parodontológiai és esztétikai igényeket.

A gyakorlat azt mutatja, hogy önmagában egy fogászati anyag nem képes eleget tenni ezeknek a különféle követelményeknek.

Ezek a megfontolások indították a GC-t, hogy kifejlessze a **GC UNIFAST TRAD**, valamint ugyanennek a fényrekötő változatát, a **GC UNIFAST LC** anyagokat, melyeket szigorúan a felhasználó igényeihez igazítottak.

A rövid távra szóló ideiglenes helyreállítás a leggyakoribb indikációk esetén olyan jellegzetes tulajdonságokat kíván meg az anyagtól, mint

- a kezelés gyorsasága
- gond mentes eltávolítás a kötés ideje alatt
- a gazdaságos eljárás.

A **GC UNIFAST**¹, amely egy metil-metakrilát alapú műanyag, kiválóan megfelel ezeknek a követelményeknek. Ennek az anyagcsoportnak az előnyei tökéletesen kielégítik ezeket a különleges kívánalmakat olyan ideiglenes fogpótlások rövidtávú előállításával, mint

- az inlay-k vagy onlay-k
- a szülő koronák
- és a rövidebb hidak.

¹ Az alábbi adatok egyaránt vonatkoznak a **GC UNIFAST TRAD**-ra és a **GC UNIFAST LC**-re.

A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

A **GC UNIFAST** mindennapos használatában a metil-metakrilát kulcsfontosságú szerepet játszik. A jól nedvesíthető pornak és folyadéknak köszönhetően könnyen készíthető homogén, buborékmentes keverés.

A **GC UNIFAST** jellegzetes gumiszerű rugalmasságából adódóan gond nélkül távolítható el az ideiglenes fogpótlás, még a kiskökű alámenős részekkel bíró, vagy nehezen elérhető preparált felületek esetében is.

A **GC UNIFAST** egy másik előnye a megújulási képesség, ismertebb nevén az „emlékező képesség”. Ezzel hatékonyan megelőzhető az eltávolításkor fellépő mindenfajta maradandó alakváltozás, ami ismert probléma több anyag esetében.

A **GC UNIFAST** mindkét változatában különböző színárnyalatokból lehet választani, és így a fogpótlások esztétikai követelményeinek is megfelel. A találó színek és a színállóság kielégítik a fogszínü ideiglenes fogpótlás iránti igényeket.



Esztétikus fogpótlás



Gond nélküli eltávolítás

A TERMÉK ELŐNYEI

Kiemelkedően gazdaságos


A metil-metakrilátnak igen kedvező a költség-haszon aránya. A kézi keverésű változat nem igényel költséges tartozékokat.

GC UNIFAST TRAD - praxis központú munkaidő

Ezt a szemléletet, mely elengedhetetlen a gazdaságos és idő-megtakarító munkatevékenységhez, tökéletesen tükrözi a **GC UNIFAST TRAD**. Már a keverést követő 2'30"-ben az ideiglenes fogpótlás kivethető a szájból.

GC UNIFAST LC - az idő sürgetésétől mentes munka

Ez fejezi ki egy szakemberhez illő termék előnyeit. A fényrekötés időt biztosít a fogorvos számára, hogy munkáját pontosítsa, vagy javításokat végezzen. Még a legnehezebb esetek is megoldhatóvá válnak az idő sürgetése nélkül.

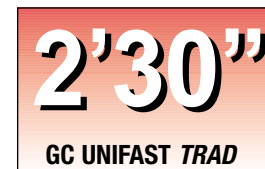

Praxis központú munkaidő



Az idő sürgetésétől mentes munka

KLINIKAI ALKALMAZÁSA, LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Példaképpen a GC UNIFAST *TRAD*



Páciens, a 12 fagon
lévő, cserélendő
fémkerámia koronával




A csonkelőkészítés előtti
lenyomatvétel



Az előkészítés végén



A GC UNIFAST *TRAD*
összekeverése 10-15
másodpercig

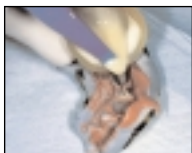


Az összekevert GC
UNIFAST *TRAD*-ot
tartalmazó lenyomat




A szájba helyezés




Eltávolítás a keverés
megkezdésétől számítva
2'30" után
Az anyag kb.40°C-os
hőmérsékletet ért el

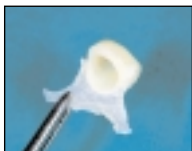

Az ideiglenes korona a
finírozás előtt

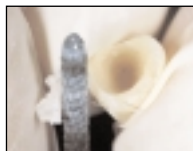

Az ideiglenes korona
finírozása 4 perccel a
keverés megkezdése után

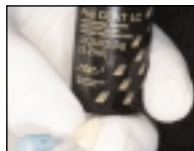

A GC Fuji COAT LC-vel
bevonva fényes felületet
kapunk



A GC UNIFAST *TRAD*-al
készült ideiglenes korona a
GC Freegenol-lal kerül
beragasztására



A végeredmény

GC TERMÉKEK GYORS IDEIGLENES FOGPÓTLÁSOK SZÁMÁRA

GC PROVITEC

Bis-akrilát kompozit alapú
ideiglenes korona és híd
anyag




GC FREEGENOL

Eugenol mentes, ideiglenes
koronák és hidak ragasztó
anyaga



GC K.Y. PLIER

Fogó ideiglenes fogmővek
eltávolításához

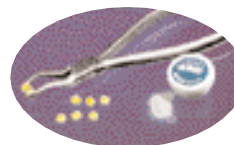

KISZERELÉS

GC UNIFAST *TRAD*



• UTÁNTÖLTŐK

100 g por, elefántcsont színű,
N.3X, N.8
250 g por, elefántcsont tszínű,
N.3X, N.8
1 kg por, elefántcsont színű,
N.3X, N.8
100 g folyadék
250 g folyadék

GC UNIFAST *LC*



• BEVEZETŐ CSOMAG

Por A2, A3, B2, B3, C2,
áttetsző, egyenként 30 g
Folyadék 2 x 30 g

• UTÁNTÖLTŐK

50 g por A2, A3, B2, B3,
C2, áttetsző
2 x 15 g folyadék

Code z O LF HU 6 35 - 04/00

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax + 32.16.40.02.14
E-mail: info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
East European Office
Aleja Pomoraca 19
10020 Zagreb, Croatia
Tel. +385.1.46.77.251
Fax +385.1.46.77.251
E-mail: info@eeo.gceurope.com
http://eeo.gceurope.com

GC
FIRST IS QUALITY

GC UNIFAST

METIL-METAKRILÁT ALAPÚ IDEIGLENES
KORONA ÉS HÍD ANYAG



Reflektorfényben a GC UNIFAST

- KIEMELKEDŐEN GAZDASÁGOS
- INTELLIGENS KÖTÉSI TULAJDONSÁG EMLÉKEZŐ KÉPESSÉGGEL
- GYORS, VAGY ELLENŐRIZHETŐ (FÉNYREKÖTŐ) MUNKAI DŐ

A ©Vita a Vita Zahntechnik, Bad Säckingen, Germany bejegyzett terméke.