



GC



EOM AQUA

歯科用ユニット イオム アクア



満たす、浮かぶ、流れる。 歯科用ユニット「イオム アクア」

衛生的であること。それは歯科医療において重要なテーマであり、患者さまの心の声でもあります。

また心地よさと使いやすさに優れていること。それは、患者さまと先生方に、理想の時間をお届けします。

標準装備のユニット給水管路洗浄システムは、見えないユニット内の水路をきれいな水で満たし、

患者さまに信頼をお届けする最初の1滴へと導きます。

患者さまの心に寄り添うシートは、緊張をやさしくほぐし、多彩な機能は様々なシーンに応えます。

すべての安心と満足、そして信頼のために、

患者さまと先生方の視点から生まれた歯科用ユニット『イオム アクア』は、

水の衛生環境を守り、水に包まれたような安らぎと、流れるようなオペレーションを叶えます。



満たされる安心を、隅々まで届けます。



水環境を、より衛生的に。

過酸化水素に銀イオンを配合した専用の洗浄液*によるユニット給水管路洗浄システム「ツインターボクリーナーII」を標準装備。フラッシング機能と共に水路の洗浄とすすぎで口腔内に含む水を、より衛生的に保持。窓のブルーライトが清潔感を伝えます。 ※別売の「ツインターボクリーナー液」を希釈した洗浄液



ツインターボ
クリーナーII



気になる部分を隅々まで清潔に。

患者さまが気にかけている給水部には、着脱可能な給水ノズルとコップトレイを採用。お手入れしやすい注水口が、衛生的な印象を保ちます。



丸ごと洗えて衛生的な磁器製。

衛生面が特に気になるスピットンには、汚れが付きにくい磁器を採用。簡単に取り外して洗うことができるので、手の届かない側面や裏側まで清潔に保ちます。



安らぎの浮遊感と快適性が、信頼に応えます。



着席も退席も、スムーズに。
乗り降りしやすいステップレスチェアもご用意。
座面を395mmまで下げることができるので、ご高齢者やお子さまにも快適です。



不安を和らげるホールド感。
ワイドなシートは肘までサポートし、体を優しく包む、ほどよい安定感。やわらかいリラクゼーションシート“シフォン”※が、患者さまの緊張感を軽減します。
※オプション（標準色のみ）



うがいの姿勢も無理なく。
可動式スピットンを採用し、体をひねることなく、ラクな姿勢でうがいすることができます。チェアの動きと連動するオートスピットン※もご用意しています。 ※オプション



欲しい所に、こんな手すりを。
握りやすいサポートバー※が、患者さまの着席・立ち上がりを優しくサポートします。
※オプション



流れるようなオペレーションを、思いのままに。



ユニットの情報が一目瞭然。
優しい光のLEDライトが、IDによる色分けなど
様々な使用状況をお知らせ。一目でわかる操作
パネルが、インスツルメントの取り出しや設定を
2段階の明るさで表示します。



口腔内へ近づくためのスマート設計。
薄く小さく設計されたバックレストにより口腔
内へ近づきやすく、小柄な術者でも口腔内への
アプローチがスムーズに。ラクな姿勢で診察する
ことができます。



影を作らずワイドに照射。
無影効果が高いLEDの無影灯
を採用。口腔内の両側を照らす
ことができるため、ライトの向きを
変えず、視線の移動だけで口腔
内を確認できます。



可動範囲が広く、フリーレイアウトが可能な
フロアマウントタイプ

FL Floor Mount
Stepless Chair Type



必要最低限の可動範囲とスムーズな動きの
スライドデリバリータイプ

SS Sliding Delivery
Step Chair Type



思い通りの操作が容易な
オーバーアームタイプ

OC Over Arm
Contoured Chair Type



フレキシブルなポジショニングが可能な
カートタイプ

CL Cart
Stepless Chair Type



外装カバー (セレクト)



シルバー



ホワイト

外装カバー (オプション)



メタリックブルー

スピットンカラー (セレクト)



ホワイト



ディープブルー



ドクタータイプ	チェアタイプ					
	ステップレス		ステップ		カンター	
	ショート ベース	ロング ベース	ショート ベース	ロング ベース	ショート ベース	ロング ベース
スライドデリバリー	—	—	—	○	—	○
フロアマウント	○	—	○	○	—	○
オーバーアーム	○	—	○	○	—	○
カート	○	—	○	○	—	○

チェアタイプ



ステップレス
(ショートベース)



ステップ
(ショートベース)



ステップ
(ロングベース)



カンター
(ロングベース)

シートカラー／標準色 (セレクト)



メタリックブルー



メタリックパール



サンセットイエロー



マロンブラウン



リーフグリーン



ターコイズ

シートカラー／特別色 (セレクト)



ラベンダーブルー



ライトピンク



ワインレッド



コーラルオレンジ



フロアマウントタイプ メタリックブルー



自由自在をかなえるコンパクトさ。



多様な診療スタイルに対応できる広い可動域。

可動域に優れたコンパクトなユニットは、左右幅1900mmの空間にも設置可能。フレキシブルなアームが、思い通りの診療ポジションをかなえます。フロアマウントとスライドデリバリーのドクターユニットは、バックレストの裏まで移動し導線を確保。患者さまは、インスツルメント類を見ることなく着席できるので、診療前の緊張緩和にもつながります。

フロアマウントタイプ



スライドデリバリータイプ



ツーハンドでも、フォーハンドでも。

縦方向に約35度傾くアシスタントユニットは、術者が一人でもバキュームを使いやすく設計されています。また、外側に90度回転するので、抜歯などの広いスペースを必要とする時にも有効です。



手と足、そして視線に、確かなコントロールを。



豊富なバリエーションのインスツルメント。

エアーピンとマイクロモーター、そして3つのタイプから選べるウルトラソニックスケーラー*。さらに、着色汚れを除去するユニット内蔵型歯面清掃器キット エアフロー* (エアフローハンドピース (緑上)/ペリオフローハンドピース (緑下)) をご用意。5本まで収納できるハンガーは、治療スタイルに応じたレイアウトが可能です。*オプション

モーターの回転範囲

Ti モーター S / Ti モーター SL	MGモーター	MX2 PLUSモーター
100 ~ 40,000min ⁻¹ 100 ~ 8,000min ⁻¹ (20gf・cm ~ 200gf・cm ^{*1})	100 ~ 40,000min ⁻¹ 25gf・cm ~ 250gf・cm ^{*1}	100 ~ 40,000min ⁻¹ 35gf・cm ~ 350gf・cm ^{*1}

*1 トルク設定範囲

光でわかるセッティング。



ドクター3名分の診療スタイルをIDボタンで管理することができ、色分けによるパネルバーで確認できます。また、ディスプレイには、マイクロモーターやウルトラソニックスケーラーなどのインスツルメント使用状況が表示されます。



ウルトラソニック
スケーラー表示

カウントダウンタイマー機能
※パネルバー表示状況でも確認できます。

視界を外さず、確かな足元操作を。

どこを踏んでも快適に反応する薄型の円形ペダル。足元の的確な操作を促すシンプルなフォルムが、思い通りのコントロールを実現。視線を外さず、手元や患部の治療に集中できます。




フットコントローラー機能拡張モジュール
イオム FCコネクト*

複数のUSB接続機器の操作をユニットのフットコントローラで行うことで手元の施術に集中でき、快適な診療が行えます。



*オプション

詳細情報はこちら

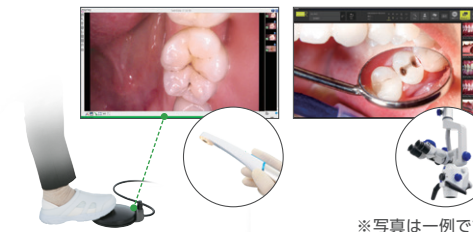

※写真は一例です。

笑顔に近づく信頼を仕立てました。

あらゆる「快適」を支えるチェアタイプ。



カウンターチェアタイプ

膝折れステップレスのチェアに加えて、カウンターチェアもご用意。乗り降りのしやすさや安定感はもちろん、着席から退席するまで、患者さまの動きをアテンドする機能を搭載しました。様々なシーンを想定し、患者さまと先生方の快適な使い心地を追求。大切な信頼感を支えます。

フィットする工夫を随所に。



標準のマニュアルヘッドレストは、円背の患者さまの身体的負担を軽減する角度にも調整できます。



パワーヘッドレストアークタイプ



パワーヘッドレスト*は、前方に可動するアークタイプを採用し、頭を乗せたまま、上顎・下顎に適した微妙な角度調整が可能です。フットスイッチを併用すれば、ハンズフリーで調整できます。

※オプション



跳ね上げ式のアームレスト*は、必要に応じた使い方ができ、乗り降りする患者さまをしっかりとサポート。

※オプション

右:跳ね上げ式
左:固定

別次元の視野で、さらに高い治療の精度へ。

多様化する治療体系に対応する搭載型マイクロスコープ。



カールツァイス EXTARO 300

カールツァイス社製とオプトミック社製の高精度マイクロスコープ*が搭載可能。アシスタントユニットのライトポールに取り付けることができるので、ユニット周辺のプロアスペースを取りません。

※オプション




カールツァイス OPMI® pico



オプトミック OP-Dent

メンテナンスをシンプルに。

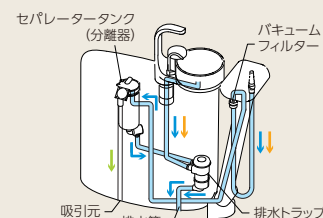

メンテナンスフリーの分離器を搭載。
ユニット内蔵型セパレーター（分離器）を標準装備。吸引された固形物をバキュームフィルターで除去し、液体は排水へと分離。さらに、排水トラップでも固形物を除去し、排水管の詰まりも防ぎます。タンク内は自動洗浄でメンテナンスフリーです。



消毒用アルコールなどで清拭消毒しやすいフラットな操作パネル。



汚れをさっと拭き取れるシームレスのシート。



外して洗えるスピットン&コップトレイ。



滅菌対応のハンドルカバー。

毎日のフラッシングを簡単手軽に。

スイッチひとつの簡単操作でクリーンアップ。銀イオン配合の過酸化水素水を使った専用の洗浄液*が、給水管路に滞留して洗浄。独自のユニット給水管路洗浄システム「ツインターボクリーナーII」が、毎日のお手軽なフラッシングを可能にしました。2色の光とブザー音で、作業状態をお知らせ、確認できます。※別売の「ツインターボクリーナー液」を希釈した洗浄液



ツインターボクリーナー液
750mL
※1本標準装備



フラッシングアダプタ
(イオムシリンジ用)
※1セット標準装備



ハンドピースはもちろん、コップ給水部も自動排水、洗浄。作業者の負担を軽減します。



洗浄



点滅:作業中 点灯:完了



すずぎ



点滅:作業中 点灯:完了

※事前にフラッシングアダプタヘインストルメント類のセッティングが必要です。

OPTION

Doctor Unit



ユニットバーナーⅡ



デンキー・マウストレー



サイドトレイ



タービンガード



液晶モニタステー
(VESA75/VESA100)
※モニタは別売です。



大型トレイ右側ワイド



大型トレイ左側ワイド
(オーバーアーム用のみ)




イオムシリンジ
ディスポシリンジ用アダプタ付 Dr.
ディスポシリンジノズル



MyRay カム C-U2 (口腔内カメラ)

シンプルに使えて キレイに撮れる

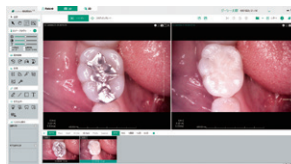

X線画像管理システム
Aadv Station
※と連携可能

※弊社X線の撮影・画像取得等を行う画像管理システム
※撮影用ソフトウェア iCaptureが付属しています。※TWIN インターフェースを介してサード
パーティ製ソフトウェアに転送できます。※詳しい情報は製品パンフレットをご確認ください。

- コントラスタンド
- ドクターパネル保護シート (50枚)
- パーナーケース保護シート2 ワイドタイプ (50枚)
- ペーパートレーシート
- シリコンシートD
- シリコンシートD 右側ワイド
- シリコンシートD 左側ワイド (オーバーアームのみ)
- トレーシートⅡ標準トレイ (50枚)
- トレーシートⅡ右側ワイド (50枚)
- トレーシートⅡ左側ワイド (50枚) (オーバーアームのみ)
- デジタルケーブルキット (USB/USB+HDMI)

Assistant Unit



オートスピットン



サポートバー



外部給気・給水



ティッシュケース (ライトポール用)
※手術顕微鏡OPMI®pico/手術顕微鏡
OP-Dentの併設はできません。




ティッシュケース (オーバーアーム用)
※手術顕微鏡OPMI®picoの併設はできま
せん。



メガネ置き



液晶モニターアーム (VESA75/VESA100)
※モニタ、ハンドル (左側) は別売です。
※手術顕微鏡OPMI®pico/手術顕微鏡
OP-Dentの併設はできません。

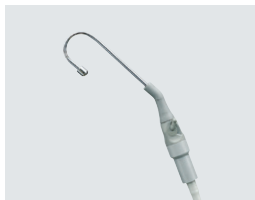

エジェクター





イオムシリンジ
ディスポシリンジ用アダプタ付 Asi.
ディスポシリンジノズル

衛生性が保てるディスポーザブル式のシリンジノズル



シリンジノズルは、360°回転機構により各部位に対し向きの微調整が可能。
長さ55mmのディスポシリンジノズルのみで臼歯部までアクセスでき、アダプタ部は口腔内に入ることなく衛生的です。

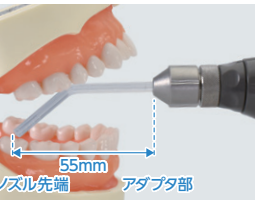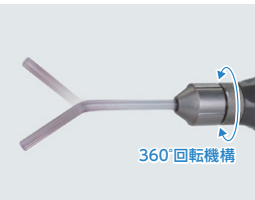

- PC本体ケース
- 除菌フィルター
- エアー・水用/エアー用/水用
- 配管ボックス
- アシスタントトレイシリコンシート
- アシスタントパネル保護シート (50枚)
- ディスポシリンジノズル (250本入)

Chair



パワーヘッドレスト アークタイプ/
フットスイッチ チェアタイプ
パワーヘッドレスト切替スイッチ



フットスイッチ (チェアタイプ)



リラクゼーションシート“シフォン”
(ヘッドレスト・
バックレスト・
ベンチシート・
フットレスト)
※標準色のみ



アームレスト
右のみ*/左のみ/左右組*
右:跳ね上げ式/左:固定
※オーバーアームタイプは設置不可



ゴムステッピング

- イオム FCコネク

Operating Light



EXTARO300用ボール^{※1}
(カルツァイス社製手術顕微鏡EXTARO
300ユニットマウントタイプのみ設置可能)



OP-Dent用ボール^{※4} (オプトミック
社製手術顕微鏡OP-Dent^{※5}のみ
設置可能)

※1:カルツァイス社製 手術顕微鏡 EXTARO300 ユニットマウントタイプは別売です。
天井高さ:2,400mm (施工可能) 推奨2,550mm (取付後の本体高さ:2,300mm)
コントロールボックスから+100mmのクリアランスを推奨
筐体上、周辺に梁、吊るしの照明などがないこと
液晶モニターアーム、ティッシュケース (ライトポール用)、手術顕微鏡OPMI®pico、手術顕
微鏡OP-Dent、オペレーティングライト (自動昇降ユニットタイプ) の併設はできません。オー
バーアームタイプには設置できません。

※2:液晶モニターアーム、ティッシュケース (ライトポール用)、手術顕微鏡OP-Dent、オペレー
ティングライト (自動昇降ユニットタイプ) の併設はできません。オーバーアームタイプには設
置できません。


※3:カルツァイス社製 手術顕微鏡OPMI®picoは別売です。

※4:液晶モニターアーム、ティッシュケース (ライトポール用)、手術顕微鏡OPMI®pico、オペレー
ティングライト (自動昇降ユニットタイプ) の併設はできません。

※5:オプトミック社製 手術顕微鏡OP-Dent は別売です。



OPMI®pico用ボール^{※2}
(カルツァイス社製手術顕微鏡
OPMI®pico^{※3}のみ設置可能)

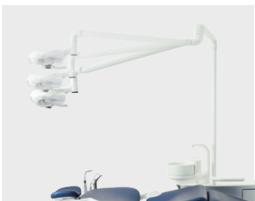

自動昇降ユニットタイプ
※手術顕微鏡OPMI®pico/手術顕
微鏡OP-Dentの併設はできません。

Others



パイプクリーナー
2000mL



オロトルプラス
吸引システムの
洗浄除菌液



フロークリーナー
吸引システムの
強力洗浄液



ツインターボ
クリーナー液
750mL (1本
/6本セット)
● ジーシーター
ピンスプレー



▲オロトルプラス、
フロークリーナーの
詳細情報はこちら

Others



オペレーティングスツール
OS-Ⅳ D/A
<ドクター用>
外形寸法=458 (幅)×509 (奥行)×高さ (最高位) 862mm
●シート最高位=613mm
●シート最低位=460mm
<アシスタント用>
外形寸法=458 (幅)×458 (奥行)×高さ (最高位) 613mm
●シート最高位=613mm
●シート最低位=460mm

オペレーティングスツール シートカラー
標準色


メタリックブルー	ライトピンク
メタリックパープル	ワインレッド
サンセットイエロー	コーラルオレンジ
マロンブラウン	ラベンダーブルー*
リーフグリーン	*特別色
ターコイズ	

※背クッションカラー:ブラックのみ
※ユニットチェアシートオプション
「リラクゼーションシートシフォン」仕様
には対応しておりません。



外装カバー メタリックブルー
(受注生産品)

SELECTION

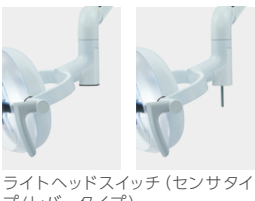

ライトヘッドスイッチ (センサタイ
プ/レバータイプ)



フットコントローラー
(円形ペダルタイプ/2ペダルタイプ)



スピットンカラー
ホワイト/ディープブルー





外装カバー シルバー




外装カバー ホワイト

エアタービン


- 


1. グリーンインパルス S-ML ライト付
4 点注水スプレー (ステンレスボディ)
ヘッドサイズφ 10.6 × H12.4mm
- 

1. グリーンインパルス S-SL ライト付
4 点注水スプレー (ステンレスボディ)
ヘッドサイズφ 10.1 × H13.3mm
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
224ALBZX00044A01
- 

2. チタンXカプリングLED
3. チタンXカプリング


マイクロモーター (ブラシレス)

- 

16. MGモーター LEDライト付 内部注水方式 ブラシレス (本体滅菌可能)
MAX40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
220AFBZX00212000
- 

17. MX2 PLUSモーター LEDライト付 内部注水方式 ブラシレス (本体滅菌可能)
MAX40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 220AFBZX00212000
※ ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。

マイクロモーター (ブラシ)

- 

18. Tiモーター S ライトなし 内部注水方式
MAX 40,000min⁻¹
19. Tiモーター SL LEDライト付 内部注水方式
MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00020A01
※ ライト付ハンドピースは、ライトなしマイクロモーターには装着できません。
- ※ 回転数につきましては、12 ページをご確認ください。

エアフローハンドピース (縁上)

清掃能力の向上とエアロゾル飛散を抑制

パウダーの噴射範囲が32%拡大*し、2倍*の噴射速度になったため、汚れの除去時間を短縮。またこれによりパウダーの消費量とコストを低減しました。

- ・さまざまな症例で使用可能
- ・歯冠から歯肉縁下4mmまで、歯間等の清掃
- ・露出根面、インプラントの洗浄

新誘導的ラミネー(層状)
AIRFLOW®技術
60%減*エアロゾル飛散
*自社従来製品との比較

ペリオフローハンドピース (縁下)

歯周ポケット内に噴射し効率良く清掃可能

ペリオフローは、ペリオフローノズルを歯周ポケット内に挿入しパウダーと水を噴射できるため、スケーラー等と比較して短時間で清掃できます。

- ・歯周ポケット内の洗浄
→ポケット深さ4~9mmまでの症例
→根分岐歯周病変のⅠ度(初期)とⅡ度(部分期)に適切

ジーシー 歯面清掃パウダー +

水溶性が高く歯周ポケット内にも噴射可能



パウダー主成分のエリスリトールは、洋ナシや味噌等に含まれる天然糖のため、糖尿病の患者さんにも低GI*のパウダーで処置できます。また水溶性が高いため、狭いスペースや歯周ポケット内にもパウダーが残りにくくなっています。

* Glycemic Index
(グリセミックインデックス)



ジーシー 歯面清掃パウダー +
内 容 量 : 120g
主 成 分 : エリスリトール
平均粒径 : 14μm
保管条件 : 周囲温度 ~25℃、
相対湿度 ~90%

歯面研磨材 ジーシー 歯面清掃研磨パウダー
一般医療機器 13B1X00155000309

※弊社エアフローを既にご使用の医院様
「ジーシー 歯面清掃パウダー + (エリスリトール)」をご使用される
場合、パウダーチャンバー内供給エア圧の変更が必要なため弊社
支店・営業所までご連絡ください。

モーターアタッチメント

- 

8. Ti-X コントラ C1:1 ライトなし シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
- 

9. Ti-X コントラ C1:1L ライト付 シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
- 

10. Ti-X コントラ C1:5 ライトなし 4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min⁻¹
- 

11. Ti-X コントラ C1:5L ライト付 4点注水スプレー 5倍速 FG用 MAX 200,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
219ALBZX00013A01
- 


12. Ti-X ストレート S1:1 ライトなし シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min⁻¹
- 


13. カボ エキスパートマティック E20C ライトなし シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
- 


14. カボ エキスパートマティック E20L ライト付 シングルスプレー 等速 CA用 MAX 40,000min⁻¹
- 


15. カボ エキスパートマティック E10C ライトなし シングルスプレー 等速 HP用 MAX 40,000min⁻¹
▶管理医療機器 特定保守管理医療機器
223AIBZX00039000


ウルトラスニックスケーラー


- 


20. MAX iForce2
- 


21. MAX iForce2 LUX
- 

20. パリオス2スケーラー ライトなし
- 

21. パリオス2スケーラー LEDライト付
- 

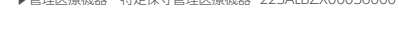▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 223ALBZX00036000
- 

22. EMS2スケーラー ライトなし
- 

23. EMS2スケーラー LEDライト付
- 

▶管理医療機器 特定保守管理医療機器 225AFBZX00073000

歯面清掃器

- 


26. エアフローハンドピース (縁上)
- 

ペリオフローハンドピース (縁下)
- 

26. キット エアフロー
▶能動型機器接続歯面清掃用器具 キット エアフロー 管理医療機器
303AKBZX00016000

シリンジ

- 

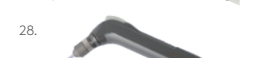27. イオムシリンジ Dr./Asi.
- 

28. イオムシリンジ
ディスポシリンジ用アダプタ付Dr./Asi.
ディスポシリンジノズル

口腔内カメラ

- 

29. MyRay カム C-U2
▶歯科用口腔内カメラ 一般医療機器 13B1X00155000309

装備一覧表

ドクターユニット	●:標準装備	△:オプション	▲:工場オプション(ご注文時に申し受けます)
ドクターユニット本体:フロアマウントタイプ、スライドデリバリータイプ、オーバーアームタイプ、カートタイプ*	●		
ドクターユニット3HP (タービン1回路/モーター1回路)	●		
イオムシリンジDr.	●		
タービンホースキット (1本)	●		
グリーンインパルス S-ML	●		
チタンXカプリングLED (緑)	●		
MGモーター本体、ホースキット (1セット)	●		
Ti-X コントラ C1:1L (1本)	●		
Ti-X ストレート S1:1 (1本)	●		
ジーシータービンスプレー (1本)	●		
トレーシートII標準トレー (10枚)	●		
左側ワイド (オーバーアームのみ)	●		
ドクターパネル保護シート (10枚)	●		
スーパーロー制御機構	●		
ハンガー追加キット (1HP追加する際に加算)	▲		
タービンホースキット	▲		
グリーンインパルス S-ML/S-SL	▲		
チタンXカプリング	▲		
チタンXカプリングLED	▲		
カボ エキスパートマティック E680L	▲		
カボ エキスパートマティック E677L	▲		
カボ マルチフレックスLUXカプリング465LED	▲		
カボ マルチフレックスLUXカプリング460LED	▲		
Tiモーター S本体、ホースキット	▲		
Tiモーター SL本体、ホースキット	▲		
MGモーター本体、ホースキット	▲		
MX2 PLUSモーター本体、ホースキット	▲		
Ti-X ストレート S1:1	▲		
Ti-X コントラ C1:1L	▲		
Ti-X コントラ C1:5/C1:5L	▲		

*ドクターユニット カートタイプの場合、カートホースの長さ及びチェアベースの配置位置については弊社までお問い合わせください。

カボ エキスパートマティック E20C/E20L	△
カボ エキスパートマティック E10C	△
カボ エキスパートマティック E25C/E25L	△
ウルトラスニックスケーラー/パリオス2スケーラー	△
ウルトラスニックスケーラー-EMS2スケーラー/EMS2 Lスケーラー	△
ウルトラスニックスケーラー-ニュートロン スケーラー (ライトなし/ライト付)	△
歯面清掃器:キット エアフロー (縁上)	△
歯面清掃器:キット エアフロー (縁上・縁下)	△
タービンスプレー (追加キット)	△
口腔内カメラ:MyRay カム C-U2	△
イオムシリンジ ディスポシリンジノズル用アダプタ付D用	△
イオムシリンジ ディスポシリンジノズル用アダプタ	△
ディスポシリンジノズル (250本入)	△
ユニットバーナーII	△
液晶モニター (別途モニタ要)	△
液体モニタースレー	△
タービンガード	△
サイドトレー	△
コントラスタンド	△
大型トレー右側ワイド	△
大型トレー左側ワイド (オーバーアームのみ)	△
ペーパーバリアシート	△
シリコンシートD	△
シリコンシートD 右側ワイド	△
シリコンシートD 左側ワイド (オーバーアームのみ)	△
トレーシートII標準トレー (50枚)	△
トレーシートII右側ワイド (50枚)	△
トレーシートII左側ワイド (オーバーアームのみ) (50枚)	△
ドクターパネル保護シート (50枚)	△
バーナーケース保護シートII ワイドタイプ (50枚)	△
ディスポシリンジ用アダプタ付D用	△
パイプクリーナー 2000mL	△
オクトルプラス	△
フロークリーナー	△

アシスタントユニット	●
アシスタントユニット本体:フロアマウントタイプ	●
イオムシリンジAsi.	●
バキュームハンドピース (ボールジョイント付)	●
自動洗浄セパレータータンク	●
回転式スピットン (マニュアル)	●
カラー (セレクト):ホワイト、ディープブルー	●
ヒータータンク	●
排水トラップ、バキューム切替弁	●
オートコック給水 (超自汲センサ)	●
ディスポーザバルカップ (100個)	●
エジェクター	●
外部給水	●
ツインターボクリーナーII	●
ツインターボクリーナーII 750mL (1本/6本セット) ※1本標準装備	△
フラッシュアダプタ	●
アシスタントパネル保護シート (10枚)	●
サポーターバー	▲
外部給気	▲
イオムシリンジ ディスポシリンジノズル用アダプタ付A用	▲
除菌フィルター エア...水用	▲
除菌フィルター エア...水用	▲
液体モニタースレー	▲
配管ボックス (別途モニタ要)	▲
メガネ置き	▲
ディスポーザケース:ライトボール用/オーバーアーム用	▲
PC本体ケース	▲
アシスタントパネル保護シート (50枚)	▲
アシスタントトレーシリコンシート	▲
パイプクリーナー 2000mL	▲
オクトルプラス	▲
フロークリーナー	▲

チェア	●
チェア本体:ステップレスタイプ、スライドタイプ、カンタータイプ	●
チェアベース:ショートベースタイプ、ロングベースタイプ	●
ヘッドレスト (マニュアル)	●
シートカラー (セレクト): (標準色)メタリックブルー、メタリックパープル、サンセットイエロー、 (特別色)ラベンダーブルー、ライトピンク、ワインレッド、コーラルオレンジ	●
パリオス2/EMS2/ニュートロンスケーラーハンドピース・チップ・レンジ	●
シリンジ/スリル・カパー・ディスポシリンジノズルアダプタ	●
バキュームハンドピース・チップ (金属製)	●
エジェクター	●
シリコンシート	▲
ライトハンドルカバー	▲
消毒用アルコールによる清拭消毒対応	▲
チェアシート	▲
ディスポーザユニット (トレー・ハンガー・アーム)	▲
アシスタントユニット (ハンガー・アーム)	▲
ライト (アーム・ボール)	▲
シリンジ本体	▲
タービン用カプリング (ライト付)	▲
マイクローモーター本体	▲
ホース (タービンモーター・バキューム・エジェクター)	▲
スピットン (洗浄ノズル・コップ用/ノズル・コップ受け)	▲
ディスポーザバル	▲
各パネル保護シート	▲
ディスポシリンジノズル	▲
その他	●
外装カバー (セレクト):シルバー、ホワイト	●
外装カバー:メタリックブルー	▲
オペレーティングスツールOS-N (ドクター用)	▲
オペレーティングスツールOS-N (アシスタント用)	▲

主な関連器具の滅菌・消毒対応

オートクレーブ滅菌対応	●
グリーンインパルス	●
Ti-X コントラ/Ti-X ストレート	●
MX2 PLUSモーター/MGモーター本体	●
歯面清掃器ハンドピース	●
パリオス2/EMS2/ニュートロンスケーラーハンド	●
ピース・チップ・レンジ	●
シリンジ/スリル・カパー・ディスポシリンジノズルアダプタ	●
バキュームハンドピース・チップ (金属製)	●
エジェクター	●
シリコンシート	▲
ライトハンドルカバー	▲
消毒用アルコールによる清拭消毒対応	▲
チェアシート	▲
ディスポーザユニット (トレー・ハンガー・アーム)	▲
アシスタントユニット (ハンガー・アーム)	▲
ライト (アーム・ボール)	▲
シリンジ本体	▲
タービン用カプリング (ライト付)	▲
マイクローモーター本体	▲
ホース (タービンモーター・バキューム・エジェクター)	▲
スピットン (洗浄ノズル・コップ用/ノズル・コップ受け)	▲
ディスポーザバル	▲
各パネル保護シート	▲
ディスポシリンジノズル	▲


* 詳しくは各製品の使用説明書にしたい、正しく清掃、除菌、殺菌、滅菌、保管を行ってください。

イオム アクア仕様

●電源電圧=AC100V 50/60Hz ●最大消費電力=900VA ●使用空気圧=0.5MPa ●使用水圧=0.2MPa

立面図


寸法 (1/50縮寸) 単位:mm

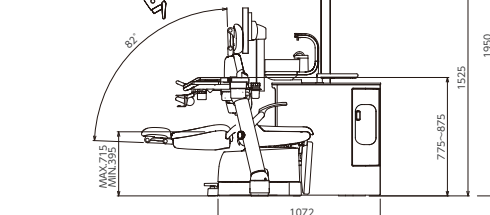

スライドデリバリー・ステップ

チェアタイプ


FL

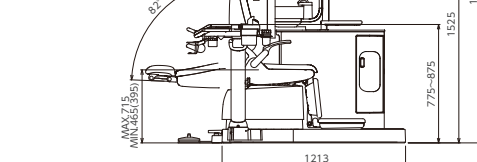

オーバーアーム・カンター

チェアタイプ


OC

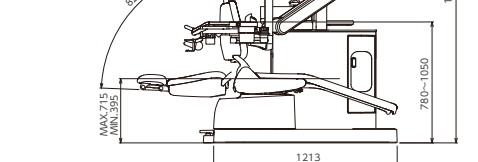

カート・ステップ


チェアタイプ

CS

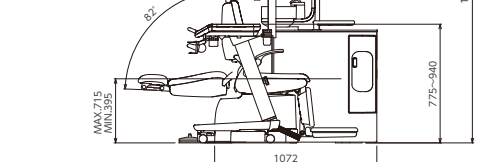


平面図


寸法 (1/50縮寸) 単位:mm

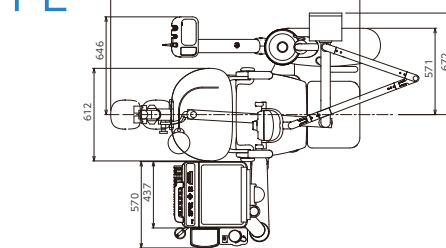


SS

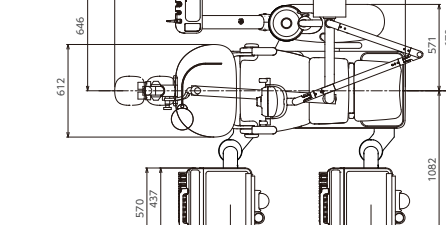

OC

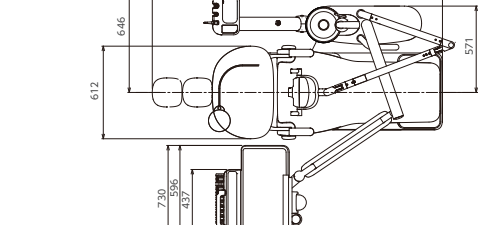

CS

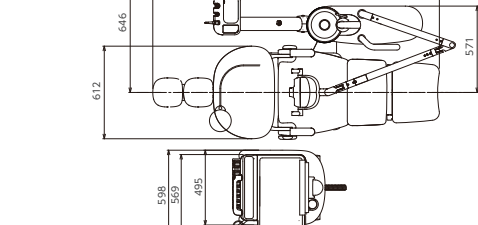

重量=FL:約230kg/約300kg (OPMI® pico搭載時)

重量=SS:約260kg/約330kg (OPMI® pico搭載時)

重量=OC:約260kg

重量=CS:約240kg

イオム アクア

歯科用ユニット



EOMのさらなる進化
イオム アクア 専用サイト

確かな品質に信頼のアフターサービス。 歯科用ユニット保証期間3年間

万一の故障への不安が大きいユニットを、長期間安心してご使用いただくため、品質の向上に取り組んできました。ユニットの3年間保証はジーシー製品の大きな信頼の証です。



ユニット本体及びライトの保証期間は3年です。ただし、消耗品は保証対象外です。
また、メーカーが別途定めた保証期間に準じる品目については、各製品の使用説明書などをご覧ください。

歯科用ユニット イオム アクア 管理医療機器 特定保守管理医療機器 231AKBZX00012000

※掲載の情報は、2025年2月現在のものです。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※写真には一部オプションを含む場合があります。詳しくは装備一覧表をご覧ください。
※写真には機能説明のため、一部機器を装着していない場合があります。
※色調は印刷のため、現品と若干異なる場合があります。
※ソフトウェア画面写真は、ハメ込み合成のため実際とは若干異なります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支 店
●東 京 (03)3813-5751 ●大 阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東 北 (022)785-8040 ●九 州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ

どちらもコチラのQRでOK!

推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。



RA050C2502

