

# 新規生体溶解性ファイバー採用。 バイオキャストリングライナー新登場。

バイオキャストリングライナーは生体溶解性ファイバーを使用した、全く新しいタイプの鑄造用リングライニング材です。  
柔軟性や緩衝性を高いレベルでクリアしながら、人にもやさしい特性を持っています。




## ●なめらかで高い柔軟性。

ライナー表面のなめらかさと適度な柔軟性を追求した先進の鑄造用リングライニング材。小型リングの内張りでもシワになりにくく、リングにぴったりフィットします。



## ●豊富な種類で適切なライナー選択。

さまざまな大きさの鑄造体に対応する3種類の厚さのライナーを用意しましたので、状況に応じた適切な緩衝性が得られます。

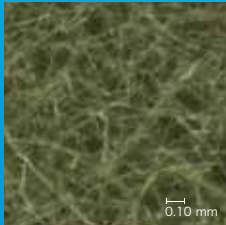

生体溶解性ファイバーが折り重なって作る空間により、適度な緩衝効果を発揮します。

## ●生体溶解性ファイバー採用。

バイオキャストリングライナーのファイバーは生体に吸入されても速やかに溶解し、生理作用で体外に排出される、人にやさしい製品です。

ジーシー鑄造リングNo.	1	2	3	4	5
リング巻きの長さ(mm)	88	120	147	178	263

### ■バイオキャストリングライナー形態

番号	幅(mm)	厚さ(mm)
No.1	32	0.70
No.1F	32	0.45
No.2	42	0.70
No.2F	42	0.45
No.3	48	0.70
No.3F	48	0.45
No.11	40	1.00
No.12	50	1.00
No.13	55	1.00

※りん酸塩系埋没材をご使用の場合は、No.11～13のご使用をおすすめします。

※鑄型の膨張を抑えたい場合には、Fタイプを使用してください。

鑄造用リングライニング材

# ジーシー バイオキャストリングライナー

種類●9種=No.1～3、No.1F～3F、No.11～13



ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※掲載の価格とジーシー研究所測定の実測データは、2011年6月現在のものです。  
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**  
東京都文京区本郷3-2-14 東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286