

咬合接触検査用ワックス

# ジーシー バイトアイワックス

NEW

咬合接触状態の可視化をスマートに

## 特長1 素材

精度の高い咬合接触状態の採得を追求

- 常温でも柔軟性が高く、薄いワックス(厚さ1mm)のため、咬合時に顎位が変位しにくい。
- 口腔内から撤去する際に、歯や補綴装置につきにくいワックス。

## 特長2 形状

口腔内に挿入しやすい形状・サイズ

- 歯列にあわせた馬蹄形。
- 口腔内の大きさにあわせて選べる2サイズをご用意。

## 特長3 色調

バイトアイ BE-I での測定に最適化された色調

- バイトアイ BE-I での測定・解析はもちろん、目視でも咬合接触状態の確認しやすい色調。

※ジーシー バイトアイワックスを使用する場合は、バイトアイ BE-I ワックス解析機能追加ソフト(別売)によるバージョンアップが必要です。

### ●口腔内に挿入し咬合させるだけで、手軽に咬合接触状態を把握

歯列にあわせた形状と、顎の大きさから選べる2サイズで、手軽に咬合接触状態を得ることができます。  
※湯煎して使用する場合は、約40℃のお湯に10~30秒つけて、口腔内で30秒程度保持します。



ジーシー バイトアイワックス

#### ■ サイズ



概要寸法(単位:mm)


#### ■ 透過写真



### ●バイトアイ BE-I で撮影・保存または目視で確認

ジーシー バイトアイワックスを撮影するには、はじめにバイトアイ BE-I ワックス解析機能追加ソフト(別売)によるバージョンアップが必要です。

#### ■ バイトアイ BE-I 解析画面

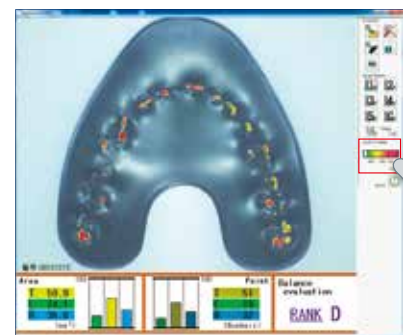

カラーバーをタッチし「バイトアイワックス解析モード」に切り替えて撮影

画面はタッチパネルでスマート操作

咬合接触検査用ワックス

## ジーシー バイトアイワックス NEW



色調●紫色

サイズ●2種=Mサイズ(縦71mm×幅70mm)、Lサイズ(縦71mm×幅80mm)

包装●各1函(40枚)

一般医療機器 27B2X00008000065

#### ■ 関連製品

歯接触分析装置

ジーシー バイトアイ BE-I



包装●一式(ジーシー バイトアイ BE-I 本体、ARシート1枚、パネル保護シート1枚、バイトアイ for PCインストールCD1枚)

一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B1X00155000217

製造販売元 株式会社ジーシー

ジーシー バイトアイ BE-I ワックス解析機能追加ソフト



包装●一式: USBメモリ(本体バージョンアップ用)1個、USBキーボード1個、バイトアイ for PCソフトウェアCD-ROM(コンピュータバージョンアップ用)1枚、使用説明書、クイックガイド(ワックス解析機能用)、バージョンアップマニュアル

より精度の高い咬合接触状態の確認には咬合接触検査材

ジーシー ブルーシリコンローフロー



包装●1函: カートリッジ56g(48mL)2本、ミキシングチップⅡS(ピンク)6本

一般医療機器 23B2X00038000044  
製造販売元  
株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

※掲載の参考データは、2015年11月現在のものです。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **大成歯科工業株式会社**  
東京都文京区本郷3丁目2番14号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)  
お客様窓口 ☎ **0120-416480**  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)  
<http://www.gcdental.co.jp>

支店  
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333  
営業所  
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722  
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286