

ジーシー

オペレーティングスツール OS-IV

オペレーティングスツール



術者の診療を快適にサポートする
オペレーティングスツール



ドクター用

アシスタント用

オペレーティングスツール

ジーシー オペレーティングスツール OS-IV

■仕様

D用(ドクター用)外径寸法: 458(幅)×509mm(奥行)×862mm(最高位)

包装●1脚=(標準色)/(特別色)

A用(アシスタント用)外径寸法: 458(幅)×458(奥行)×613mm(最高位)

包装●1脚=(標準色)/(特別色)

※イオム アクア、イオム 和、イオム ナゴミ for DHのチェアシートオプション「リラクゼーションシート“シフォン”」仕様は対応して
おりません。

〈共通仕様〉

座部シートの大きさ: φ395mm、座クッション上面: 613mm(最高位)/460mm(最低位)、昇降ストローク:
153mm、上下機構: ガスシリンダー、キャスター外径寸法: 458mm、キャスター数: 5個

■座部シートカラー ※バックレストカラー: ブラックのみ

〈標準色13色〉メタリックブルー、メタリックパープル、サンセットイエロー、マロンブラウン: 栗、リーフグリーン、
ターコイズ、ライトブルー レガロ、ライトピンク、ワインレッド、コーラルオレンジ、抹茶、紅、ミッドナイトグレー

〈特別色11色〉アイボリー、グラファイトブラック、ラベンダーブルー、ウイステリアブルー、モーヴピンク、ブライ
トイエロー、ライトオレンジ、ライトイエロー、オーシャンブルー、フローラルホワイト、真珠

日々の診療で術者の心地良い“快適診療”への重要なアイテム。





衛生的な診療が可能

手を触れることが多いバックレストは「縫い目」や「つなぎ目」が無いシームレス設計のため拭掃がしやすく衛生的です。



診療中の負荷を軽減

座部シートを柔らかくすることで体圧が分散し、臀部への負荷を軽減させます。

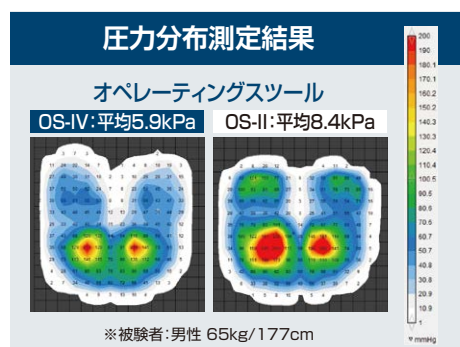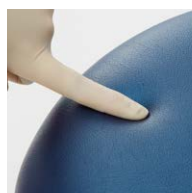

安定感があり移動しやすい

5個の双輪キャスターに加え、キャスターベースを大きくした低位置重心の設計により、移動や体勢を変更する際も安定した動きが可能です。



豊富なカラーバリエーション

各ユニットのチェアシートと同色のカラーが選択可能。診療室のトータルコーディネートをサポートします。

EOM AQUA イオム アクア

メタリックブルー	ラベンダーブルー
メタリックパープル	ライトピンク
サンセットイエロー	ワインレッド
マロンブラウン	コーラルオレンジ
リーフグリーン	
ターコイズ	

歯科用ユニット イオム アクア 管理医療機器 特定保守管理医療機器 231AKBZX00012000 製造販売元: 株式会社ジーシー

EOM 和 なごみ イオム ナゴミ

標準色	特別色
抹茶	真珠
栗(マロンブラウン)	
紅	

歯科用ユニット イオム ナゴミ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 304AKBZX00059000 製造販売元: 株式会社ジーシー

※掲載情報の参考データは2025年1月現在のものです。
 ※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 ※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の使用説明書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー**
 東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
 お客様窓口 ☎0120-416480
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
 営業所
 ●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
 ●東北 (022)785-8040 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
 公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
 推奨OSバージョンはiOS:14.0以上、Android:10.0以上です。