

収縮が少なく、寸法安定性も良好な 口腔内固定用常温重合レジン

FIXPEED



インデックス模型製作のための連結



フィクスチャー アナログの連結・インデックス



メタルフレームの試通・連結




アルタードキャスト法を使ったインプラント連結

低収縮性と良好な寸法安定性

低収縮を誇るパターンレジンとほぼ同等の線収縮率 0.62%、重合収縮はおおよそ 10分※1 で、ほぼ安定し、3日経ってもその精度が確保されますので、インプラント印象用コーピングの連結など口腔内固定に適しています。

■線収縮率の推移 (※1 試験条件：23℃、湿度 50%環境下)

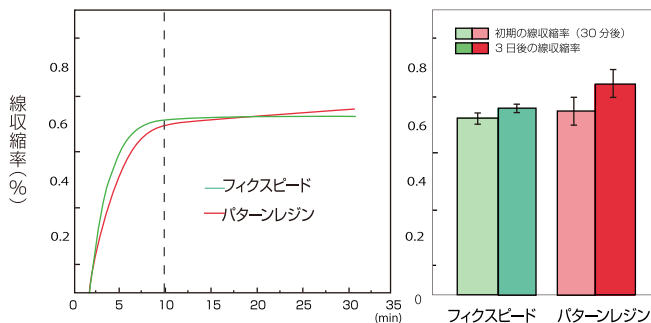

シャープな硬化特性

『フィクスピード』は、早期に粘度上昇がはじまるため、筆積み時の位置決めが容易に行えます。

レオメータによる硬化特性比較 ※1



変形や温度変化に強い物性

大幅に曲げ強度を向上させましたので口腔内からの撤去や模型上での作業中の荷重にも十分な耐久性があります。温度変化にも強いので搬送中も安心です。



硬く、温度変化に強いいため粘性のない快適な切削感

口腔内で確認しやすいグリーン色

『フィクスピード』は、口腔内での確認が容易な明るいグリーン色。作業時はもちろん、撤去時にも識別がしやすくなっています。



ジーシー 固定用常温重合レジン

フィクスピード



操作性にすぐれた No.10 筆

レジン製品使用後の筆先洗浄に便利

レジン プラシクリーナー



【包装】1-1セット = 粉末42g 1本、液40g (42mL) 1本、ラバーカップ2個、カップホルダー 1個、筆(No.10) 1本

管理医療機器 221AABZX00173000

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

※掲載の価格とジーシー研究所測定の見積データは、2010年2月現在のものです。

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

※本品は、焼却すると残さが残りますので
鑄造用パターンとしては使用できません。

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ

東京都板橋区蓮沼町76-1

愛知県春日井市鳥居松町2-285

DIC (デンタルインフォメーションセンター) 支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

お客様窓口 ☎0120-416480

営業所

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

<http://www.gcdental.co.jp>

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286