


# 収縮が少なく、寸法安定性も良好な 口腔内固定用常温重合レジン




## FIXPEED

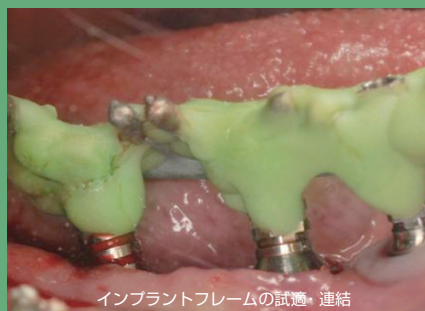

## 低収縮性と良好な寸法安定性

低収縮を誇るパターンレジンとほぼ同等の線収縮率 0.62%、重合収縮はおおよそ 10 分※1 で、ほぼ安定し、3 日経ってもその精度が確保されますので、インプラント印象用コーピングの連結など口腔内固定に適しています。

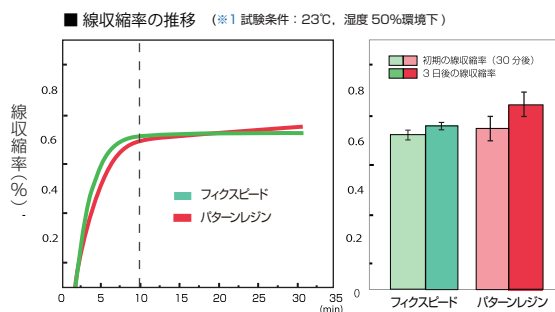

## シャープな硬化特性


『フィクススピード』は、早期に粘度上昇がはじまるため、筆積み時の位置決めが容易に行えます。



レオメータによる硬化特性比較 ※1

## 変形や温度変化に強い物性

大幅に曲げ強度を向上させましたので口腔内からの撤去や模型上での作業中の荷重にも十分な耐久性があります。温度変化にも強いので搬送中も安心です。

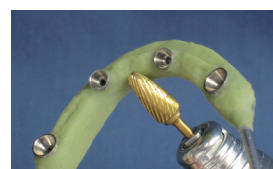

硬く、温度変化に強いいため粘性のない快適な切削感

## 口腔内で確認しやすい グリーン色

『フィクススピード』は、口腔内での確認が容易な明るいグリーン色。作業時はもちろん、撤去時にも識別がしやすくなっています。



【包装】1-1セット = 粉末42g 1本、液40g (42mL) 1本、ラバーカップ2個、カップホルダー 1個、筆(No.10) 1本

## ジーシー 固定用常温重合レジン フィクススピード



【単品包装】粉末1函 = 42g / 100g  
液1函 = 40g (42mL) / 100g(104mL)  
筆(No.10)3本1函

操作性にすぐれた No.10 筆

レジン製品使用後の  
筆先洗浄に便利

レジン ブラシクリーナー



【包装】1函=液130g 1本、スポイト1本

歯科汎用アクリル系レジン ジーシー フィクススピード 管理医療機器 221AABZX00173000

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは、2025年10月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

※本品は、焼却すると残さが残りますので  
鋳造用パターンとしては使用できません。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー デンタルプロダクツ  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<https://www.gc.dental/japan/>

支店  
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333  
営業所  
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722  
●東北 (022)785-8040 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも  
App Store からダウンロード  
Google Play でお申し込み  
どちらもこちらのQRでOK!

ジーシー  
公式アプリ

