

# グレースフィル U (ユニバーサルシェード)



● ゼロフロー ● ローフロー ● フロー

ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン

あのグレースフィル ゼロフローにも  
U(ユニバーサルシェード)が  
ラインナップされました!

ジーシー独自の光透過性と色あいの最適化により  
天然歯に自然と馴染む CR 充填が行えます。



16 シェードの人工歯に U (ユニバーサルシェード) を充填

充填部位

U(ユニバーサルシェード) が症例に合わせて3種類のフローから選択でき診療効率をさらにアップ!



※写真は 1mL 仕様です。

グレースフィル ゼロフロー **NEW**  
U (ユニバーサルシェード)



※写真は 1mL 仕様です。

グレースフィル ローフロー  
U (ユニバーサルシェード)



※写真は 1mL 仕様です。

グレースフィル フロー  
U (ユニバーサルシェード)

包装●  
1mLシリンジ単品: 1.7g(1mL)入シリンジ1本、フィリングチップニードルタイプ1個、フィリングチップエレファントニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個  
2mLシリンジ単品: 3.4g(2mL)入シリンジ1本、フィリングチッププラスチック2個、フィリングチップニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個

# ゼロフロー (I級窩洞)

Gracefil



## 簡単にツヤ出し、滑沢なレジン面が持続

ナノサイズの多角形フィラーを均一分散することにより、摩耗による表面フィラーの脱落が起こりにくく、また脱落しても表面の凹凸が小さいためツヤが維持されます。



## 低吸水で着色しにくい




ベースレジンモノマーの改良により、吸水量を大幅に抑制。吸水が少ないため着色しにくく、レジン本来の色を長期的に維持します。



ゼロフロー(A2)充填

## 高い強度&優れた耐摩耗性

「FSCテクノロジー」により、表層修復にも使用できる高い強度と優れた耐摩耗性を実現しました。また、マトリックスレジンの進化により重合特性が高まり優れた破壊靭性を生む“粘り”も有しています。

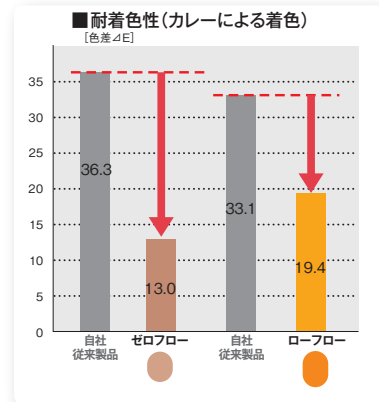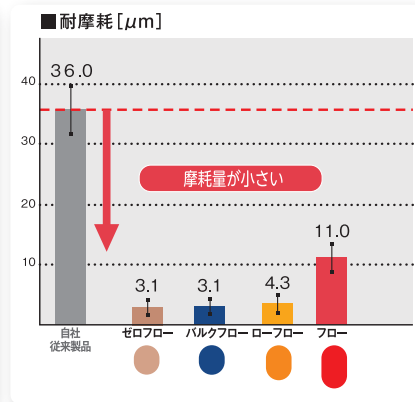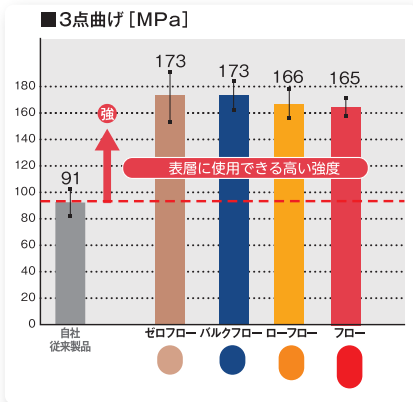

すべてジーシー研究所測定データ

## キレが良い

マトリックスレジンの進化により、キレが良く糸引きが生じにくいいためストレスなくレジン修復が行えます。



糸引きが生じにくい

適応する窩洞修復方法	I級窩洞	II級窩洞	III級窩洞	IV級窩洞	V級窩洞	ライニング
ゼロフロー	◎*1	◎*1	大: ◎ 小: ○	小: ◎ ◎*2	深: ◎ 小・浅: ○	△
ローフロー	○	○*3	◎	○*2	深: ○ 小・浅: ◎	○
フロー	小・浅: ○	-	-	-	小・浅: ◎	◎

◎:最適 ○:適する △:使用できる -:使用する場合は十分に配慮  
\*1) レジンコーンテックを使用 \*2) 舌(口蓋)側のエナメル真のスキムに使用 \*3) きわめて小さい窩洞

**ゼロフロー**

ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン  
グレースフィル ゼロフロー

1mL色調  
●18色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C2, C3, U(ユニバーサル), A01, A02, A03, E1, E3, BW (ブリーチングホワイト), WO (ホワイトオペーク)

2mL色調  
●9色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, U(ユニバーサル), A02, A03

1mL包装  
●単品(各色): シリンジ1本  
●ダブルパック(A2, A3のみ): シリンジ2本

2mL包装  
●シリンジ1本1個(各色)

**ローフロー**

ナノハイブリッド充填用コンポジットレジン  
グレースフィル ローフロー

1mL色調  
●19色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C2, C3, U(ユニバーサル), A01, A02, A03, E1, E3, BW (ブリーチングホワイト), WO (ホワイトオペーク)

2mL色調  
●9色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, U(ユニバーサル), A02, A03

1mL包装  
●単品(各色): シリンジ1本  
●ダブルパック(A2, A3のみ): シリンジ2本

2mL包装  
●シリンジ1本1個(各色)

**フロー**

ナノハイブリッドフロアブルコンポジットレジン  
グレースフィル フロー

1mL, 2mL色調  
●9色=A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, U(ユニバーサル), A02, A03

1mL包装  
●単品(各色): シリンジ1本  
●ダブルパック(A2, A3のみ): シリンジ2本

2mL包装  
●シリンジ1本1個(各色)

**バルクフロー**

ナノハイブリッド一括充填用コンポジットレジン  
グレースフィル バルクフロー

色調 ●2色=ユニバーサル(U), テンチン(D)  
包装 ●1包: 3.4g(2mL)入シリンジ1本, フィリングチップⅢニードル1個, フィリングチップⅢプラスチック2個, フィリングチップ用キャップ1個

歯科充填用コンポジットレジン管理医療機器

ジーシー  
グレースフィル ゼロフロー  
229AABZX00014000

ジーシー  
グレースフィル ローフロー  
229AABZX00013000

ジーシー  
グレースフィル フロー  
229AABZX00051000

ジーシー  
グレースフィル バルクフロー  
230AKBZX00060000

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

※掲載情報とジーシー研究所の参考データは2021年11月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地

カスタマーサービスセンター  
お客様窓口 ☎0120-416480  
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)  
<http://www.gcdental.co.jp>

支店  
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333  
営業所  
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722  
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー  
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!  
推奨OSバージョンはOS: 12.4以上, Android: 8.0以上です。