

GC



チタンボディー高速エアタービンハンドピース

# Green Impulse

26W\*の高出力で、  
パワフル&スムーズな  
切削を実現。

グリーンインパルス Z-ML/Z-SL

*High-Power*  
26W\*のハイパワー

*Usability*  
優れた操作性

*Cleanliness*  
高い衛生性



Z-SL



Z-ML

\* Z-SLのみ

# High-Power ハイパワー

**26W\*のハイパワーで力強い切削力を実現** \*Z-SLのみ  
給気を最大限にパワーに変換する特殊形状のローターを採用。  
小さなヘッドでもスムーズな切削感が得られます。  
また、新開発のベアリングにはセラミックボールを採用することで摩擦を軽減し、耐久性もアップしています。




ヘッドサイズと出力の比較



# Cleanliness 衛生性

## サックバックを防ぐ内部構造


血液等の侵入を防ぐクリーンヘッドシステムを搭載。異物による内部の損傷も軽減します。

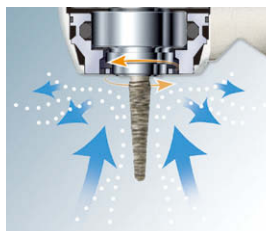

# Usability 操作性

## 臼歯部の切削もよりスムーズに

ヘッド角度の工夫とスリムなネックでバーが臼歯部に届きやすく、広い視野も確保できます。

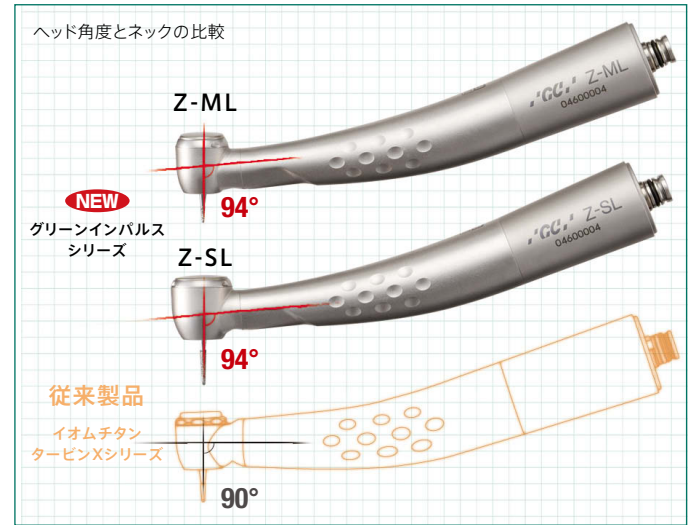

## 滑りにくく安定感のあるグリップ

新コーティング「DURAGRIP」を採用。滑りにくく、安定した操作性を保ちます。



## 押しやすいプッシュボタン

ワンタッチでバーの脱着が可能なロック機構。より少ない力でバーの交換が可能に。

## 取替え簡単な交換式カートリッジ

先生ご自身で交換できるため、修理にかかる時間を大幅にカット。



小さいヘッドの“イオムチタンタービンX X-ML”も発売中

- ヘッドサイズφ10.3×H11.7mm
- 回転数390,000～460,000min<sup>-1</sup>
- ※ショートシャフト専用



管理医療機器 特定保守管理医療機器 218ABBZX00130000

### 〈仕様〉

グリーンインパルス Z-ML ●ヘッドサイズφ10.8×H12.1mm ●回転数360,000～440,000min<sup>-1</sup>  
グリーンインパルス Z-SL ●ヘッドサイズφ12.5×H13.1mm ●回転数320,000～400,000min<sup>-1</sup>

パワー:23W(Z-ML)・26W(Z-SL) / 使用可能な給気圧:0.25～0.3MPa / チタン製ボディ(外装部のみチタンで内装部分は含まれません) & DURAGRIP/セラミックボールベアリング / 水フィルタ内蔵 / グラスロッドライト / 4点注水スプレー / 135℃までのオートクレーブ滅菌可能  
※パワーおよび回転数はドライブエアにより異なります。

### グリーンインパルス Z-ML/Z-SL 共通

包装●  
ハンドピース本体1本、ヘッドキャップレンチ1個、ノズル清掃具1個、CJ用Oリング一式

※予備カートリッジは添付されておりません。  
※タービン装着にはカブリングが必要となります。  
弊社までお問い合わせください。

管理医療機器 特定保守管理医療機器 224ALBZX00044A01

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。  
※掲載の参考データは、2015年3月現在のものです。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ナカニシ  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 栃木県鹿沼市下日向700

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

お客様窓口 ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.～5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

http://www.gcdental.co.jp

### 支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

### 営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。